

FAQ

Living With Your Implanted Device

Viviendo con el dispositivo implantado



Boston
Scientific


Defining tomorrow, today.™

Cardiology, Rhythm and Vascular
One Boston Scientific Place
Natick, MA 01760-1537 USA
www.bostonscientific.com

Medical Professionals:
1.800.CARDIAC (227.3422)
Patients and Families:
1.866.484.3268

© 2011 by Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

CRM9-3675-0411

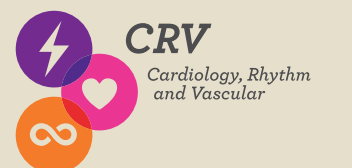

Frequently Asked Questions: Living With Your Device

Recovery and Follow-Up

Q.How do most people feel emotionally after receiving an implanted device?

A. Having an implanted device can be a major turning point in your life. Afterward, you may feel sad or worried. It's an event that may change your thoughts and feelings about your health. Some people may feel vulnerable at first because they depend on an implanted device.

As you return to daily life, your level of confidence and comfort with the implanted device will likely grow. Talk to your doctor if you continue to feel anxious, scared, or depressed. You might want to talk to a therapist or find a support group.

Q.Now that I have an implantable device, do I need to have regular appointments to have it checked?

A. Yes. Your doctor will want to check your device and your overall health on a regular basis. With certain Boston Scientific devices, your doctor may be able to monitor your device remotely while you are at home.

Remote monitoring can be scheduled to replace a clinic visit. Remote follow-up can be done daily or weekly, depending on your doctor's settings, which allows information to come to the clinic between device follow-up times.

- Some pacemakers may be checked with transtelephonic monitoring (TTM). Your doctor must give authorization for you to participate in TTM. Patients with pacemakers from certain manufacturers may use remote monitoring.
- Patients with ICD or CRT defibrillators may use remote monitoring.

Ask your doctor for more information. Your doctor's office will have records of all your follow-up appointments, whether they are done in-person or remotely. These records include your device settings and pertinent information reported from your device's memory.

Your Lifestyle

Q.Are there items I need to keep a certain distance from, or not use?

A. Yes. Some appliances and pieces of equipment give off electromagnetic signals at close range. The influence of these signals is called electromagnetic interference (EMI). Pacemakers, implantable cardioverter defibrillators (ICDs), and cardiac resynchronization therapy (CRT) devices can sometimes detect and respond to these signals. Check with your doctor if you have questions about specific pieces of equipment.

Q.What does EMI do to my device? Is there any type of shield I can use to keep my device safe?

A. An ICD or CRT-D may respond to EMI from some appliances and pieces of equipment by delivering an unnecessary shock or withholding a necessary shock. A pacemaker may withhold necessary pacing. This response to EMI is usually temporary. It will not usually harm your device. There is no way to shield your device from all of the signals. For more information about EMI, refer to your patient handbook, talk to your doctor, or call Boston Scientific Patient Services at 1.866.484.3268 and select the option for technical questions.

Q.When can I start driving again?

A. Your doctor will talk with you about driving restrictions. Decisions about driving are made on an individual basis and in compliance with the laws in your state.

Your Device's Operation

Q.What should I do if I receive a shock from my ICD or CRT-D?

A. If you receive a shock and do not feel OK afterward, or if you get several shocks in quick succession, seek immediate medical attention. Make a plan in advance with your doctor about what to do, or whom to call, if you receive a shock from your device.

Q.Do devices make beeping tones? What should I do if I hear beeping?

A. *Pacemakers and CRT-P devices:* These devices do not make beeping tones.

ICDs and CRT-D devices: These devices can make beeping tones when there is a condition that needs to be checked by a doctor. The device will beep sixteen times in a row and repeat this sequence every 6 hours.

Some strong magnetic fields may also cause an ICD or CRT-D device to make beeping tones. If you hear beeping tones, immediately move away from the object that may be causing the beeping.

Always contact your doctor if you hear beeping.

Q.Does my ICD or CRT-D need to be turned off for certain medical procedures? How do I know which ones and how do I arrange this?

A. Certain procedures may require deactivation of your ICD or CRT-D. Tell the doctor who will be ordering or performing the test that you have an ICD or CRT-D. The doctor can then contact Boston Scientific Technical Services for specific recommendations.

Q.Does an ICD or CRT-D device also have a pacemaker?

A. Yes. All ICDs and CRT-D devices also have a pacemaker inside. They have the full capability of a pacemaker in addition to the functions of the defibrillator in the device.

Batteries and Device Replacement

Q.What conditions cause my device's battery to lose energy? How will I know when the battery gets low, and what happens then?

A. Like any battery, the energy in your device's battery will naturally decrease over time. The battery's life is affected by how much energy is programmed for therapy, and how often your device delivers that therapy. Whenever your doctor or nurse checks your device with the programmer, the battery status is reported.

When the energy in your device's battery decreases to a certain level, your doctor will recommend replacement of your device. The battery in your device cannot be removed and replaced separately. A new device is connected to the existing leads.

Contacting Your Doctor or Boston Scientific

Q.When should I call my doctor?

A. Your doctor will provide guidelines for when you should contact him or her between visits. Your doctor is the best resource to:

- Answer your questions about symptoms and your overall health
- Address your concerns about how your incision is healing
- Answer questions about how your device is programmed, functioning, or performing
- Answer questions about follow-up appointments or scheduling concerns

Q.What services and information does Boston Scientific Patient Services provide?

A. A Boston Scientific Patient Services representative can:

- Answer technical questions about your device
- Provide you with a new Medical Device ID card
- Provide educational materials and handbooks about your device or other Boston Scientific products
- Help you locate a facility where your device can be checked when traveling



Types of implantable heart rhythm devices

- Pacemaker
- ICD: implantable cardioverter defibrillator (also has a pacemaker)
- CRT-D: cardiac resynchronization therapy defibrillator (also has a pacemaker)
- CRT-P: cardiac resynchronization therapy pacemaker

Questions to ask your doctor

We encourage you to talk with your healthcare provider about your condition and treatment options. To help with that conversation, we've listed some questions you may wish to discuss in addition to your own.

Medications

- What medications do I need to take?
- How long do I need to take them?
- Are there any side effects?
- Do I need to take them if I have an implanted device?

Treatment

- How will my heart disease be monitored?
- Will I need other procedures?

Lifestyle and Recovery

- Will I need cardiac rehabilitation?
- When can I return to my regular activities?
- What is the best way to manage my heart disease?

New or Returned Symptoms

- What symptoms or problems should I watch for?
- Who should I contact if I experience symptoms?

For more information

Contact Boston Scientific Patient Services at 1.866.484.3268. Boston Scientific wants to help you lead a full, active life. We know that you may have questions as you adjust to living with your device. While we always recommend that you talk with your doctor first about your specific therapy, we also encourage you to:

Read the patient handbook that came with your device

For additional copies of the handbook, call Boston Scientific Patient Services toll free at 1.866.484.3268 and select the option for technical questions.

Visit www.lifebeatonline.com

Visit www.lifebeatonline.com for stories of other heart patients, explanations of common heart conditions, resources, EMI, travel, and much more.



Our website offers:

- Animations that show how the heart works
- Clear explanations of common heart and blood vessel conditions
- Stories about other heart patients
- Pictures and descriptions of implantable devices
- Concise, printable summaries specific to your Boston Scientific device
- Information on how to be safe around appliances and equipment
- Worldwide clinic locator that identifies where devices can be checked

To contact Boston Scientific Patient Services call

1.866.484.3268

You or your family can call to speak personally with a Patient Services representative.

Preguntas frecuentes: Vivir con un dispositivo

Recuperación y seguimiento

P. ¿Qué emociones experimentan la mayoría de las personas después de que se les implanta un dispositivo?

R. El implante de un dispositivo puede ser un momento crucial en la vida de una persona. Después de la intervención, puede sentir tristeza o preocupación. Es un acontecimiento que puede cambiar sus pensamientos y sentimientos sobre la salud. En primera instancia, algunas personas se sienten vulnerables porque dependen de un dispositivo implantado.

A medida que se reincorpore a su vida habitual, probablemente se incremente su nivel de confianza y comodidad con el dispositivo implantado. Consulte a su médico si continúa sintiendo ansiedad, miedo o depresión. Tal vez quiera consultar a un terapeuta o buscar un grupo de ayuda.

P. Ahora que tengo un dispositivo implantado, ¿debo asistir a citas periódicas para controlarlo?

R. Sí. El médico deberá controlar el dispositivo y su estado de salud general de manera periódica. Gracias a ciertos dispositivos de Boston Scientific, es posible que el médico pueda controlar el dispositivo a distancia mientras usted esté en su casa.

El control a distancia puede programarse para reemplazar la visita a la clínica. El seguimiento a distancia puede hacerse de forma diaria o semanal, según los parámetros de configuración del médico, que permiten que la información llegue a la clínica entre los horarios de seguimiento del dispositivo.

- Algunos marcapasos pueden supervisarse mediante el monitoreo transtelefónico (TTM). El médico debe autorizarlo a participar en el TTM. Los pacientes con marcapasos de determinados fabricantes pueden usar el control a distancia.
- Los pacientes con desfibriladores DCI o TRC pueden usar el control a distancia.

Para obtener más información, consulte a su médico. El médico tendrá en su consultorio los registros de todas las citas de seguimiento, independientemente de que sean en persona o a distancia. Estos registros incluyen los parámetros de configuración del dispositivo y la información correspondiente informada desde la memoria del dispositivo.

Estilo de vida

P. ¿Existen artefactos de los que debo estar alejado o no usar?

R. Sí. Algunos artefactos y equipos emiten señales electromagnéticas en un campo cercano. La influencia de estas señales se denomina interferencia electromagnética (IEM). Los marcapasos, los desfibriladores cardioversores implantables (DCI) y los dispositivos para terapia de resincronización cardíaca (TRC) algunas veces pueden detectar y responder a estas señales. Consulte a su médico si tiene preguntas sobre partes específicas del equipo.

P. ¿Qué produce la IEM en mi dispositivo? ¿Existe algún tipo de protección que puedo usar para proteger mi dispositivo?

R. Un DCI o TRC-D pueden responder a la IEM de algunos artefactos y equipos mediante la generación de una descarga innecesaria o la retención de una descarga necesaria. Un marcapasos puede retener la estimulación necesaria. Por lo general, esta respuesta a una IEM es pasajera. Normalmente, no ocasiona daños en el dispositivo. No existe un medio para proteger su dispositivo de todas las señales. Para obtener más información sobre la IEM, consulte el manual para el paciente, hable con su médico o llame a Servicios a pacientes de Boston Scientific al 1.866.484.3268 y seleccione la opción para consultas técnicas.

P. ¿Cuándo puedo volver a conducir?

R. El médico hablará sobre las restricciones relacionadas con la conducción de vehículos. Las decisiones sobre conducción se realizan de manera individual y según lo establecido por las leyes de su estado.

Funcionamiento del dispositivo

P. ¿Qué sucede si recibo una descarga de un DCI o TRC-D?

R. Si recibe una descarga y no se siente bien después de este incidente, o si recibe varias descargas en una sucesión rápida, busque atención médica de inmediato. Elabore un plan con anticipación con su médico sobre las medidas que debe adoptar o a quién llamar si recibe una descarga del dispositivo.

P. ¿Los dispositivos emiten alarmas sonoras? ¿Qué debo hacer si escucho una alarma sonora?

R. Marcapasos y dispositivos TRC-P: Estos dispositivos no emiten alarmas sonoras.

Dispositivos DCI y TRC-D: Estos dispositivos pueden emitir alarmas sonoras cuando existe una afección que debe ser controlada por el médico. El dispositivo sonará dieciséis veces seguidas y repetirá esta secuencia cada seis horas.

Algunos campos magnéticos potentes también pueden provocar que el dispositivo DCI o TRC-D emitan alarmas sonoras. Si escucha sonidos de alarma, aléjese de inmediato del objeto que puede estar provocando la activación de la alarma.

Comuníquese siempre con el médico si escucha una alarma.

P. ¿Es necesario apagar el DCI o TRC-D para determinados procedimientos médicos? ¿Cómo puedo saber cuáles son y cómo hacerlo?

R. Algunos procedimientos tal vez requieran de una desactivación de su DCI o TRC-D. Informe al médico que solicitará la prueba o al que la realizará que tiene un DCI o TRC-D. El médico podrá comunicarse con Servicios técnicos de Boston Scientific para recibir recomendaciones específicas.

P. ¿El dispositivo DCI o TRC-D también tiene un marcapasos?

R. Sí. Todos los dispositivos DCI y TRC-D también tienen un marcapasos en su interior. Tienen todas las capacidades de un marcapasos además de las funciones del desfibrilador del dispositivo.

Cambio de baterías y dispositivo

P. ¿Qué condiciones provocan que la batería del dispositivo gaste energía? ¿Cómo puedo saber cuándo la batería tiene poca carga y qué sucede en esos casos?

R. Al igual que cualquier batería, la energía de la batería del dispositivo disminuirá naturalmente con el paso del tiempo. La vida útil de la batería depende de la cantidad de energía que esté programada para el tratamiento y la frecuencia con la que el dispositivo administra el tratamiento. Cada vez que el médico o la enfermera controlan el dispositivo con el programador, se informa el estado de la batería.

Cuando la energía de la batería del dispositivo disminuye a un nivel determinado, el médico le recomendará un cambio de dispositivo. La batería del dispositivo no puede retirarse y cambiarse por separado. Se conecta un dispositivo nuevo a las derivaciones existentes.

Contacto con el médico o Boston Scientific

P. ¿En qué momento debo llamar al médico?

- R. El médico le proporcionará pautas sobre los momentos en los que debe llamarlo o entre las visitas. El médico es el mejor recurso para:
- Responder a sus preguntas sobre los síntomas y su salud en general
 - Resolver sus inquietudes sobre cómo está cicatrizando la herida
 - Responder a sus preguntas sobre la programación, el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo
 - Responder a preguntas sobre las citas de seguimiento o las inquietudes de programación de dichas citas

P. ¿Qué servicios e información proporciona el área de Servicios a pacientes de Boston Scientific?

- R. Un representante de Servicios a pacientes de Boston Scientific puede:
- Responder a preguntas técnicas sobre el dispositivo
 - Proporcionarle una tarjeta de identificación del dispositivo médico nuevo
 - Proporcionar material educativo y manuales sobre el dispositivo y otros productos de Boston Scientific
 - Ayudarlo a encontrar un centro donde puedan controlar el dispositivo cuando esté de viaje



Tipos de dispositivos implantables para controlar el ritmo cardíaco

- Marcapasos
- DCI: desfibrilador cardioversor implantable (también tiene un marcapasos)
- TRC-D: desfibrilador para terapia de resincronización cardíaca (también tiene un marcapasos)
- TRC-P: marcapasos para terapia de resincronización cardíaca

Consultas para el médico

Le sugerimos con consulte a su proveedor de atención de salud sobre su afección médica y las opciones de tratamiento. Para colaborar en esa consulta, enumeramos algunas preguntas que tal vez quiera analizar, además de las que ya tenga.

Medicamentos

- ¿Qué medicamentos debo tomar?
- ¿Por cuánto tiempo debo tomarlos?
- ¿Tienen efectos secundarios?

Tratamiento

- ¿Cómo se controlará mi cardiopatía?
- ¿Necesitaré someterme a otros procedimientos?

Estilo de vida y recuperación

- ¿Necesitaré una rehabilitación cardíaca?
- ¿Cuándo puedo retomar mis actividades habituales?
- ¿Cuál es la mejor manera de tratar mi enfermedad cardíaca?

Aparición o reaparición de síntomas

- ¿A qué síntomas o problemas debo estar atento?
- ¿A quién debo consultar si tengo síntomas?

Para comunicarse con Servicios a pacientes de Boston Scientific, llame al 1.866.484.3268.

Para obtener más información

Comuníquese con Servicios a pacientes de Boston Scientific al 1.866.484.3268. Boston Scientific quiere ayudarlo a vivir una vida plena y activa. Sabemos que puede tener preguntas mientras se adapta a vivir con el dispositivo. Si bien siempre le recomendamos que consulte primero a su médico sobre su tratamiento específico, también lo alentamos a que:

Lea el manual para el paciente que se adjunta con el dispositivo

Para obtener más copias del manual, llame al número gratuito de Servicios a pacientes de Boston Scientific al 1.866.484.3268 y seleccione la opción para consultas técnicas.

Visite www.lifebeatonline.com

Visite www.lifebeatonline.com para conocer historias de otros pacientes con problemas cardíacos, explicaciones sobre afecciones cardíacas comunes, recursos, IEM, viajes y mucho más. Nuestro sitio en Internet ofrece:



- Animaciones que muestran el funcionamiento del corazón
- Explicaciones claras sobre afecciones comunes del corazón y los vasos sanguíneos
- Historias sobre otros pacientes con problemas cardíacos
- Imágenes y descripciones de dispositivos implantables
- Resúmenes precisos que se pueden imprimir sobre su dispositivo específico de Boston Scientific
- Información sobre cómo evitar riesgos cuando está cerca de artefactos y equipos
- Localizador mundial de clínicas que identifica dónde puede controlar su dispositivo

Llame al número gratuito de Servicios a pacientes de Boston Scientific al

1.866.484.3268

Usted o su familia puede llamar para hablar personalmente con un representante de Servicios a pacientes.

Important Safety Information

Cardiac Resynchronization Therapy Devices

Cardiac resynchronization therapy pacemakers (CRT-P) and defibrillators (CRT-D) are designed to treat heart failure patients who may or may not have symptoms (CRT-D), or who may have symptoms despite the best available drug therapy (CRT-P and CRT-D). They are also designed to help your heart pump more effectively and meet your body's need for blood flow. CRT-P and CRT-D systems are not for everyone, including people with separate implantable cardioverter-defibrillators (CRT-P only) or certain steroid allergies. Procedure risks include infection, tissue damage, and kidney failure. Patients who should not receive this device include: patients who have additional medical conditions that may not allow the pacemaker to function appropriately (CRT-P only) and patients whose ventricular rhythm disturbances or heart failure have a reversible or temporary cause. In some cases, the device may be unable to detect or appropriately respond to your heart rhythm (CRT-P and CRT-D) or may deliver inappropriate shocks (CRT-D only). In rare cases severe complications or device failures can occur. Electrical or magnetic fields can affect the device. Only your doctor knows what is right for you. These devices are available by prescription only. Individual results may vary. Your physician should discuss all potential benefits and risks with you. For further safety information, refer to the Physicians Instructions for Use or call 1/866-484-3268.

Implantable Cardioverter Defibrillators

An implantable cardioverter defibrillator is designed to monitor and treat heart rhythm problems, greatly reducing the risks associated with them. But it is not for everyone, including people with certain steroid allergies. Procedure risks include infection, tissue damage, and kidney failure. Patients who should not receive this device include: patients whose ventricular rhythm disturbances have a reversible or temporary cause and patients with certain types of atrial rhythm disturbances. Procedure risks include infection and tissue damage. In some cases, the device may not respond to irregular heartbeats or may deliver inappropriate shocks. In rare cases severe complications or device failures can occur. Electrical or magnetic fields can affect the device. Only your doctor knows what is right for you. This device is available by prescription only. Individual results may vary. Your physician should discuss all potential benefits and risks with you. For further safety information, refer to the Physicians Instructions for Use or call 1/866-484-3268.

Pacemakers

A pacemaker system is designed to monitor and treat your heart rhythm problems, greatly reducing the risks associated with them. But it is not for everyone, including patients with certain steroid allergies. Procedure risks include infection, tissue damage, and kidney failure. Patients who have additional medical conditions that may not allow the pacemaker to function appropriately should not receive a device. In rare cases severe complications or device failures can occur. Electrical or magnetic fields can affect the device. Only your doctor knows what is right for you. This device is available by prescription only. Individual results may vary. Your physician should discuss all potential benefits and risks with you. For further safety information, refer to the Physicians Instructions for Use or call 1/866-484-3268.

Device Quality and Reliability

It is Boston Scientific's intent to provide implantable devices of high quality and reliability. However, these devices may exhibit malfunctions that may result in lost or compromised ability to deliver therapy. Refer to Boston Scientific's CRM product performance report on www.bostonscientific.com for more information about device performance, including the types and rates of malfunctions that these devices have experienced historically. While historical data may not be predictive of future device performance, such data can provide important context for understanding the overall reliability of these types of products. Also, it is important that you talk with your doctor about the risks and benefits associated with the implantation of a device.

(Rev. F)

Versiones dirigidas a pacientes con declaración de fiabilidad

Información importante de seguridad

Dispositivos para terapia de resincronización cardíaca

Los marcapasos (TRC-P) y los desfibriladores (TRC-D) para terapia de resincronización cardíaca están diseñados para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden o no tener síntomas (TRC-D), o que pueden tener síntomas a pesar de los mejores tratamientos farmacológicos disponibles (TRC-P y TRC-D). Además, están diseñados para ayudar a que el corazón bombee con más eficacia y pueda satisfacer las necesidades de flujo de sangre del cuerpo. Los sistemas de TRC-P y TRC-D no son aptos para todos los pacientes, incluso aquellos con desfibriladores cardioversores implantables (TRC-P solamente) o los que padecen alergias a algunos esteroides. Los riesgos del procedimiento incluyen infección, lesiones en el tejido e insuficiencia renal. Los pacientes que no deberían recibir estos dispositivos son: los pacientes que tienen otras afecciones médicas que no permiten que el marcapasos funcione de manera adecuada (TRC-P solamente) y los pacientes cuyas alteraciones del ritmo ventricular o insuficiencia cardíaca tienen una causa pasajera o reversible. En algunos casos, es posible que el dispositivo no pueda detectar o responder de manera adecuada a su ritmo cardíaco (TRC-P y TRC-D) o producir descargas inadecuadas (TRC-D solamente). En muy pocos casos, se pueden producir complicaciones graves o fallas en el dispositivo. Los campos eléctricos o magnéticos pueden afectar al dispositivo. Únicamente su médico sabe qué es lo más adecuado para su caso. Estos dispositivos están disponibles sólo con receta. Los resultados individuales pueden variar. El médico deberá analizar todos los posibles beneficios y riesgos con usted. Para obtener más información sobre seguridad, consulte las Instrucciones de Uso para Médicos o llame al 1/866-484-3268.

(Rev. F)

Desfibriladores cardioversores implantables

El desfibrilador cardioversor implantable está diseñado para controlar y tratar los problemas de ritmo cardíaco, ya que reduce drásticamente los riesgos asociados con estas dolencias. Sin embargo, no es apto para todas las personas, incluidas las que tienen alergias a algunos esteroides. Los riesgos del procedimiento incluyen infección, lesiones en el tejido e insuficiencia renal. Los pacientes que no deberían recibir estos dispositivos son: los pacientes cuyas alteraciones del ritmo ventricular tienen una causa reversible o pasajera y los pacientes con determinados tipos de alteraciones del ritmo auricular. Los riesgos del procedimiento incluyen infección y lesiones en el tejido. En algunos casos, el dispositivo puede no responder a latidos irregulares del corazón o producir descargas inadecuadas. En muy pocos casos, se pueden producir complicaciones graves o fallas en el dispositivo. Los campos eléctricos o magnéticos pueden afectar al dispositivo. Únicamente su médico sabe qué es lo más adecuado para su caso. Este dispositivo está disponible sólo con receta. Los resultados individuales pueden variar. El médico deberá analizar todos los posibles beneficios y riesgos con usted. Para obtener más información sobre seguridad, consulte las Instrucciones de Uso para Médicos o llame al 1/866-484-3268.

(Rev. F)

Marcapasos

Un sistema de marcapasos está diseñado para controlar y tratar los problemas de ritmo cardíaco, ya que reduce drásticamente los riesgos asociados con estas dolencias. Sin embargo, no es apto para todos los pacientes, incluidos los que tienen alergias a algunos esteroides. Los riesgos del procedimiento incluyen infección, lesiones en el tejido e insuficiencia renal. Los pacientes con otras afecciones médicas que pueden impedir que el marcapasos funcione correctamente no deberían recibir el dispositivo. En muy pocos casos, se pueden producir complicaciones graves o fallas en el dispositivo. Los campos eléctricos o magnéticos pueden afectar al dispositivo. Únicamente su médico sabe qué es lo más adecuado para su caso. Este dispositivo está disponible sólo con receta. Los resultados individuales pueden variar. El médico deberá analizar todos los posibles beneficios y riesgos con usted. Para obtener más información sobre seguridad, consulte las Instrucciones de Uso para Médicos o llame al 1/866-484-3268.

(Rev. F)

Calidad y confiabilidad del dispositivo

Es el objetivo de Boston Scientific proporcionar dispositivos implantables de alta calidad y de confianza. No obstante, estos dispositivos pueden presentar defectos en el funcionamiento que pueden generar la pérdida o disminución de la capacidad para administrar el tratamiento. Consulte el informe sobre el rendimiento de los productos CRM (control del ritmo cardíaco) del Boston Scientific en www.bostonscientific.com para obtener más información acerca del rendimiento del dispositivo, que incluye los tipos y los índices de defectos en el funcionamiento que estos dispositivos han sufrido históricamente. Si bien es probable que los datos históricos no pronostiquen el rendimiento futuro del dispositivo, dichos datos pueden proporcionar un contexto importante para comprender la confiabilidad general de este tipo de productos. Además, es importante que consulte a su médico sobre los riesgos y beneficios asociados con el implante de un dispositivo.

(Rev. F)