

## CONTAK RENEWAL<sup>®</sup> 3 y 4 Apriete los ocho (8) tornillos

### RESUMEN

Al igual que los desfibriladores para terapia de resincronización cardíaca (TRC-D) CONTAK RENEWAL<sup>®</sup> 1 y 2, los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4 llevan un total de ocho (8) tornillos que deben apretarse al conectar los electrodos al generador de impulsos. Sin embargo, las posiciones de estos tornillos han cambiado en los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4.

Los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4 llevan un total de ocho (8) tornillos que deben apretarse al conectar los electrodos al generador de impulsos. Tal y como se muestra en el siguiente diagrama, cuatro (4) tornillos están ubicados en la parte superior del conector (figura 1), tres (3) en la parte posterior del conector (figura 2), y uno (1) en la parte delantera del conector (figura 3).

**Recuerde: Debe apretar todos los tornillos en los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4.**

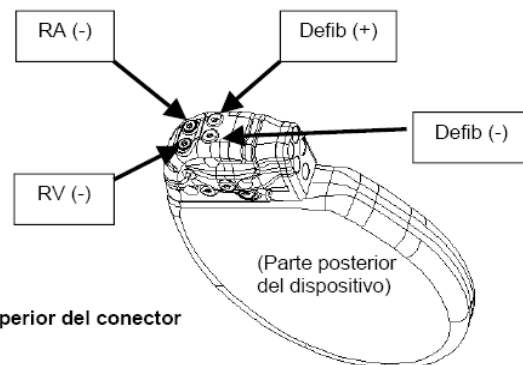


Figura 1. Parte superior del conector

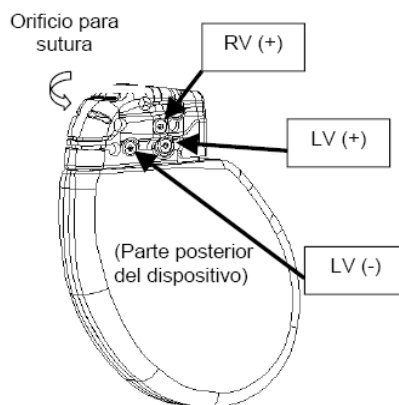


Figura 2. Parte posterior del conector

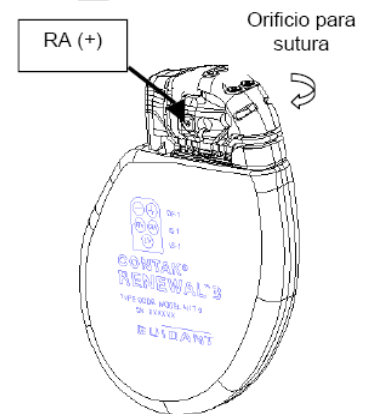


Figura 3. Parte delantera del conector

### PRODUCTOS CRM A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

Las siguientes son marcas registradas de Cardiac Pacemakers, Inc., una compañía de Boston Scientific: CONTAK RENEWAL

Los productos a los que se hace referencia pueden no estar aprobados en todos los países. Para obtener información completa sobre el funcionamiento del dispositivo, consultar las instrucciones de uso del producto correspondiente.

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DE CRM

#### Estados Unidos

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

Servicios Técnicos – EE.UU.

Soporte Clínico para LATITUDE – EE.UU.

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

tech.services@bsci.com

latitude@bsci.com

Servicios a Pacientes

1.866.484.3268

#### Internacional

[www.bostonscientific-international.com](http://www.bostonscientific-international.com)

Servicio Técnico – Europa

+32 2 416 7222

eurtechservice@bsci.com

Atención al cliente internacional de LATITUDE

[www.latitude.bostonscientific-international.com](http://www.latitude.bostonscientific-international.com)

latitude.international@bsci.com