

Sistema de Litotripsia Eletro-Hidráulica Biliar Autolith™ Touch

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

Sistema de litotripsia eletrohidráulica bipolar



Sistema de Litotripsia Eletro-Hidráulica Biliar Autolith™ Touch

Sistema de litotripsia eletrohidráulica bipolar

A sonda Autolith Touch apresenta 1.9Fr e 375cm, e trata-se de um dispositivo de uso único que deve ser utilizado com o Gerador Autolith Touch EHL. Foi otimizada para operar com o Sistema de Colangioscopia SpyGlass™, possibilitando a litotripsia de cálculos biliares grandes ou impactados.

Configuração aprimorada

A sonda do Autolith Touch possui comprimento amplo e ponta chanfrada/arredondada para facilitar a passagem através do Cateter do SpyScope™. Sua estrutura é reforçada e projetada para evitar torções/dobras durante o procedimento.

Gerador Autolith Touch EHL

Apresenta 30 Hz de frequência de pulsos, possibilitando o disparo de 1-30 pulsos. Sua tensão de entrada é de 100-240V 2A 50/60 Hz. Confira abaixo as características do sistema:

Regulação automática da potência

Projetado para fornecer um equilíbrio preciso de energia e evitar sobrecarga para a sonda.

Detector inteligente de troca

O sistema monitora automaticamente a operação da sonda, alertando o usuário sobre quando considerar a substituição da mesma.

Painel com informações sobre a operação

A tela, colorida e sensível ao toque, facilita o uso do Gerador Autolith e a compreensão das informações exibidas ao longo do uso.

Informações para pedidos

Sonda Biliar EHL

Número do Pedido	Descrição
M00546620	1.9 Fr., 375cm Sonda Biliar EHL

Gerador Autolith Touch

Número do Pedido	Descrição
M005466800	Gerador Autolith Touch EHL


Acessórios Autolith Touch

Número do Pedido	Descrição
M00546750	Autolith Touch Cabo Extensor
M00546760	Autolith Touch Pedal

Número de Registro Anvisa (Brasil): 10341351012

Produtos apresentados apenas para fins informativos - não destinados a promoção ou oferta de venda.

CUIDADO: A lei restringe a venda desses dispositivos por médicos ou mediante prescrição médica. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo. Produtos mostrados apenas para fins de INFORMAÇÃO e não podem ser aprovados ou vendidos em determinados países. Este material não se destina ao uso na França.

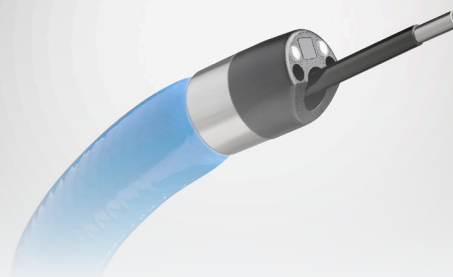

Dicas para usuários

- Utilizar solução salina para irrigar. As propriedades de condutividade da solução salina propiciam o funcionamento adequado da litotripsia eletro-hidráulica. Água estéril não deverá funcionar.
- Dependendo da composição do cálculo, podem ser necessárias mais de uma sonda para obtenção do resultado de litotripsia. Embora isso não seja comum, pode ser observado com cálculos maiores e mais duros.
- O posicionamento indicado para a ponta da sonda é de 1-2 mm de distância da superfície do cálculo, a fim de se obter uma pressão ideal.
- Iniciar com 3-5 pulsos por ativação do pedal. Normalmente, o cálculo se moverá inicialmente, o que pode dificultar a manutenção do posicionamento da sonda na distância ideal (de 1-2 mm). Se você aumentar o número de pulsos, os posteriores se tornarão menos eficazes e trarão impacto à vida útil da sonda. Contudo, caso o cálculo esteja relativamente estável, é possível aumentar o número de pulsos com segurança.
- Começar com baixa potência, subindo gradativamente até média/alta, caso seja necessário. Como já explicado, o processo de litotripsia eletro-hidráulica pode danificar a ponta da sonda, por isso, começando com potência reduzida, você prolongará o tempo de uso do produto.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™