




Cateter de Apoio **Rubicon™ Control**
Guia Técnico para Avaliação e Aquisição de Tecnologia

Índice

Visão Geral da Tecnologia	3
Especificações Técnicas	4
Especificações de Tamanho	7
Códigos dos Produtos	8

Cateter de Apoio **Rubicon™ Control**

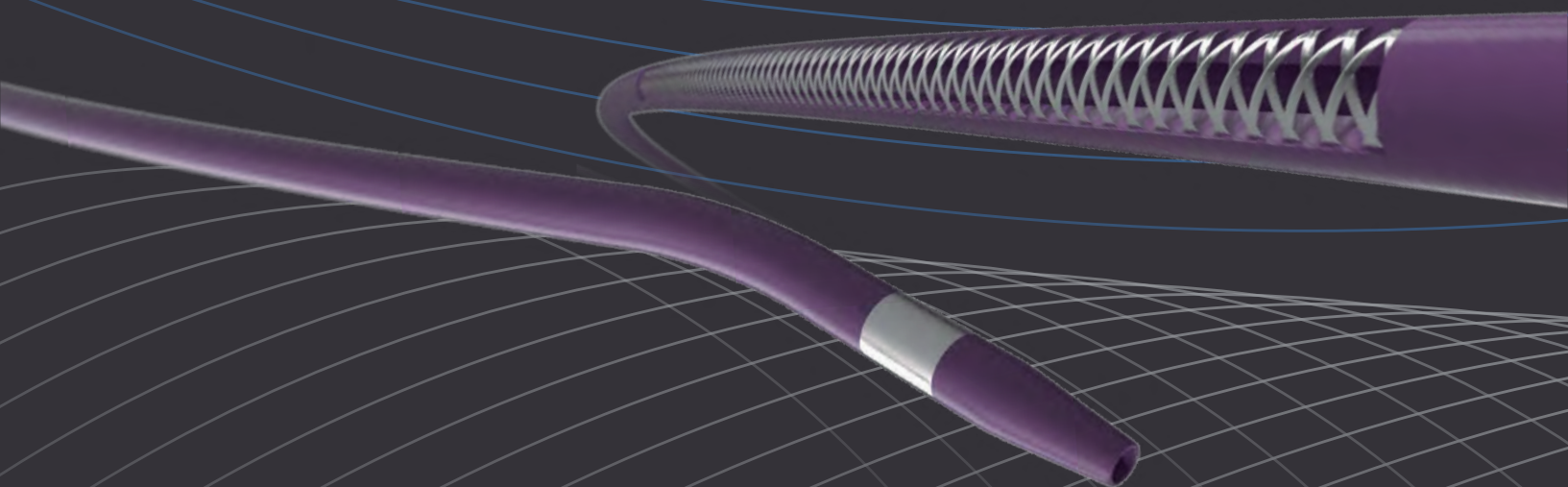

Visão Geral da Tecnologia

Cateter de Apoio Rubicon™ Control – Suporte, Navegação e Versatilidade em um Único Cateter

O Cateter de Apoio Rubicon™ Control foi projetado para facilitar a colocação e o suporte de fios-guia e outros dispositivos intervencionistas na vasculatura periférica. Seu design com shaft trançado, revestimento hidrofílico distal e marcadores radiopacos auxilia a navegação, o posicionamento e a troca de fios-guia durante procedimentos endovasculares periféricos.



Opções de Pontas
com Ângulos
e Retas



Núcleo de Aço
Inoxidável com
Trançado



Excelente Resposta
de Torque



Compatível com
fios-guia 0,014",
0,018" e 0,035"

Especificações Técnicas

Recurso	Detalhes
Revestimento interno	PTFE
Fio Trançado	Aço Inoxidável
Camada Externa	Mistura de Vestamid
Extrusão da Ponta	Pebax
Manga de encapsulamento	Pebax
Faixa Marcadora	Platina-Irídio
Revestimento	Z-Glide
Embalagem	Embalagem reta
Esterilização	Gás Óxido de Etileno


Ponta Angular

As pontas anguladas permitem o controle direcional e fornecem suporte para navegação na vasculatura periférica

40/45 graus


20 graus

0 grau

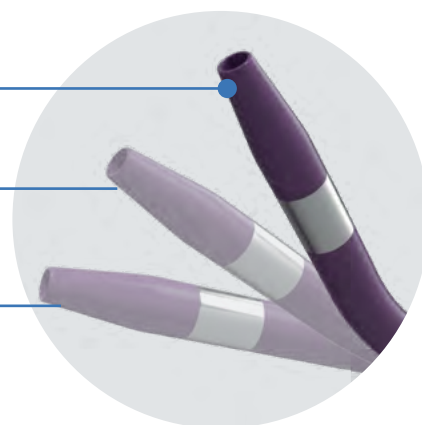

Faixas Marcadoras

Três faixas marcadoras de platina-irídio posicionadas a 5 cm de distância umas das outras para excelente visibilidade e posicionamento.

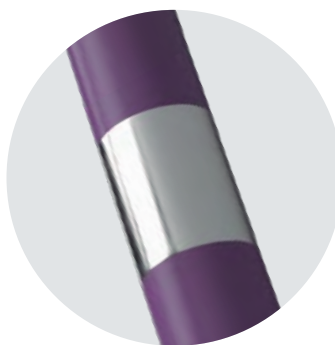




Especificações Técnicas


Trançado

O trançado de aço inoxidável proporciona melhor resposta ao torque, capacidade de avanço, suporte aos fios-guia e resistência a torções.

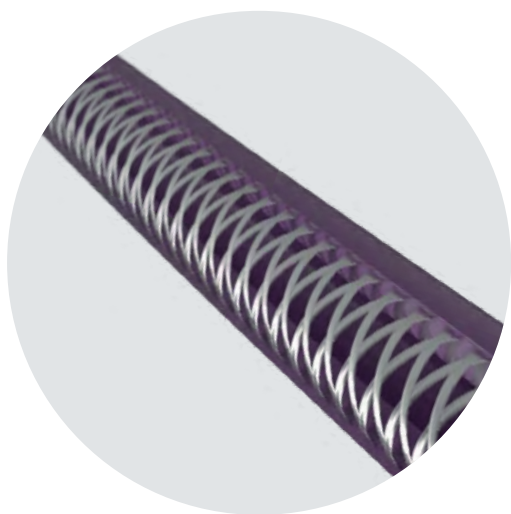

Revestimento Hidrofílico

Revestimento hidrofílico Z-Glide exclusivo nos 40 cm distais para um deslocamento suave pela vasculatura.

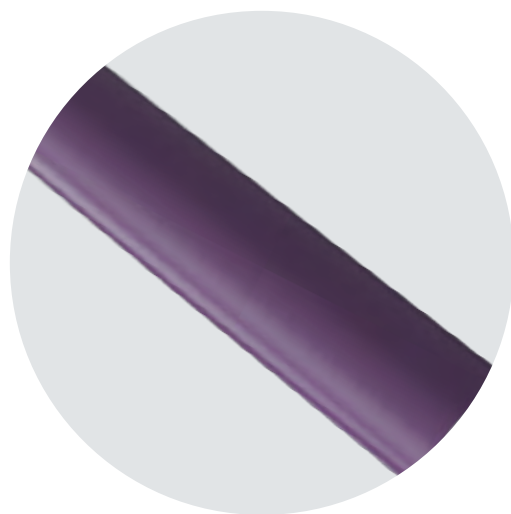


Conector Ergonômico

As asas, o torquer integrado e o alívio de tensão foram projetados para facilitar o manuseio do dispositivo.

Torquer

Asas

**Alívio de
tensão
integrado**

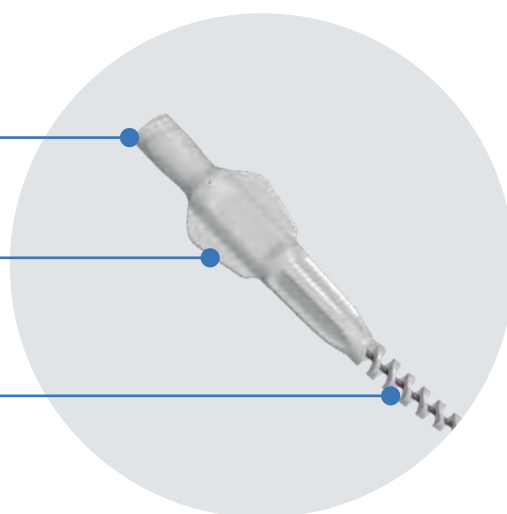




Cateter de Apoio **Rubicon™ Control**

Especificações Técnicas

Resposta de Torque

Com suas características de design combinadas, os cateteres de apoio Rubicon™ Control apresentam resposta de torque responsiva, auxiliando a transmissão da rotação do conector para a ponta distal durante a navegação.

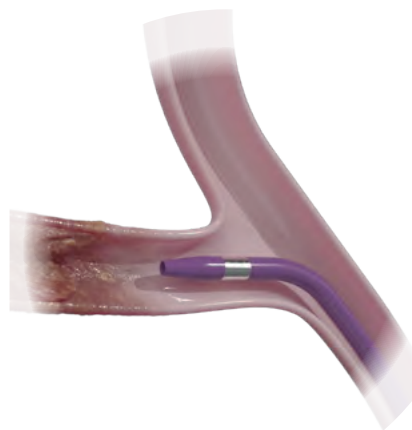

Coaxial

Cateteres de 0,014" ou 0,018" podem ser usados coaxialmente dentro de um cateter de 0,035", oferecendo uma opção adicional de suporte durante a navegação.





Especificações de Tamanho

					
		Reta	20 graus	40 graus	45 graus
.035"	90 cm		✓		
	135 cm	✓			
	150 cm	✓	✓		✓
.018"	150 cm	✓		✓	
.014"	150 cm			✓	



Cateter de Apoio **Rubicon™ Control**

Códigos dos Produtos

Nº do catálogo de ref.	Descrição do Material
H749394321415A0	RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (SGL)
H749394321415A1	RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (BX5)
H749394321815A0	RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (SGL)
H749394321815A1	RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (BX5)
H749394321815S0	RUBICON CONTROL 018 150 STR (SGL)
H749394321815S1	RUBICON CONTROL 018 150 STR (BX5)
H749394323509A0	RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (SGL)
H749394323509A1	RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (BX5)
H749394323513S0	RUBICON CONTROL 035 135 STR (SGL)
H749394323513S1	RUBICON CONTROL 035 135 STR (BX5)
H749394323515A0	RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (SGL)
H749394323515A1	RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (BX5)
H749394323515B0	RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (SGL)
H749394323515B1	RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (BX5)
H749394323515S0	RUBICON CONTROL 035 150 STR (SGL)
H749394323515S1	RUBICON CONTROL 035 150 STR (BX5)

Cateter de Apoio RUBICON™ Control

ATENÇÃO: A lei restringe estes dispositivos à venda por ou sob a ordem de um médico.

Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na etiqueta do produto fornecida com cada dispositivo ou em www.IFU-BSCI.com.

Os produtos mostrados são apenas para FINS DE INFORMAÇÃO e podem não estar aprovados ou à venda em certos países. Este material não é destinado ao uso na França.

Medições realizadas pela Boston Scientific. Dados em arquivo. Os valores reais podem variar.

2026 Copyright © Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Os resultados do teste de bancada ou do estudo pré-clínico podem não ser necessariamente indicativos do desempenho clínico. Os testes foram realizados pela BSC ou em seu nome. Dados em arquivo.



Intervenções Periféricas
Av. Das Nações Unidas, 14.171 - Torre Marble 12º andar
CEP: 04794-000 - São Paulo - SP
www.bostonscientific.com

© 2026 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas.
Todos os direitos reservados.

PI-2517006-AA