


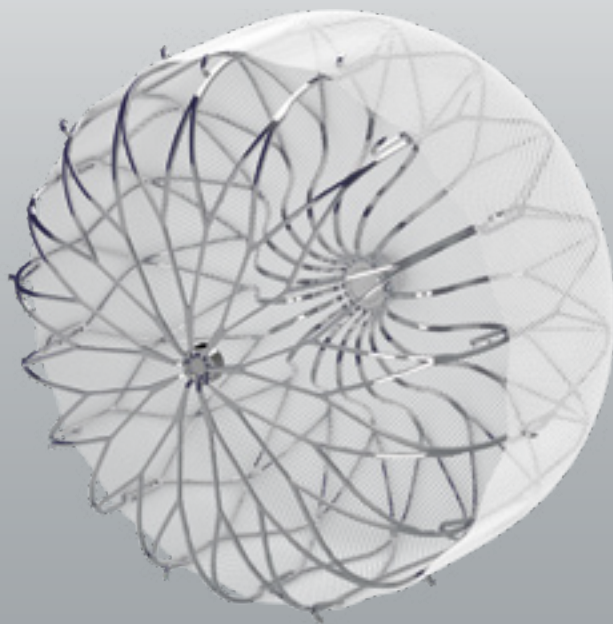

WATCHMAN FLXX

AVANCE PARA O FUTURO DA
OAAE COM CONFIANÇA.

WATCHMAN FLXX™
DISPOSITIVO DE OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO

APROVEITANDO A EXPERIÊNCIA DE UMA PLATAFORMA CLINICAMENTE COMPROVADA...

Dispositivo de Oclusão do Apêndice Atrial Esquerdo
um design único com resultados comprovados para redução do risco de AVC
em pacientes com FA



> 80,000
pacientes tratados



>6,800
pacientes avaliados em
estudos clínicos



>11,000
pacientes avaliados em
estudos clínicos



GLOBAL
alcance

...PARA AVANÇAR PARA O FUTURO DA OAAE.
COM CONFIANÇA.

PERCEPÇÃO.

Controle total para um posicionamento intuitivo, seguro e preciso

VEDAÇÃO.

Conformabilidade aprimorada para fechamento confiável

CICATRIZAÇÃO.

Exposição mínima de metal para cicatrização otimizada




PERCEPÇÃO.


Controle total para um posicionamento intuitivo, seguro e preciso

Extremidade distal suave, fechada e atraumática com marcador fluoroscópico para permitir o avanço dentro do AAE quando parcialmente implantado.

100% recuperável e reposicionável.

O comprimento curto do dispositivo facilita a implantação em apêndices rasos.

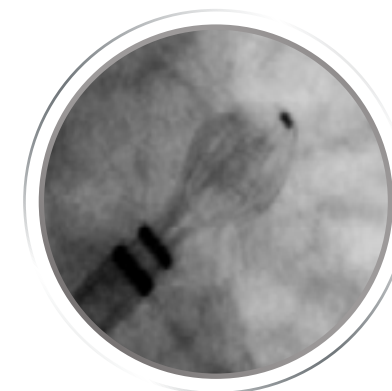

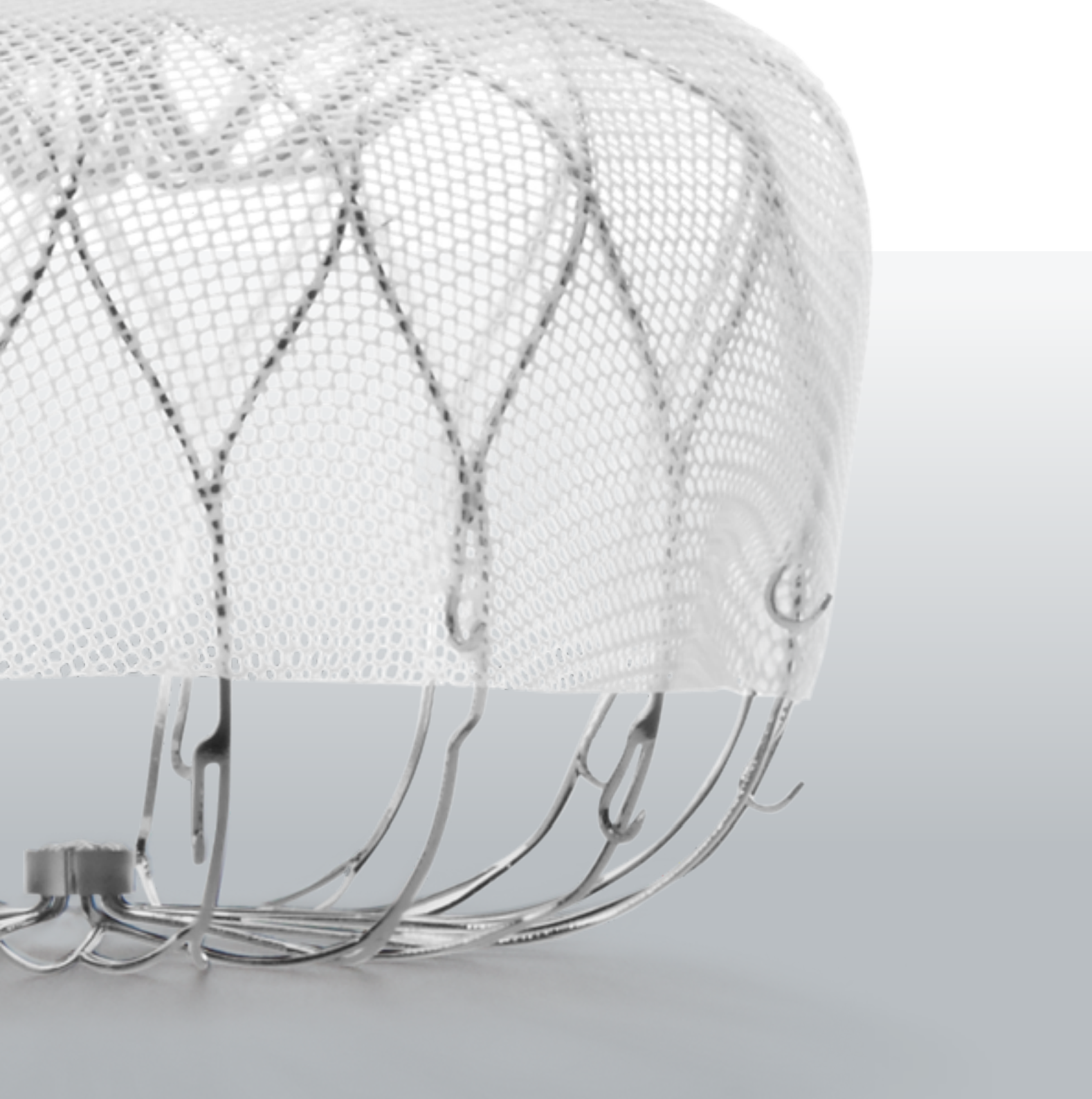

VEDAÇÃO.

Conformabilidade aprimorada para fechamento confiável

A armação de Nitinol com 18 estruturas atende às anatomias AAE desafiadoras, fornecendo aposição ideal do tecido PET ao AAE, minimizando o risco de vazamentos peri-dispositivo.

As 18 âncoras escalonadas em duas filas garantem uma estabilidade confiável no AAE.




CICATRIZAÇÃO.

Exposição mínima de metal para cicatrização otimizada

O WATCHMAN FLX apresenta uma inserção roscada com exposição metálica reduzida, promovendo a endotelização do dispositivo. O tecido PET é projetado para melhorar a cicatrização.

Design intra-AAE único e comprovado para fechar o apêndice atrial esquerdo sem comprometer as estruturas circundantes, como válvula mitral ou veia pulmonar superior.

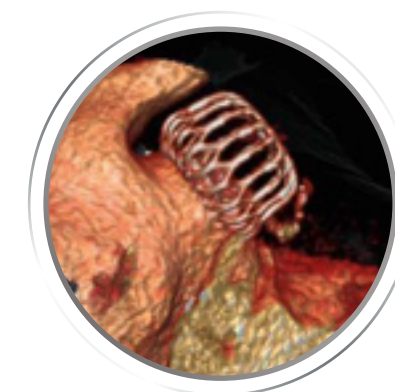


FLEXIBILIDADE PARA EXPANDIR OPÇÕES DE TRATAMENTO

O Dispositivo WATCHMAN FLX™ é fornecido em cinco tamanhos e pode tratar óstios de 14 mm a 31,5 mm.



A faixa de compressão **entre 10% e 30%** permite flexibilidade na seleção do dispositivo para se adaptar à largura e ao comprimento do AAE.

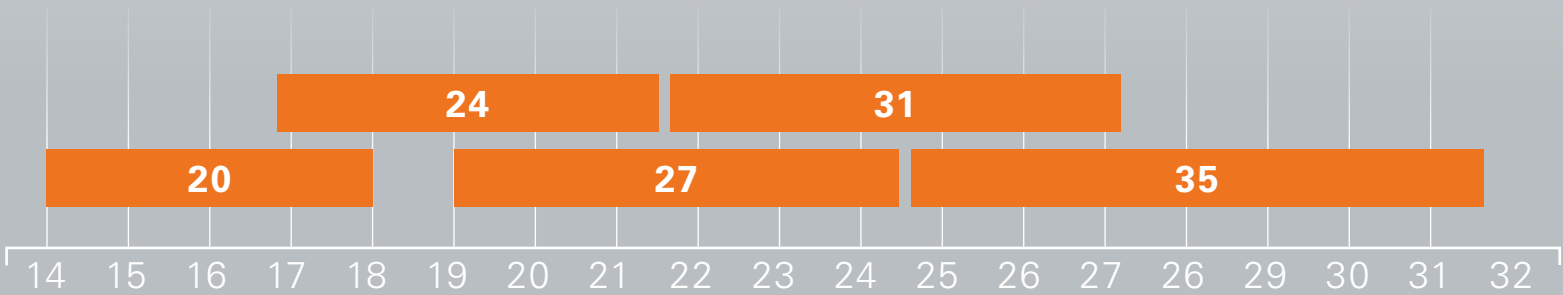

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

	Nº de Ref./Catálogo	Descrição do Produto	Tamanho	Número do pedido (GTIN)	ID	OD
DISPOSITIVO DE OAAE WATCHMAN FLX™	M635WS50200	Dispositivo de OAAE WATCHMAN FLX™ e Sistema de Entrega	20 mm	08714729860433	–	12 F (4.0 mm)
	M635WS50240	Dispositivo de OAAE WATCHMAN FLX™ e Sistema de Entrega	24 mm	08714729860440	–	12 F (4.0 mm)
	M635WS50270	Dispositivo de OAAE WATCHMAN FLX™ e Sistema de Entrega	27 mm	08714729860457	–	12 F (4.0 mm)
	M635WS50310	Dispositivo de OAAE WATCHMAN FLX™ e Sistema de Entrega	31 mm	08714729860464	–	12 F (4.0 mm)
	M635WS50350	Dispositivo de OAAE WATCHMAN FLX™ e Sistema de Entrega	35 mm	08714729860471	–	12 F (4.0 mm)
	Nº de Ref./Catálogo	Descrição do Produto	Curva	Número do pedido (GTIN)	DI	DE
Bainha de Acesso WATCHMAN™ TruSeal™	M635TS70010	Sistema de Acesso WATCHMAN™ TruSeal™	Único	08714729965732	12 F (4.2 mm)	14 F (4.8 mm)
	M635TS70020	Sistema de Acesso WATCHMAN™ TruSeal™	Duplo	08714729965749	12 F (4.2 mm)	14 F (4.8 mm)

Ressonância Magnética

Testes não clínicos mostraram que o dispositivo WATCHMAN FLX é Condicional para RM. Um paciente com o Dispositivo de Oclusão pode ser examinado com segurança imediatamente após a colocação desse implante nas seguintes condições:

- Campos magnéticos estáticos de 3,0 Tesla ou 1,5 Tesla
- Campo gradiente espacial de 2500 Gauss/cm ou inferior
- Produto de campo gradiente espacial de 37 T2/m ou inferior
- A taxa de absorção específica média máxima de corpo inteiro (SAR) deve ser limitada a 2,0 W/kg (modo de operação normal apenas) por 15 minutos de aplicação contínua de energia de RF durante uma varredura
- Modo de operação normal do scanner de RM

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso foram fornecidas apenas em países com registros de produtos da autoridade sanitária aplicável. Estes materiais não se destinam para uso na França.

Impresso na Alemanha por medicalvision.

Boston Scientific Confidencial - Apenas para uso interno. É proibida a cópia, divulgação ou distribuição externa. SH-814104-AA

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2019 Boston Scientific Corporation ou
suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
DINSH0220EA

SH-1119206-AA SET 2021