

**MODELL 3300 LATITUDE™ PROGRAMMERINGSSYSTEM  
TILLEGG TIL PULSGENERATORMANUALER\***

\*Kardiologens tekniske manualer og referanseguider

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældret version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Urekt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizar.  
Elavult versio. Nenaudokite.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Dette tillegget gir en oversikt over de viktigste forskjellene mellom modell 3120 ZOOM® LATITUDE programmeringssystem og modell 3300 LATITUDE programmeringssystem (kanskje ikke tilgjengelig overalt ennå).

De gjeldende pulsgeneratormanualene beskriver funksjoner og funksjonalitet ved bruk med modell 3120 programmeringssystem og en pacesystemanalysator (PSA), dvs. modell 3145. Denne litteraturen er et tillegg til innholdet i de manualene.

MERKNAD: Modell 3300 programmeringssystem har de samme grunnleggende egenskapene og tiltenkte bruk som modell 3120 programmeringssystem (figur 1).


## Primære ressurser

Separate manualer beskriver modell 3300 LATITUDE programmeringssystem. Les disse først:

- Brukermanualen for LATITUDE programmeringssystem, modell 3300
- Brukermanualen for Patient Data Management, modell 3931
- Brukermanualen for nettverk og kommunikasjon, modell 3924

MERKNAD: For PSA-funksjonalitet, se brukermanualen for pacesystemanalysator (PSA), modell 3922.

Du finner elektroniske eksemplarer på [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). Kontakt Boston Scientific ved å bruke informasjonen på baksiden av dette tillegget for trykte eksemplarer.

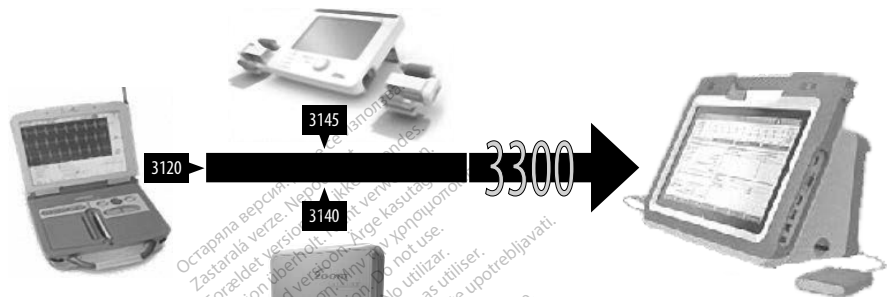

Figur 1. Modell 3300 programmeringsystem

## Viktige forskjeller

### Programvare

- Modell 3868 ICD/CRT-D-støtteapplikasjonen erstatter modell 2868-applikasjonen.
  - Modell 3868 erstatter også modell 2868 i PG-røntgenidentifikatoren.

- Modell 3869 Pacemaker/CRT-P-støtteapplikasjonen erstatter modell 2869-applikasjonen.
  - Modell 3869 erstatter også modell 2869 i PG-røntgenidentifikatoren.
- Modell 3909 systemprogramvareapplikasjon med Quickstart-appen erstatter modell 3923-applikasjonen.

### **Nettverk**

- Trådløs overføring av pasientdata er nå mulig via Bluetooth®.

### **Taster**

- RED STAT-knappen erstatter de harde funksjonstastene STAT PACE, STAT SHOCK og DIVERT THERAPY. Den gir støtte for PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock og Divert.
- De harde funksjonstastene INTERROGATE og PROGRAM er erstattet med programmerbare taster.
- Sanntids loggfunksjonalitet erstatter de harde funksjonstastene for papirhastighet. Programmerbare taster erstatter de harde funksjonstastene Calibrate og Baseline.

### **Data Storage** (Datalagring)

- USB erstatter diskettstasjon/-støtte.

### **Utskrift**

- Støtte for ekstern skriver via USB og Bluetooth® erstatter den interne strimmelskriveren.

## **Zoom Wireless Transmitter**

- Intern maskinvare erstatter Zoom Wireless Transmitter.

## **Støtte for RF-telemetri**

Følgende modeller bruker bare telemetri med stav til SRD-telemetri er sertifisert i henhold til radioutstyrsdirektivet for modell 3300 programmerer:

### **COGNIS-/TELIGEN-familiene**

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

### **INGENIO-familien**

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278
- FORMIO MRI: J279

- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

#### PROGENY-familien

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

#### **Eldre pulsgeneratorer**

- Modell 3300 programmerer støtter de fleste pulsgenerator fra Boston Scientific. Kontakt om ønskelig Boston Scientific for å avgjøre hvilke modeller av pulsgeneratorer som støttes.

## Varemerkeklæringer

Følgende er varemerker som tilhører Boston Scientific Corporation eller deres tilknyttede selskaper: LATITUDE og ZOOM.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth® SIG.

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Föråldrat version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutage.  
Πολύ έξδωον. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Ne utilizzate.  
Novecojuši versija. Nenaudokite.  
Pasenusi versija. Non utilizzare.  
Elavult versió. Ne használjat.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Urekt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizar.  
Elavult versio. Nenaudokite.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. A nu se utiliza.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Urekt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizar.  
Elavult versio. Nenaudokite.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. A nu se utiliza.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Urekt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizare.  
Elavult versio. Neizmantot.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Nepoužívať.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

# Boston Scientific



92059496-009 NO 2017-02



PRODUSENT

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

PRODUSERT VED

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

AUTORISERT REPRESENTANT I EUROPA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

AUS

AUSTRALSK SPONSORADRESSE

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.