



MODEL 3300 LATITUDE™-PROGRAMMERINGSSYSTEM TILLÆG TIL VEJLEDNINGER TIL PULSGENERATOR*

***Tekniske vejledninger og opslagsværker til lægen**

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versió. Ne használja!
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaralá verzió. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Dette tillæg giver en oversigt på højt niveau af de vigtigste forskelle mellem Model 3120 ZOOM® LATITUDE-programmeringssystemet og Model 3300 LATITUDE-programmeringssystemet (er muligvis ikke tilgængelige i alle lande).

De eksisterende vejledninger til pulsgenerator beskriver egenskaber og funktioner, når den bruges med Model 3120-programmeringssystem samt en pacing system analyzer, f.eks. Model 3145; denne litteratur er et tillæg til indholdet af disse vejledninger.

BEMÆRK: Model 3300-programmeringssystemet har samme grundlæggende egenskaber og beregnet anvendelse som Model 3120-programmeringssystemet (figur 1).


Primære ressourcer

Separate vejledninger beskriver Model 3300 LATITUDE-programmeringssystemet. Læs disse punkter først:

- Driftsvejledning til LATITUDE-programmeringssystemet, Model 3300
- Driftsvejledning til patientdatastyring, Model 3931
- Driftsvejledning til netværk og forbindelse, Model 3924

BEMÆRK: Se driftsmanual til Pacing System Analyzer (PSA), Model 3922, vedrørende PSA-funktioner.

Gå til www.bostonscientific-elabeling.com for de elektroniske versioner. Kontakt Boston Scientific ved hjælp af oplysningerne på bagsiden af dette tillæg for at få printede versioner.

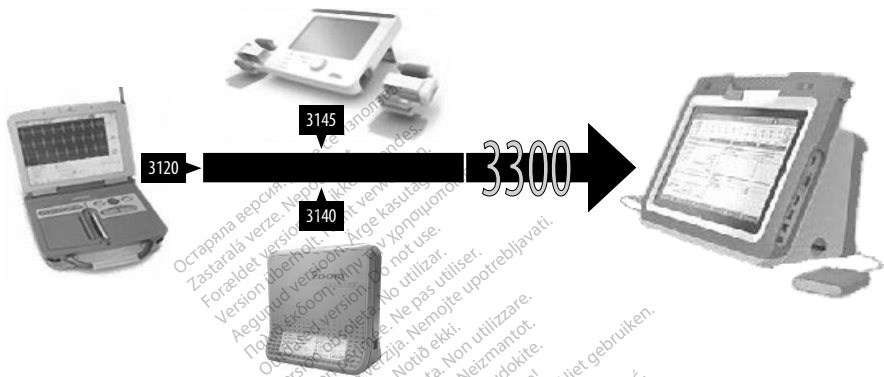

Figur 1: Model 3300 LATITUDE™-programmeringsystem

Vigtigste forskelle

Software

- Model 3868 ICD/CRT-D-supportprogrammet erstatter Model 2868-programmet.
 - Model 3868 erstatter ligeledes Model 2868 inden for PG X-Ray Identifier.

- Model 3869 Pacemaker/CRT-P-supportprogrammet erstatter Model 2869-programmet.
 - Model 3869 erstatter ligeledes Model 2869 inden for PG X-Ray Identifier.
- Model 3909-systemsoftwaren med Quickstart-app erstatter Model 3923-programmet.

Netværk

- Trådløs overførsel af patientdata nu muligt via Bluetooth®.

Taster

- RED STAT-knappen erstatter de forprogrammerede STAT PACE-, STAT SHOCK- og DIVERT THERAPY-funktionstaster. Den giver support til PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock og Divert.
- De forprogrammerede INTERROGATE- og PROGRAM-funktionstaster erstattes af programmerbare taster.
- Logfunktionalitet i realtid erstatter de forprogrammerede papirhastighedstaster. De programmerbare taster erstatter de forprogrammerede Calibrate- og Baseline-taster.

Datalagring

- USB erstatter floppydiskdrev/-support.

Udskrivning

- Support af ekstern printer via USB og Bluetooth® erstatter Internal Strip Chart Recorder

Zoom trådløs sender

- Intern hardware erstatter Zoom trådløs sender.

Understøttelse af RF-telemetri

Følgende modeller bruger kun telemetri med telemetrikontrol, indtil SRD-telemetri (Short Range Device) er godkendt iht. radioudstyrsdirektivet (RED) for model 3300 af programmeringsenheden:

COGNIS-/TELIGEN-produktserierne

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

INGENIO-produktserien

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278
- FORMIO MRI: J279

- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

PROGENY-produktserien

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

Tidligere pulsgeneratorer

- Model 3300-programmet understøtter de fleste nuværende Boston Scientific-pulsgeneratorer. Kontakt Boston Scientific, hvis det er behov for at få fastlagt hvilke modeller af pulsgeneratorer, der understøttes.

Varemærkerklæring:

Følgende er varemærker tilhørende Boston Scientific Corporation eller dets datterselskaber: LATITUDE og ZOOM.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth® SIG.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Version pérmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzate.
Zastariela verzija. Neizmantoj.
Ureikt útgáfa. Notaðu ekki.
Versione obsoleta. Nie używać.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke bruges.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használd.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használd.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használd.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



92059496-010 DA 2017-02



PRODUCENT

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

FREMSTILLET HOS

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

AUTORISERET REPRÆSENTANT I DEN EUROPÆISKE UNION

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

AUS

AUSTRALSK SPONSORADRESSE

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.