



PROGRAMOVACÍ SYSTÉM LATITUDE™
MODEL 3300
DODATEK K PŘÍRUČCE PRO GENERÁTOR PULSŮ*

*Referenční příručky a technické návody k použití pro lékaře

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Novecojusi versija. Neizmantot.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke bruges.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Tento dodatek obsahuje pokročilý přehled hlavních rozdílů mezi programovacím systémem LATITUDE® ZOOM Model 3120 a programovacím systémem LATITUDE Model 3300 (nemusí být zatím dostupný ve všech zemích).

Současné příručky pro generátor pulsu popisují vlastnosti a funkce při použití programovacího systému Model 3120 a analyzátoru stimulačního systému (PSA), tj. Model 3145; tato literatura doplňuje obsah těchto příruček.

POZNÁMKA: Programovací systém Model 3300 má stejné základní funkce a stanovený účel použití jako programovací systém Model 3120 (obrázek 1).


Primární zdroje

Programovací systém LATITUDE Model 3300 popisují samostatné příručky. Nejprve si přečtěte tyto položky:

- Návod k obsluze programovacího systému LATITUDE, Model 3300
- Návod k obsluze správy dat pacienta, Model 3931
- Návod k obsluze sítě a připojení, Model 3924

POZNÁMKA: Další informace o funkcích PSA naleznete v návodu k obsluze analyzátoru stimulačního systému, Model 3922.

Elektronické verze naleznete na adrese www.bostonscientific-elabeling.com. Tištěné verze lze vyžádat od společnosti Boston Scientific. Kontakty naleznete na zadní straně tohoto dodatku.

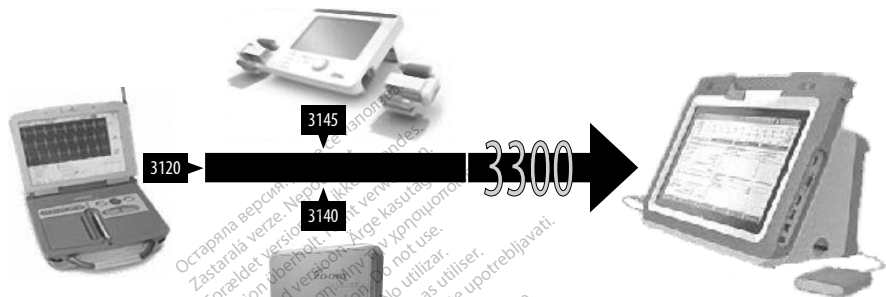

Obrázek 1. Programovací systém Model 3300

Hlavní rozdíly

Software

- Podpůrná aplikace ICD/CRT-D pro Model 3868 nahrazuje aplikaci pro Model 2868.
 - Model 3868 dále nahrazuje Model 2868 v rámci rentgenového identifikátoru PG.

- Podpůrná aplikace kardiostimulátoru/CRT-P pro Model 3869 nahrazuje aplikaci pro Model 2869.
 - Model 3869 dále nahrazuje Model 2869 v rámci rentgenového identifikátoru PG.
- Aplikace softwaru systému a aplikace Quickstart (rychlý start) pro Model 3909 nahrazuje aplikaci pro Model 3923.

Připojení k síti

- Data pacientů lze nyní přenášet bezdrátově pomocí rozhraní Bluetooth®.

Klávesy

- Tlačítko RED STAT nahrazuje hardwarové klávesy STAT PACE (Statimová stimulace), STAT SHOCK (Statimový výboj) a DIVERT THERAPY (Odklonit terapii). Zajišťuje podporu pro funkce PSA STAT Pace (Statimová stimulace PSA), STAT Pace (Statimová stimulace), STAT Shock (Statimový výboj) a Divert (Odklonit terapii).
- Hardwarové funkční klávesy INTERROGATE (Provést dotazování) a PROGRAM (Naprogramovat) jsou nahrazeny softwarovými klávesami.
- Funkce protokolování v reálném čase nahrazuje hardwarovou funkční klávesu rychlosti posunu papíru. Hardwarové funkční klávesy Calibrate (Kalibrovat) a Baseline (Základní hodnota) jsou nahrazeny softwarovými klávesami.

Ukládání dat

- Rozhraní USB nahrazuje podporu disket.

Tisk

- Podpora externích tiskáren pomocí rozhraní USB a Bluetooth® nahrazuje interní tiskárnu záznamů.

Bezdrátový vysílač Zoom Wireless Transmitter

- Interní hardware nahrazuje bezdrátový vysílač Zoom Wireless Transmitter.

Podpora RF Telemetry

Následující modely využívají jen hlavicovou telemetrii, dokud nebude telemetrie pomocí zařízení s krátkým dosahem (SRD) certifikována v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních (RED) pro programátor, model 3300.

Řady COGNIS/TELIGEN

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

Řada INGENIO

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278

- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

Řada PROGENY

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

Generátory pulsů Legacy

- Programátor Model 3300 podporuje nejaktuálnější generátory pulsů společnosti Boston Scientific. Seznam podporovaných generátorů pulsů vám na vyžádání dodá společnost Boston Scientific.

Prohlášení o ochranných známkách

Následující názvy jsou ochranné známky společnosti Boston Scientific nebo jejich přidružených společností: LATITUDE a ZOOM.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth® SIG.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Älge kasutage.
Aegunud versioon. Äge kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzate.
Úreikl útgáfa. Notaðu ekki.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versio. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használja.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke bruges.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. A nu se utiliza.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke bruges.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. A nu se utiliza.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutage.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke bruges.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. A nu se utiliza.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



92059496-014 CS 2017-02



VÝROBCE

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

VÝROBNOU

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE PRO EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

AUS

ADRESA ZASTOUPENÍ PRO AUSTRÁLIÍ

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.