

**Boston
Scientific**

**MODELL 3300 LATITUDE™ PROGRAMMERINGSSYSTEM
TILLEGG TIL PULSGENERATORMANUALER***

*Kardiologens tekniske manualer og referanseguider

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Dette tillegget gir en oversikt over de viktigste forskjellene mellom modell 3120 ZOOM® LATITUDE programmeringssystem og modell 3300 LATITUDE programmeringssystem (kanskje ikke tilgjengelig overalt ennå).

De gjeldende pulsgeneratormanualene beskriver funksjoner og funksjonalitet ved bruk med modell 3120 programmeringssystem og en pacesystemanalysator (PSA), dvs. modell 3145. Denne litteraturen er et tillegg til innholdet i de manualene.

MERKNAD: Modell 3300 programmeringssystem har de samme grunnleggende egenskapene og tiltenkte bruk som modell 3120 programmeringssystem (figur 1).


Primære ressurser

Separate manualer beskriver modell 3300 LATITUDE programmeringssystem. Les disse først:

- Brukermanualen for LATITUDE programmeringssystem, modell 3300
- Brukermanualen for Patient Data Management, modell 3931
- Brukermanualen for nettverk og kommunikasjon, modell 3924

MERKNAD: For PSA-funksjonalitet, se brukermanualen for pacesystemanalysator (PSA), modell 3922.

Du finner elektroniske eksemplarer på www.bostonscientific-elabeling.com. Kontakt Boston Scientific ved å bruke informasjonen på baksiden av dette tillegget for trykte eksemplarer.

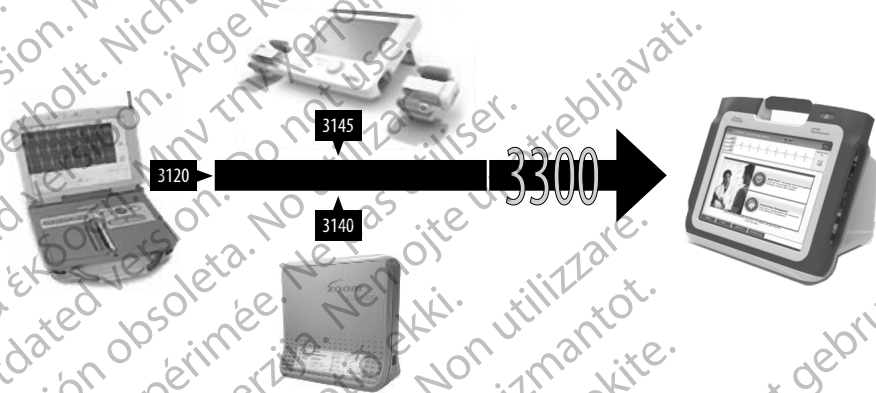

Figur 1. Modell 3300 programmeringsystem

Viktige forskjeller

Programvare

- Modell 3868 ICD/CRT-D-støtteapplikasjonen erstatter modell 2868-applikasjonen.
- Modell 3868 erstatter også modell 2868 i PG-røntgenidentifikatoren.

- Modell 3869 Pacemaker/CRT-P-støtteapplikasjonen erstatter modell 2869-applikasjonen.
 - Modell 3869 erstatter også modell 2869 i PG-røntgenidentifikatoren.
- Modell 3909 systemprogramvareapplikasjon med Quickstart-appen erstatter modell 2909-applikasjonen.

Nettverk

- Trådløs overføring av pasientdata er nå mulig via Bluetooth®.

Taster

- RED STAT-knappen erstatter de harde funksjonstastene STAT PACE, STAT SHOCK og DIVERT THERAPY. Den gir støtte for PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock og Divert.
- De harde funksjonstastene INTERROGATE og PROGRAM er erstattet med programmerbare taster.
- Sanntids loggfunksjonalitet erstatter de harde funksjonstastene for papirhastighet. Programmerbare taster erstatter de harde funksjonstastene Calibrate og Baseline.

Data Storage (Datalagring)

- USB erstatter diskettstasjon/-støtte.

Utskrift

- Støtte for ekstern skriver via USB og Bluetooth® erstatter den interne strimmelskriveren.

Zoom Wireless Transmitter

- Intern maskinvare erstatter Zoom Wireless Transmitter.

Eldre pulsgeneratorer

- Modell 3300 programmerer støtter de fleste pulsgeneratorer fra Boston Scientific. Kontakt om ønskelig Boston Scientific for å avgjøre hvilke modeller av pulsgeneratorer som støttes.

Varemerkeklæringer

Følgende er varemerker som tilhører Boston Scientific Corporation eller deres tilknyttede selskaper: LATITUDE og ZOOM.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth® SIG.

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



PRODUSENT

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

PRODUSERT VED

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC

REP

AUTORISERT REPRESENTANT I EUROPA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

AUSTRALSK SPONSORADRESSE

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-028 NO 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.