

**Boston  
Scientific**

**MODEL 3300 LATITUDE™-PROGRAMMERINGSSYSTEM  
TILLÆG TIL VEJLEDNINGER TIL PULSGENERATOR\***

\*Tekniske vejledninger og opslagsværker til lægen

erze. Nepo-  
version. Må ikke  
n überholt. Nicht verw-  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή-  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreלט útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novecojusi versija. Neizmantot.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
arabite

Dette tillæg giver en oversigt på højt niveau af de vigtigste forskelle mellem Model 3120 ZOOM® LATITUDE-programmeringssystemet og Model 3300 LATITUDE-programmeringssystemet (er muligvis ikke tilgængelige i alle lande).

De eksisterende vejledninger til pulsgenerator beskriver egenskaber og funktioner, når den bruges med Model 3120-programmeringssystem samt en pacing system analyzer, f.eks. Model 3145; denne litteratur er et tillæg til indholdet af disse vejledninger.

**BEMÆRK:** Model 3300-programmeringssystemet har samme grundlæggende egenskaber og beregnet anvendelse som Model 3120-programmeringssystemet (figur 1).


## **Primære ressourcer**

Separate vejledninger beskriver Model 3300 LATITUDE-programmeringssystemet. Læs disse punkter først:

- Driftsvejledning til LATITUDE-programmeringssystemet, Model 3300
- Driftsvejledning til patientdatastyring, Model 3931
- Driftsvejledning til netværk og forbindelse, Model 3924

**BEMÆRK:** Se driftsmanual til Pacing System Analyzer (PSA), Model 3922, vedrørende PSA-funktioner.

Gå til [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com) for de elektroniske versioner. Kontakt Boston Scientific ved hjælp af oplysningerne på bagsiden af dette tillæg for at få printede versioner.

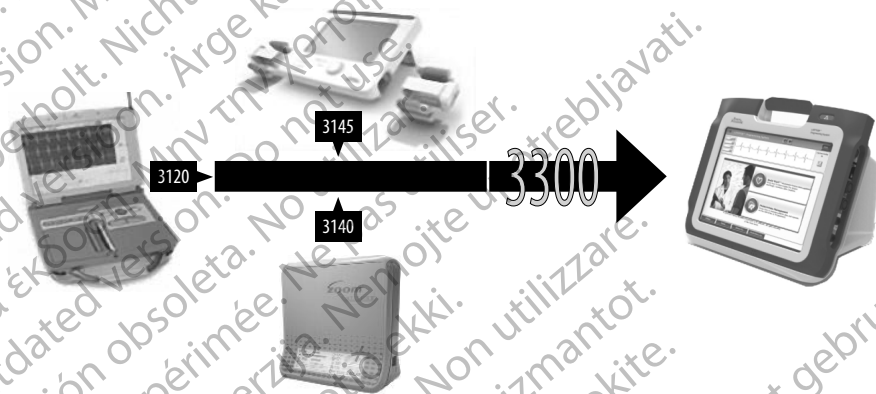

Figur 1. Model 3300 LATITUDE™-programmeringssystem

## Vigtigste forskelle

### Software

- Model 3868 ICD/CRT-D-supportprogrammet erstatter Model 2868-programmet.
- Model 3868 erstatter ligeledes Model 2868 inden for PG X-Ray Identifier.

- Model 3869 Pacemaker/CRT-P-supportprogrammet erstatter Model 2869-programmet.
  - Model 3869 erstatter ligeledes Model 2869 inden for PG X-Ray Identifier.
- Model 3909-systemsoftwaren med Quickstart-app erstatter Model 2909-programmet.

### **Netværk**

- Trådløs overførsel af patientdata nu muligt via Bluetooth®.

### **Taster**

- RED STAT-knappen erstatter de forprogrammerede STAT PACE-, STAT SHOCK- og DIVERT THERAPY-funktionstaster. Den giver support til PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock og Divert.
- De forprogrammerede INTERROGATE- og PROGRAM-funktionstaster erstattes af programmerbare taster.
- Logfunktionalitet i realtid erstatter de forprogrammerede papirhastighedstaster. De programmerbare taster erstatter de forprogrammerede Calibrate- og Baseline-taster.

### **Datalagring**

- USB erstatter floppydiskdrev/-support.

### **Udskrivning**

- Support af ekstern printer via USB og Bluetooth® erstatter Internal Strip Chart Recorder

### **Zoom trådløs sender**

- Intern hardware erstatter Zoom trådløs sender.

### **Tidligere pulsgeneratorer**

- Model 3300-programmet understøtter de fleste nuværende Boston Scientific-pulsgeneratorer. Kontakt Boston Scientific, hvis det er behov for at få fastlagt hvilke modeller af pulsgeneratorer, der understøttes.

### **Varemærkeklæring:**

Følgende er varemærker tilhørende Boston Scientific Corporation eller dets datterselskaber: LATITUDE og ZOOM.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth® SIG.

Outdated version. Do not use.  
 Version obsoleta. No utilizar.  
 Version périmée. Ne pas utiliser.  
 Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
 Úřelt útgáfa. Notið ekki.  
 Versione obsoleta. Non utilizzare.  
 Novcojusi versija. Neizmantot.  
 Pasenusi versija. Nenaudokite.  
 Flavult verzió. Ne használja!  
 een verouderde versie. Niet gebruiken.  
 terminowana. Skal ikke brukes.  
 Não utilize.  
 nu se utiliza.  
 používať.  
 rabite

# Boston Scientific



## PRODUCENT

Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

## FREMSTILLET HOS

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

## AUTORISERET REPRÆSENTANT I DEN EUROPÆISKE UNION

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

|     |
|-----|
| AUS |
|-----|

## AUSTRALSK SPONSORADRESSE

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666



92059496-029 DA 2017-08

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.