

**Boston
Scientific**

**LATITUDE™ PROGRAMMERINGSYSTEM, MODELL 3300
TILLÄGG TILL ANVÄNDARHANDBÖCKER OM PULSGENERATORER***

*tekniska handböcker för läkare och referensmanualer

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Det här tillägget ger en översikt över de huvudsakliga skillnaderna mellan modell 3120 av ZOOM® LATITUDE programmeringsystem och modell 3300 av LATITUDE programmeringsystem (eventuellt ännu inte tillgängligt i alla länder).

Aktuella pulsgeneratorhandböcker beskriver pulsgeneratoremas egenskaper och funktioner när de används med modell 3120 av programmeringsystemet och en pacemakersystemanalysator (PSA), dvs. modell 3145. Det här tillägget är ett komplement till innehållet i dessa handböcker.

NOTERA: Programmeringsystemet av modell 3300 har samma grundläggande funktioner och samma avsedda användning som programmeringsystemet av modell 3120 (figur 1).


Primära resurser

Separata handböcker beskriver modell 3300 av LATITUDE programmeringsystem. Läs följande först:

- Användarhandboken till LATITUDE programmeringsystem, modell 3300
- Användarhandboken om patientdatahantering, modell 3931
- Användarhandboken om nätverk och anslutningsbarhet, modell 3924

NOTERA: Information om PSA-funktioner finns i användarhandboken för pacemakersystemanalysatorn (PSA), modell 3922.

Elektroniska exemplar finns på www.bostonscientific-elabeling.com. Om du vill ha tryckta exemplar kan du kontakta Boston Scientific med hjälp av informationen på baksidan av det här tillägget.

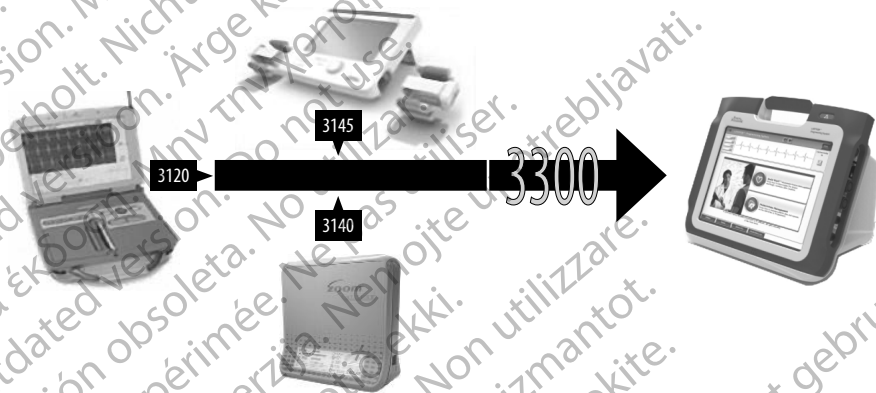

Figur 1. Modell 3300 av programmeringsystemet

Huvudsakliga skillnader

Programvara

- Modell 3868 av ICD/CRT-D Support Application ersätter modell 2868.
- Modell 3868 ersätter även modell 2868 inom pulsgeneratorns röntgenidentifierare.

- Modell 3869 av Pacemaker/CRT-P Support Application ersätter modell 2869.
 - Modell 3869 ersätter även modell 2869 inom pulsgeneratorns röntgenidentifierare.
- Modell 3909 av systemprogramvaran med Quickstart-appen ersätter modell 2909.

Nätverk

- Det går nu att överföra patientdata trådlöst via Bluetooth®.

Knappar

- En RÖD AKUT-knapp ersätter de fasta funktionsknapparna AKUT-PACE, AKUT-CHOCK och AVBRYT BEHANDLING. Den har stöd för PSA AKUT PACE, AKUT-PACE, AKUT CHOCK och Avbryt.
- De fasta funktionsknapparna INTERROGERA och PROGRAMMERA ersätts av programmerbara knappar.
- Realtidsloggfunktionen ersätter de fasta funktionsknapparna för pappershastighet. Programmerbara knappar ersätter de fasta funktionsknapparna Kalibrera och Baslinje.

Datalagring

- USB ersätter diskettenheten/diskettalternativet.

Skriva ut

- Stöd för extern skrivare via USB och Bluetooth® ersätter den inbyggda diagramskrivaren.

Zoom Wireless Transmitter

- Intern maskinvara ersätter Zoom Wireless Transmitter.

Äldre pulsgenerators

- Programmermodell 3300 har stöd för de senaste pulsgenerators från Boston Scientific. Om du vill veta mer om vilka pulsgeneratorsmodeller som stöds kan du kontakta Boston Scientific.

Varumärkesmeddelande

Följande är varumärken som tillhör Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag: LATITUDE och ZOOM.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG.

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



TILLVERKARE
Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

TILLVERKAS VID
Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC REP

AUKTORISERAD REPRESENTANT INOM EUROPEISKA UNIONEN
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

ADRESS TILL AUSTRALIENSISK SPONSOR
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-030 SV 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.