

**Boston
Scientific**

**PROGRAMOVACÍ SYSTÉM LATITUDE™
MODEL 3300
DODATEK K PŘÍRUČCE PRO GENERÁTOR PULSŮ***

*Referenční příručky a technické návody k použití pro lékaře

Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreלט útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantot.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
terminowana. Skal ikke brukes.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
arabite

Tento dodatek obsahuje pokročilý přehled hlavních rozdílů mezi programovacím systémem LATITUDE® ZOOM Model 3120 a programovacím systémem LATITUDE Model 3300 (nemusí být zatím dostupný ve všech zemích).

Současné příručky pro generátor pulsů popisují vlastnosti a funkce při použití programovacího systému Model 3120 a analyzátoru stimulačního systému (PSA), tj. Model 3145; tato literatura doplňuje obsah těchto příruček.

POZNÁMKA: Programovací systém Model 3300 má stejné základní funkce a stanovený účel použití jako programovací systém Model 3120 (obrázek 1).


Primární zdroje

Programovací systém LATITUDE Model 3300 popisují samostatné příručky. Nejprve si přečtěte tyto položky:

- Návod k obsluze programovacího systému LATITUDE, Model 3300
- Návod k obsluze správy dat pacienta, Model 3931
- Návod k obsluze sítě a připojení, Model 3924

POZNÁMKA: Další informace o funkcích PSA naleznete v návodu k obsluze analyzátoru stimulačního systému, Model 3922.

Elektronické verze naleznete na adrese www.bostonscientific-elabeling.com. Tištěné verze lze vyžádat od společnosti Boston Scientific. Kontakty naleznete na zadní straně tohoto dodatku.

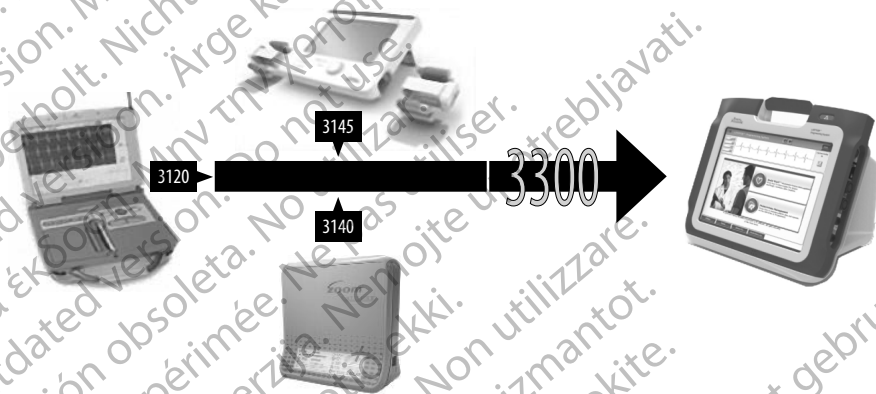

Obrázek 1. Programovací systém Model 3300

Hlavní rozdíly

Software

- Podpůrná aplikace ICD/CRT-D pro Model 3868 nahrazuje aplikaci pro Model 2868.
 - Model 3868 dále nahrazuje Model 2868 v rámci rentgenového identifikátoru PG.

- Podpůrná aplikace kardiostimulátoru/CRT-P pro Model 3869 nahrazuje aplikaci pro Model 2869.
- Model 3869 dále nahrazuje Model 2869 v rámci rentgenového identifikátoru PG.
- Aplikace softwaru systému a aplikace Quickstart (rychlý start) pro Model 3909 nahrazuje aplikaci pro Model 2909.

Připojení k síti

- Data pacientů lze nyní přenášet bezdrátově pomocí rozhraní Bluetooth®.

Klávesy

- Tlačítko RED STAT nahrazuje hardwarové klávesy STAT PACE (Statimová stimulace), STAT SHOCK (Statimový výboj) a DIVERT THERAPY (Odklonit terapii). Zajišťuje podporu pro funkce PSA STAT Pace (Statimová stimulace PSA), STAT Pace (Statimová stimulace), STAT Shock (Statimový výboj) a Divert (Odklonit terapii).
- Hardwarové funkční klávesy INTERROGATE (Provést dotazování) a PROGRAM (Naprogramovat) jsou nahrazeny softwarovými klávesami.
- Funkce protokolování v reálném čase nahrazuje hardwarovou funkční klávesu rychlosti posunu papíru. Hardwarové funkční klávesy Calibrate (Kalibrovat) a Baseline (Základní hodnota) jsou nahrazeny softwarovými klávesami.

Ukládání dat

- Rozhraní USB nahrazuje podporu disket.

Tisk

- Podpora externích tiskáren pomocí rozhraní USB a Bluetooth® nahrazuje interní tiskárnu záznamů.

Bezdrátový vysílač Zoom Wireless Transmitter

- Interní hardware nahrazuje bezdrátový vysílač Zoom Wireless Transmitter.

Generátory pulsů Legacy

- Programátor Model 3300 podporuje nejaktuálnější generátory pulsů společnosti Boston Scientific. Seznam podporovaných generátorů pulsů vám na vyžádání dodá společnost Boston Scientific.

Prohlášení o ochranných známkách

Následující názvy jsou ochranné známky společnosti Boston Scientific nebo jejich přidružených společností: LATITUDE a ZOOM.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth® SIG.

Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreלט útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Flavult verzió. Ne használja!
Novecojusi versija. Nenaudokite.
een verouderde versie. Niet gebruiken.
terminowana. Skal ikke brukes.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



VÝROBCE

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

VÝROBENO V

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC

REP

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE PRO EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

ADRESA ZASTOUPENÍ PRO AUSTRALII
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-033 CS 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.