

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Heart Connect™ System

REF 3932, 3300, 3935, 3936, 3937

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.

Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

Saturs

IEVADS	1
Paziņojumi par preču zīmēm.....	1
Paredzētais lietojums.....	2
Paredzētā mērķauditorija.....	2
Kontrindikācijas.....	2
Bridinājumi.....	2
Piesardzības pasākumi.....	2
Nevēlamās blakusparādības.....	2
Kā Heart Connect sistēma darbojas.....	2
Drošība.....	3
Lietotāju lomas.....	3
Komponenti.....	4
Sistēmas ierobežojumi un apsverumi.....	5
LOKĀLAIS LIETOTĀJS: HEART CONNECT SISTĒMAS IESTATĪŠANA UN IZMANTOŠANA	6
Savienojuma ar internetu konfigurēšana.....	6
Heart Connect sistēmas kontaktpersonas.....	6
Tiešsaistes sapulces sākšana.....	8
Tiešsaistes sapulces vadīšana.....	9
Heart Connect lokālās programmatūras uzturēšana.....	12
ATTĀLINĀTAIS LIETOTĀJS: HEART CONNECT SISTĒMAS IESTATĪŠANA UN IZMANTOŠANA	12
Lietotāja konta izveide.....	13
Heart Connect attālinātās programmatūras instalēšana.....	13
Kontaktpersonu uzaicinājumu pieņemšana.....	14
Tiešsaistes sapulces zvanu saņemšana.....	14
Pievienošanās tiešsaistes sapulcēm.....	14
Dalība tiešsaistes sapulcēs.....	15
Heart Connect attālinātās programmatūras uzturēšana.....	17
PAPILDINFORMĀCIJA	17
Importētājs Eiropas Savienībā.....	17

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!


Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

IEVADS

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par Heart Connect™ sistēmas iestatīšanu un izmantošanu. Lai uzzinātu, kā aktivizēt Heart Connect sistēmu un piekļūt tai, sazinieties ar Boston Scientific pārstāvi vai Boston Scientific, izmantojot uz šīs rokasgrāmatas aiz mugurējā vāka pieejamo informāciju.

Nākamajā attēlā ir redzams Heart Connect sistēmas komponentu pārskats un to savienojumi.

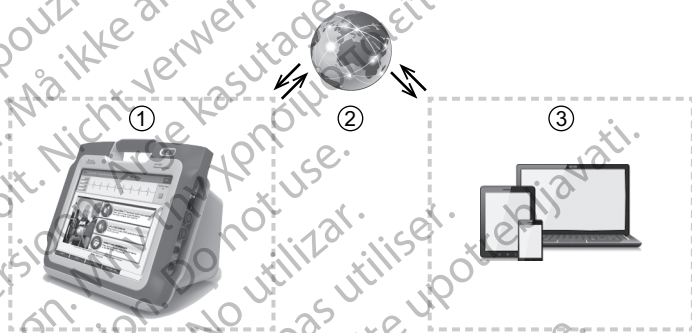

[1] LATITUDE™ programmēšanas sistēma, Modelis 3300, [2] internets, [3] attālināto lietotāju saderīgās viedierīces (nav iekļautas komplektācijā), kurās tiek izmantota Heart Connect attālinātā programmatūra

Attēls 1. Heart Connect sistēmas komponenti

Heart Connect sistēma aptver lokālo lietotāju un vienu vai vairākus attālinātos lietotājus.

- Lokālā lietotāja komponenti ir Modeļa 3300 programmētājs, Heart Connect programmatūra (Modelis 3932) un interneta savienojums
- Attālināto lietotāju komponenti ir saderīga viedierīce (operētājsistēma iOS, Android vai Windows) ar instalētu attālinātā savienojuma programmatūru un interneta savienojums.

PIEZĪME: Boston Scientific izsniedz licenci Heart Connect lietojumprogrammas (turpmāk tekstā – “lietojumprogramma”) instalēšanai BSC programmēšanas sistēmā (turpmāk tekstā – “programmētājs”). Boston Scientific pēc saviem ieskatiem (kā neierobežojošs piemērs) var ņemt licenci no programmētāja, ja lietojumprogramma tiek lietota ierobežoti vai netiek lietota.

PIEZĪME: Šī rokasgrāmata un Modeļa 3300 LATITUDE™ programmēšanas sistēmas lietotāja rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistē vietnē www.bostonscientific-elabeling.com.

Paziņojumi par preču zīmēm

Heart Connect un LATITUDE ir Boston Scientific Corporation preču zīmes.

Tālāk ir sniegti paziņojumi par trešo pušu preču zīmēm, kas minētas šajā rokasgrāmatā.

- Internet Explorer un Windows ir Microsoft Corporation preču zīmes.
- iOS ir preču zīme, kurai Cisco ir izsniedzis licenci uzņēmumam Apple Inc.

- iPhone un iPad ir Apple Inc. preču zīmes.
- Android ir Google Inc. preču zīme.

Paredzētais lietojums

Heart Connect sistēma ir datu koplietošanas sistēma, kas ir pieejama kā papildaprīkojums un paredzēta Modeļa 3300 programmētājā esošo fizioloģisko datu un/vai citu medicīnisko datu parādīšanai un koplietošanai. Heart Connect sistēma veselības aprūpes speciālistiem un Boston Scientific personālam nodrošina līdzekļus, ar kuriem var izveidot tiešsaistes sapulci un koplietot Modeļa 3300 programmētāja displeju ar attālinātā vietā esošām personām. Informāciju par sistēmas klīniskajiem ieguvumiem skatiet lietošanas instrukcijā, kas iekļauta modeļa 3300 programmētāja komplektācijā.

Paredzētā mērķauditorija

Šī publikācija ir paredzēta lietošanai veselības aprūpes speciālistiem un Boston Scientific personālam, kas izmanto Heart Connect sistēmu.

Kontrindikācijas

Heart Connect sistēma ir kontrindicēta lietošanai ar medicīnisko aprīkojumu, kas nav saderīgs ar rokasgrāmatā definētajiem sistēmas parametriem.

Brīdinājumi

Visus brīdinājumus skatiet modeļa 3300 LATITUDE programmēšanas sistēmas lietotāja rokasgrāmatā.

Piesardzības pasākumi

Papildu piesardzības pasākumus skatiet Modeļa 3300 LATITUDE programmēšanas sistēmas lietotāja rokasgrāmatā.

- **Piekluve pacientu datiem.** Heart Connect sistēma pārraida displeja saturu, kas var ietvert pacientu datus, kas ir aizsargāta informācija par veselību. Pacientu datiem drīkst piekļūt tikai pilnvaroti veselības aprūpes speciālisti un Boston Scientific personāls.

Plašāku informāciju par pacientu datu aizsardzību un sistēmas drošību skatiet šeit: "Drošība" lpp. 3.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības skatiet Modeļa 3300 LATITUDE programmēšanas sistēmas lietotāja rokasgrāmatā.

Kā Heart Connect sistēma darbojas

Heart Connect sistēmu izmanto lokālais lietotājs, lai izveidotu tiešsaistes sapulci ar vienu vai vairākiem attālinātajiem lietotājiem. Lokālais lietotājs izmanto Heart Connect lietojumprogrammu, lai ierosinātu sapulci un koplietotu Modeļa 3300 programmētāja displeju. Attālinātie lietotāji izmanto Heart Connect attālināto programmatūru savā viedierīcē (nav iekļauta komplektācijā), lai redzētu lokālo lietotāju un sazinātos ar viņu.

Lokālais lietotājs sniedz informāciju attālinātajiem lietotājiem un/vai koplieto to ar viņiem pēc nepieciešamības.

Lai iespējotu sapulces audio, lokālajam lietotājam ir jāizmanto ārējā USB audio ierīce (mikrofons).

Iespējas

- Ja netiek izmantots sapulces audio, lokālais lietotājs saziņai ar attālināto(ajiem) lietotāju(iem) var izmantot tālruni.
- USB video ierīci (kameru) var izmantot, lai parādītu lokālā lietotāja video attālinātajam (iem) lietotājam(iem).
- USB audio ierīci (skaļruni) var izmantot, lai pastiprinātu attālinātā(-o) lietotāja(-u) audio lokālajam lietotājam.

Drošība

Heart Connect sistēmā ir iestrādāti drošības pasākumi pacientu datu un sistēmas integritātes aizsardzībai. Šie drošības pasākumi atbalsta vispārīgās drošības politikas un prakses. Tiešsaistes sapulces (tostarp jebkādi nūsūtītie attēli) tiek šifrētas, lai nodrošinātu pacientu informācijas un ierīču datu aizsardzību.

Papildinformāciju par pacientu datu drošību skatiet *Pacientu datu pārvaldības lietotāja rokasgrāmātā (Modelis 3931)*.

Papildinformāciju par tīklošanas un savienojamības drošību skatiet *Tīklošanas un savienojamības lietotāja rokasgrāmātā (Modelis 3924)*.

Lietotāju lomas

SVARĪGI!

- Lokālajam lietotājam ir jāzina, kā pareizi izmantot LATITUDE™ programmēšanas sistēmu, jo jebkurā laikā var rasties tīkla sakaru kavējumi vai zudumi. Ja lokālais lietotājs pārāk palaujas uz attālināto lietotāju, zaudēti vai kavēti tīkla sakari var nodarīt kaitējumu pacientam.
- Lokālajam lietotājam ir jāatbilst LATITUDE™ programmēšanas sistēmas lietošanas profesionalitātes līmenim attiecībā uz tās paredzēto mērķi. Informāciju par Modeļa 3300 programmētāja darbību un lietošanu skatiet Modeļa 3300 LATITUDE™ programmēšanas sistēmas lietotāja rokasgrāmātā.
- Sapulces dalībniekiem ir jābūt skaidri definētam paredzētajam par pacientu aprūpes pienākumiem no lokālā lietotāja un attālināto lietotāju puses tiešsaistes sapulces laikā. Var rasties situācijas, kas saistītas ar pacientiem vai pievienoto medicīnisko aprīkojumu, kuru gadījumā lokālajam lietotājam ir laikus jārikojas. Lokālajam lietotājam ir jābūt gatavam reaģēt uz šādām situācijām.

Lokālais lietotājs

- Spēj pareizi izmantot Modeļa 3300 programmētāju un atbilst paredzamajam profesionalitātes līmenim attiecībā uz tā paredzēto mērķi.
- Ierosina tiešsaistes sapulci, kurā tiks koplietots Modeļa 3300 programmētāja displejs.

- Fiziski atrodas pacienta un Modeļa 3300 programmētāja, kas darbina Heart Connect lietojumprogrammu, tuvumā.
- Nosaka audio (tālrunā vai USB pievienotā mikrofona) un video lietojumu, izmantojot papildaprīkojumā pieejamo USB kameru.

Attālinātais(ie) lietotājs(i)

- Ikviens, kurš piedalās tiešsaistes sapulcē un nav lokālais lietotājs. Attālinātie lietotāji parasti atrodas attālināti no lokālā lietotāja.
- Var piedalīties tiešsaistes sapulcē, bet nevar ierosināt tiešsaistes sapulci, izmantojot Heart Connect sistēmu.

Sapulces dalībnieks

- Ikviens, kurš ir iekļauts tiešsaistes sapulcē, tostarp lokālie un attālinātie lietotāji.

Komponenti

Heart Connect sistēmas komponentu vizuālo attēlojumu skatiet šeit: Attēls 1 Heart Connect sistēmās komponenti lpp. 1.

Heart Connect lokālā sistēma

Heart Connect lokālajai sistēmai ir Modeļa 3300 programmētājs ar instalētu Modeļa 3932 Heart Connect lietojumprogrammu.

- Modeļa 3300 programmētājs izveido savienojumu ar internetu, lai izveidotu tiešsaistes sapulces ar attālinātajiem lietotājiem.
- Modeļa 3300 programmētājam ir iebūvēts skaļrunis¹, kas tiešsaistes sapulcēs nodrošina audio no attālinātā lietotāja. Pievienots ārējais USB mikrofons nodrošina audio lokālā lietotāja balsij.

PIEZĪME: Lokālais lietotājs var izmantot video kameru, lai rādītu lokālā lietotāja video attālinātajiem lietotājiem.

- Heart Connect lietojumprogramma nodrošina lokālajam lietotājam iespēju izveidot tiešsaistes sapulces ar attālinātajiem lietotājiem, lai koplietotu Modeļa 3300 programmētāja displeju.

Heart Connect attālinātā programmatūra

Attālinātais lietotājs izmanto Heart Connect attālināto programmatūru, lai piedalītos tiešsaistes sapulcēs. Heart Connect attālinātā programmatūra sastāv no tālāk minētām lietotnēm.

- Modeļa 3935 iOS attālinātā programmatūra
- Modeļa 3936 Android attālinātā programmatūra
- Modeļa 3937 datora attālinātā programmatūra

Heart Connect attālinātā programmatūra:

- Jaunajiem attālinātajiem lietotājiem piedalīties tiešsaistes sapulcēs, kad viņus uzaicina lokālais lietotājs vai citi attālinātie lietotāji;
- Jaunajiem attālinātajiem lietotājiem skatīt koplietoto pievienotā medicīniskā aprīkojuma video displeju;

1. Turklāt lokālais lietotājs var izmantot ārējo USB pievienoto skaļruni

- ir attālināto lietotāju instalēta saderīgās viedierīcēs (nav iekļautas komplektācijā).

Sistēmas ierobežojumi un apsvērumi

- **Modeļa 3300 programmatējs.** Heart Connect lietojumprogramma ir izstrādāta Modeļa 3300 programmatēja displeja izvades koplietošanai ar tiešsaistes sapulces dalībniekiem. Visas Heart Connect sesijas laikā lokālajam lietotājam ir kontrole pār Modeļa 3300 programmatēja funkcijām.
- **Iekšējie un ārējie faktori.** Pastāv daudzi iekšējie un ārējie faktori, kas traucē vai kavē Modeļa 3300 programmatēja displeja koplietošanu ar sapulces dalībniekiem un Heart Connect sistēmas audio/video sakarus vai novērš tos. Šie faktori ir raksturoti tālāk.
 - **Internets.** Interneta infrastruktūras un interneta pakalpojumu nodrošinātāju kvalitātes variācijas var ietekmēt tiešsaistes sapulcē koplietotā audio, video un Modeļa 3300 programmatēja attēlotās informācijas kvalitāti un rādīšanas ātrumu.

Svarīgi! Ja savienojums ir zemas kvalitātes, koplietotā video displeja informācija, ko redz attālinātie lietotāji, var nebūt sinhrona ar medicīniskā aprīkojuma displeju. Turklāt, ja tiek zaudēti video/audio sakari starp lokālo lietotāju un attālināto lietotāju, var būt aptuveni 30 sekunžu aizkave, pirms tiek konstatēts savienojuma zudums. Ja savienojums ir zemas kvalitātes, sazinieties ar vietējo IT nodaļu vai Boston Scientific.
 - **Lokālais tīkls.** Lokālā tīkla piekļuves punktu un saistītās tīkla infrastruktūras (piemēram, aktīva interneta signāla stiprums) atrašanās vietas un kvalitātes variācijas un ugunsdūmu lietojums var ietekmēt tiešsaistes sapulcē koplietotā audio, video un Modeļa 3300 programmatēja attēlotās informācijas kvalitāti un rādīšanas ātrumu.
 - **Mobilo sakaru savienojums.** Heart Connect sapulcēm tiek izmantota mobilo sakaru savienojamība, ja jums ir 3G vai augstāks mobilo sakaru savienojums.
 - **Piekļuve elektrības kontaktligzdai.** Lai nodrošinātu, ka Modeļa 3300 programmatējs var darboties, kā paredzēts, ieteicams nodrošināt piekļuvi elektriskajai kontaktligzdai, tādējādi novēršot baterijas izlādēšanos.
 - **Aprīkojums.** Tiešsaistes sapulcē koplietotā audio, video un Modeļa 3300 programmatēja attēlotā informācija var tikt aizkavēta vai netikt parādīta tālāk norādīto iemeslu dēļ.

Modeļa 3300 programmatējs nevar izveidot uzticamu savienojumu ar interneta infrastruktūru.

 - Attālināto lietotāju viedierīces var nedarboties atbilstoši, lai nodrošinātu tiešsaistes sapulces sakarus.
 - Lai nodrošinātu lokālā lietotāja audio, izmantojot Modeļa 3300 programmatēju, ārējais mikrofons ir jāpievieno pieejamajam programmatēja USB portam.
- **Tīkla un datu drošība.** Heart Connect sistēma izmanto nozares apstiprinātos protokolus lietotāju autentifikācijai un pārraidīto datu šifrēšanai. Par labu praksi tiek uzskatīta pievienošanās tikai pārvaldītiem, drošiem tīkliem. Papildinformāciju par tīklošanas un savienojamības drošību skatiet *Tīklošanas un savienojamības lietotāja rokasgrāmatā (Modelis 3924)*.

LOKĀLAIS LIETOTĀJS: HEART CONNECT SISTĒMAS IESTATĪŠANA UN IZMANTOŠANA

Tālāk ir sniegti norādījumi lokālajam lietotājam, kā pievienot Heart Connect sistēmas komponentus un konfigurēt sistēmu tīklam ar interneta piekļuvi. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Boston Scientific, izmantojot uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka pieejamo informāciju, vai sazinieties ar vietējo Boston Scientific pārstāvi.

Savienojuma ar internetu konfigurēšana

Heart Connect sistēma izmanto Modeļa 3300 programmētāju, lai izveidotu savienojumu ar internetu. Sadarbojieties ar sistēmas administratoru, lai nodrošinātu, ka Heart Connect sistēma tiek apstiprināta lietošanai jūsu tīkla vidē.

PIEZĪME: *Norādījumus par to, kā konfigurēt interneta savienojumu, skatiet Modeļa 3924 tīklošanas un savienojamības lietotāja rokasgrāmatā.*

Ja Modeļa 3300 programmētāja izvēlnē Utilities (Utilitās) ir atlasīta Heart Connect lietojumprogramma un ir sekmīgi izveidots savienojums ar iepriekš konfigurētu tīklu, kā arī ir piekļuve internetam, izmantojot Heart Connect lietojumprogrammas pogu Meet Now (Satikties tūlīt), tiek atvērts logs Manage Meeting (Sapulces pārvaldība).

Ja Modeļa 3300 programmētājam nav aktīva savienojuma ar internetu, izmantojot pogu Meet Now (Satikties tūlīt), tiek parādīts savienojuma kļūdas uzniirstošais lodziņš ar tekstu "Please check your network" (Lūdzu, pārbaudiet tīklu).

Tālāk ir sniegti pamata norādījumi par to, kā Heart Connect lietojumprogrammu izmantot tiešsaistes sapulces ierosināšanai.

Heart Connect sistēmas kontaktpersonas

Boston Scientific kontaktpersonas

Heart Connect sistēmu var izmantot, lai izveidotu savienojumu ar Boston Scientific un saņemtu tehnisko atbalstu. Šīs kontaktpersonas Boston Scientific var konfigurēt konkrētām Modeļa 3300 programmētājam.

Tālāk ir norādīti divi Boston Scientific kontaktpersonu veidi.

- **Individuālās kontaktpersonas.** Šajā sarakstā var tikt iekļautas konkrētas personas, piemēram, vietējie Boston Scientific pārstāvji. Izveidojot savienojumu ar atsevišķu kontaktpersonu, tiek zvanīts tieši šai personai.
- **Grupas kontaktpersonas.** Izveidojot savienojumu ar kontaktpersonu grupu, tiek zvanīts personām, kuras ir norādītas atlasītajai kontaktpersonu grupai, un uz zvanu atbild viens no grupas dalībniekiem.

Lai pieprasītu Heart Connect sistēmas Boston Scientific grupas kontaktpersonu izmaiņas, sazinieties ar Boston Scientific, izmantojot uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka pieejamo informāciju, vai sazinieties ar vietējo Boston Scientific pārstāvi.

Citas kontaktpersonas

Heart Connect sistēmu var izmantot, lai izveidotu savienojumu ar personām, kas nav Boston Scientific personāls.

Kontaktpersonu pievienošana

Boston Scientific personas un citas kontaktpersonas tiek izveidotas un pārvaldītas Heart Connect lietojumprogrammā lokālā lietotāja Modeļa 3300 programmētājā, un Boston Scientific nevar tās pārvaldīt attālināti.

Lai pievienotu kontaktpersonas, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Modeļa 3300 programmētāja izvēlnē **Utilities** (Utilītas) nospiediet cilni **Heart Connect**, lai atvērtu galveno **Heart Connect** logu.
2. Nospiediet pogu **Meet Now** (Satikties tūlīt), lai atvērtu logu **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība).
3. Nospiediet pogu **Edit** (Rediģēt), lai atvērtu logu **Edit Contacts** (Kontaktpersonu rediģēšana).
4. Nospiediet pogu līdzās tekstem **Add Contact Email Address** (Pievienot kontaktpersonas e-pasta adresi), lai atvērtu logu **Add Contact** (Kontaktpersonas pievienošana).
5. Nospiediet pogu apgabalu līdzās tekstem **Email (E-pasts)**, lai atvērtu tastatūras logu.
6. Ievadiet kontaktpersonas e-pasta adresi, pēc tam nospiediet pogu **Accept Changes** (Pieņemt izmaiņas), lai atvērtu logu **Add Contact** (Kontaktpersonas pievienošana).
7. Nospiediet pogu **Add** (Pievienot), lai uz konkrēto e-pasta adresi nosūtītu kontaktpersonas uzaicinājumu.
8. Katrai kontaktpersonai, ko vēlaties pievienot, atkārtojiet no 4. līdz 7. darbībai.
9. Logā **Edit Contacts** (Kontaktpersonu rediģēšana) nospiediet pogu **Close** (Aizvērt).
10. Logā **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība) nospiediet pogu **Close** (Aizvērt).

PIEZĪME: Katra kontaktpersona saņem e-pasta uzaicinājumu, un, lai kontaktpersonu varētu iekļaut kontaktpersonu sarakstā, tai ir jāapstiprina šis pieprasījums. Informāciju par kontaktpersonu uzaicinājumu pieņemšanu skatiet šeit: "Kontaktpersonu uzaicinājumu pieņemšana" lpp. 14.

Lai noņemtu kontaktpersonas, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Modeļa 3300 programmētāja izvēlnē **Utilities** (Utilītas) nospiediet cilni **Heart Connect**, lai atvērtu galveno **Heart Connect** logu.
2. Nospiediet pogu **Meet Now** (Satikties tūlīt), lai atvērtu logu **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība).
3. Nospiediet pogu **Edit** (Rediģēt), lai atvērtu logu **Edit Contacts** (Kontaktpersonu rediģēšana).
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu līdzās personai, kuru vēlaties noņemt, un pēc tam nospiediet pogu **Remove selected contacts** (Noņemt atlasītās kontaktpersonas).
5. Kad tiek atvērts apstiprinājuma logs **Remove Contacts** (Kontaktpersonu noņemšana), nospiediet pogu **Remove** (Noņemt), lai noņemtu kontaktpersonu(as).
6. Logā **Edit Contacts** (Kontaktpersonu rediģēšana) nospiediet pogu **Close** (Aizvērt).
7. Logā **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība) nospiediet pogu **Close** (Aizvērt).

Tiešsaistes sapulces sākšana

PIEZĪME: Noteikti pieslēdziet Modeļa 3300 programmētāju elektriskajai kontaktligzdai vai pārliecinieties, ka tā baterijas uzlādes līmenis ir pietiekams (50% vai vairāk) tiešsaistes sapulcēm.

Pirms Heart Connect tiešsaistes sapulces sākšanas nolasiet pacienta ierīces datus un sāciet sesiju ar pacientu. Ja tiek beigta pacienta sesija, beidzas arī Heart Connect tiešsaistes sapulce. Kardiostimulācijas iekārtas analizatora (KIA) lietojumprogrammu var palaist arī pēc Heart Connect sapulces sākuma.

PIEZĪME: Ja notiek Heart Connect sapulce un lokālais lietotājs sāk vai beidz pacienta sesiju, tiešsaistes sapulce beidzas, un lokālajam lietotājam ir jāsāk jauna Heart Connect sapulce.

PIEZĪME: Noteikti beidziet Heart Connect sapulci pirms tādu funkciju izmantošanas², kas liedz piekļuvi programmētāja ekrāna augšējai joslai. Kad šīs funkcijas ir aktīvas, Heart Connect sapulce turpinās, bet to nevar pabeigt.

PIEZĪME: Lai lokālajam lietotājam iespējotu sapulces audio, programmētājam ir jāpievieno ārējā USB audio ierīce (mikrofons).

Tiešsaistes sapulces var sākt, izmantojot vienu no divām metodēm — ar kontaktpersonām vai bez tām.

Ar kontaktpersonām

Lai sāktu tiešsaistes sapulci ar kontaktpersonām, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Heart Connect galvenajā ekrānā nospiediet pogu **Meet Now** (Satikties tūlīt).
2. Atlasiet paredzētās kontaktpersonas.³ Kontaktpersonas var atlasīt abos sarakstos.
3. Nospiediet vēlamo audio pogu — **Use Programmer audio** (Izmantot programmētāja audio). Starptautiskajiem lietotājiem ir pieejams tikai programmētāja audio. Tomēr sazināi ārpus Heart Connect sapulces var izmantot personiskos tālrunus.
4. Lai sāktu sapulci, nospiediet pogu **Call** (Zvanīt).
5. Izlasiet uznrīstošajā logā redzamos pakalpojumu sniegšanas noteikumus un, lai turpinātu, nospiediet **I Agree** (Es piekritu).

Ekrānā ir redzams, ka tiek zvanīts kontaktpersonām. Kontaktpersonas, kas apstiprina sapulces uzaicinājumu, tiek rādītas loga **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība) sadaļā **Current Meeting** (Pašreizējā sapulce), kā arī Heart Connect galvenajā ekrānā. Kontaktpersonas, kas noraida sapulces uzaicinājumu, tiek rādītas sadaļā **Current Meeting** (Pašreizējā sapulce) kā **Call Declined** (Zvans noraidīts). Ja atbilde no uzaicinātās kontaktpersonas netiek saņemta aptuveni minūtes laikā, konkrētajai kontaktpersonai nosūtītais uzaicinājums tiek atcelts. Ja neviena kontaktpersona neapstiprina sapulci, Heart Connect lietojumprogramma automātiski beidz sapulci.

PIEZĪME: Uzaicinot tehniskā apkalpes dienesta kontaktpersonu grupu, atbildes saņemšanai varētu būt nepieciešams vairāk laika, ja kāda no grupas personām nav pieejama.

2. Tādas funkcijas kā elektroķirurģija, MRI režīms un KIA STAT Shock
3. Heart Connect attālinātajai programmatūrai ir jābūt aktīvai personas attālinātajā ierīcē, lai tajā varētu atlasīt šo programmatūru.

PIEZĪME: Vairāki attālinātie lietotāji tiešsaistes sapulcē var palēnināt sapulces tempu. Heart Connect ekrānā var tikt parādīti no viena līdz četriem (maksimālais skaits) dalībniekiem.

PIEZĪME: Heart Connect ekrāna galerijas video izkārtojumā var tikt parādīti no viena līdz četriem (maksimālais skaits) dalībniekiem.


Bez kontaktpersonām

Tiešsaistes sapulci var ierosināt, neatlasot kontaktpersonas, Heart Connect sākumekrānā nospiežot pogu **Meet Now** (Satikties tūlīt). Dalībniekus var pievienot sapulcei, Heart Connect galvenajā ekrānā nospiežot pogu **Manage Meeting** (Pārvaldīt sapulci), atlasot dalībniekus un pēc tam nospiežot pogu **Add a Participant** (Pievienot dalībnieku). Sapulcē var pievienoties arī attālinātie lietotāji, ievadot lokālā lietotāja izsniegto sapulces ID. Sapulces ID ir redzams ekrāna Manage Meeting (Sapulces pārvaldība) apakšējā labajā stūrī. Papildinformāciju skatiet šeit: "Tiešsaistes sapulces vadīšana" lpp. 9.

Tiešsaistes sapulces vadīšana

Piekluve izvēlnes elementiem

Lai piekļūtu izvēlnes elementiem, kad ekrāns tiek koplietots, nospiediet pogu **Utilities** (Utilitāts) un pēc tam nospiediet cilni **Heart Connect**. Skatiet šeit: Attēls 2 Modeļa 3300 programmetājs – Heart Connect logs lpp. 9.

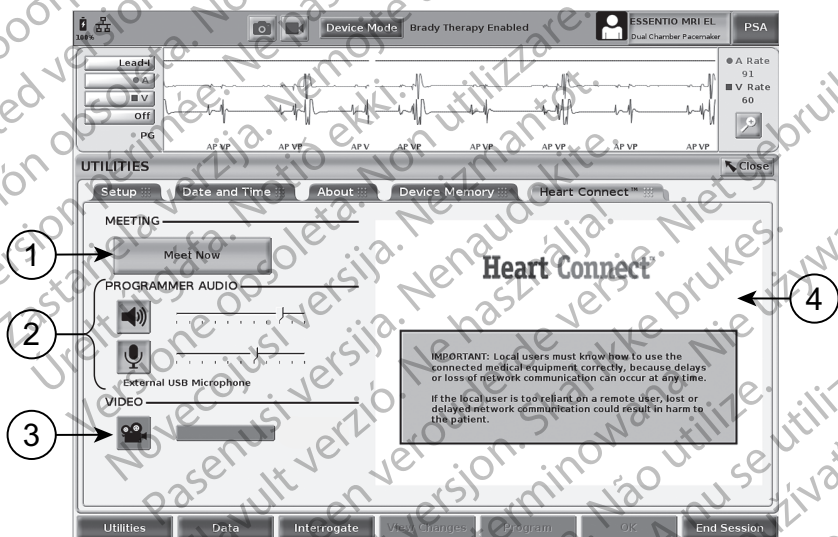

[1] Tiek rādīta poga Meet Now (Satikties tūlīt), lai sāktu sapulci, un poga Manage Meeting (Pārvaldīt sapulci), kad norisinās sapulce [2] Lokālā lietotāja audio vadītājs: skaļums un USB ārējais mikrofons [3] Lokālā lietotāja video izkārtojuma vadītājs (galerija vai aktīvais skaļrunis) [4] Video logs, kurā sākotnēji ir redzams Heart Connect logotips un svarīga informācija lietotājam

Attēls 2. Modeļa 3300 programmetājs – Heart Connect logs

Attālināto lietotāju pievienošana tiešsaistes sapulcei

Attālinātos lietotājus var pievienot noteikto tiešsaistes sapulcei šādos divos veidos:


- pievienojot dalībnieku vai
- nododot sapulces ID attālinātajam lietotājam.

Dalībnieka pievienošana

1. Heart Connect ekrānā nospiediet pogu **Manage Meeting** (Pārvaldīt sapulci), lai atvērtu ekrānu **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība).
2. Sarakstā atlasiet paredzēto(ās) kontaktpersonu(as). Kontaktpersonas var atlasīt abos sarakstos.
3. Nospiediet pogu **Add a participant** (Pievienot dalībnieku), lai sāktu zvanu atlasītajam (iem) attālinātajam(iem) lietotājam(iem).
4. Atlasītā(s) kontaktpersona(s) saņems zvanu no instalētās Heart Connect attālinātās programmatūras, ja būs pieteikties(šās) Heart Connect sistēmā. Skatiet šeit: "Tiešsaistes sapulces zvanu saņemšana" lpp. 14.

Sapulces ID nodošana attālinātajam lietotājam

1. Heart Connect ekrānā nospiediet pogu **Manage Meeting** (Pārvaldīt sapulci), lai atvērtu ekrānu **Manage Meeting** (Sapulces pārvaldība).
2. Sapulces ID ir redzams ekrāna Manage Meeting (Sapulces pārvaldība) apakšējā labajā stūrī.
3. Nododiet sapulces ID attālinātajam(iem) lietotājam(iem).

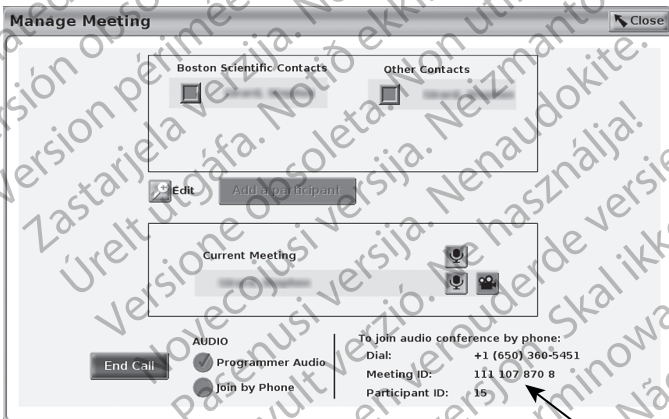

[1] Sapulces ID, dalībnieka ID un tālrūna numurs (tālrūna numurs ir redzams tikai zvaniem ASV)

Attēls 3. Sapulces ID

Tikko sapulce ir sākta, ekrāna augšdaļā tiek rādītas divas ikonas. Skatiet šeit: Attēls 4
Notiekoša Heart Connect sapulce lpp. 11.

- Divvirzienu bultiņa mirgo, lai norādītu, ka koplietojat ekrānu.
- Tiek parādīta pildspalvas ikona, un pēc tās nospiešanas anotācijas bultiņu var novietot jebkurā Modeļa 3300 programmētāja ekrāna vietā.



[1] Notiekoša sapulce – mirgo divas bultiņas, lai norādītu, ka ekrāns tiek koplietojts [2] Zīmula anotēšanas rīks

Attēls 4. Notiekoša Heart Connect sapulce

Piekluve audio sakariem

Lokālais lietotājs var pielāgot skaļumu un izslēgt skanu Heart Connect lietojumprogrammas galvenajā izvēlnē, izmantojot skaļruņa un mikrofona pogas **Audio**.

Attālinātais lietotājs (ja vēl nav izveidojis savienojumu) var izvēlēties izmantot datora audio. Audio vadiklas atrodas attālinātā lietotāja datora ierīces ekrānā. Datorā pārvietojiet peles kursoru, lai skatītu uzniirsto audio/video izvēlni joslu. Turklāt saziņai ārpus Heart Connect sapulces var izmantot personiskos tālrunus.

Video sakaru iespējošana

Modeļa 3300 programmētājam nav iebūvētas video kameras; tomēr, ja nepieciešams, var izmantot ārējo USB video kameru. Ja tiek izmantoti video sakari, tos var izslēgt vai ieslēgt Heart Connect galvenajā ekrānā atlasot pogu **Video**.

Heart Connect galvenajā ekrānā ir redzams katra sapulces attālinātā lietotāja video. Lokālais lietotājs var izvēlēties aktīvā skaļruņa video vai galerijas video, kas parāda to attālināto lietotāju sīktēlu video, kuriem ir aktīvs video.

SVARĪGI! Ja savienojums ir zemas kvalitātes, koplietotā video displeja informācija, ko redz attālinātie lietotāji, var nebūt sinhrona ar medicīniskā priekojuma displeju. Turklāt, ja tiek zaudēti video/audio sakari starp lokālo lietotāju un attālināto lietotāju, var būt aptuveni 30 sekunžu aizkave, pirms tiek konstatēts savienojuma zudums. Ja savienojums ir zemas kvalitātes, sazinieties ar vietējo IT nodaļu vai Boston Scientific.

Dalībnieku pārvaldība

Lokālais lietotājs var veikt tālāk norādītās darbības saistībā ar attālinātajiem lietotājiem tiešsaistes sapulcē. Tām var piekļūt, Heart Connect galvenajā ekrānā izmantojot pogu **Manage Meeting** (Pārvaldīt sapulci).

- Pievienot attālinātos lietotājus sapulcei.
- Ieslēgt un izslēgt audio attālinātajiem lietotājiem.
- Ieslēgt vai izslēgt video attālinātajiem lietotājiem.

Sapulces beigšana

Ir pieejami trīs tālāk norādītie veidi, kā beigt sapulci.

1. Nospiediet **Meeting in progress** (Notiekoša sapulce) (mirgojošas bultiņas) un nospiediet **Confirm** (Apstiprināt), lai beigtu sapulci.
2. Heart Connect galvenajā ekrānā nospiediet pogu **Manage Meeting** (Pārvaldīt sapulci), nospiediet pogu **End Call** (Beigt zvānu) un pēc tam nospiediet **Confirm** (Apstiprināt), lai beigtu sapulci.
3. Ja koplietojat savu ekrānu pacienta sesijas laikā, nospiediet pogu **End Session** (Beigt sesiju) un pēc tam uzrīstojamajā logā End Session Confirmation (Sesijas beigšanas apstiprinājums) nospiediet **End Session** (Beigt sesiju).

PIEZĪME: Ja pēdējais attālinātais lietotājs atstāj sapulci, sapulce beigsies arī lokālajam lietotājam.

Heart Connect lokālās programmatūras uzturēšana

Heart Connect lokālās programmatūras atjauninājumi

Programmatūras atjauninājumi Heart Connect lietojumprogrammā tiek nodrošināti tiešsaistē, izmantojot internetu. Norādījumus par programmatūras atjauninājumiem skatiet *LATITUDE™ programmēšanas sistēmas operatora rokasgrāmātā*⁴ vai sazinieties ar uzņēmumu Boston Scientific, izmantojot uz šīs rokasgrāmātas aizmugurējā vāka esošo informāciju.

ATTĀLINĀTAIS LIETOTĀJS: HEART CONNECT SISTĒMAS IESTATĪŠANA UN IZMANTOŠANA

Attālinātie lietotāji izveido savienojumu ar Heart Connect sistēmas sapulcēm, izmantojot Heart Connect attālināto programmatūru un savu viedierīci, kuras operētājsistēma ir iOS, Android vai Windows. Izmantojot Heart Connect attālināto programmatūru, lietotāji var saņemt uzaicinājumus no lokālā lietotāja pievienoties sapulcei vai pievienoties sapulcei, izmantojot sapulces ID.

4. Vietējais uzņēmuma Boston Scientific pārstāvis var nodrošināt programmatūras atjauninājumus Heart Connect lietotnei, izmantojot USB disku.

Sapulces uzaicinājumā ir iekļauti norādījumi par to, kā lejupielādēt un instalēt Heart Connect attālināto programmatūru. Šī lejupielāde un instalācija ir jāveic tikai vienreiz.

Lietotāja konta izveide

Lietotāja konts ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar Heart Connect sistēmu un varētu saņemt sapulces zvanus un pievienoties notiekošām sapulcēm.

Lai izveidotu lietotāja kontu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Atveriet vietni <http://heartconnect.bostonscientific.com>.
2. Izvēlieties opciju, lai reģistrētos jaunam kontam, ievadot nepieciešamo informāciju. Apstiprinājuma ziņojums tiek nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.
3. Apstipriniet konta aktivizāciju, izmantojot e-pasta ziņojumā pieejamo saiti.
4. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, ievadiet nepieciešamo konta informāciju.

PIEZĪME: Šī nepieciešamā informācija norāda veidu, kā sazināties ar Heart Connect sistēmas lietotājiem, ja nepieciešams.

5. Instalējiet saistīto lietojumprogrammu, skatot šeit sniegto informāciju: "Heart Connect attālinātās programmatūras instalēšana" lpp. 13.

Heart Connect attālinātās programmatūras instalēšana

Sistēmas prasības

Heart Connect attālinātā programmatūra ir izstrādāta tālāk norādītajām operētājsistēmām.

- Operētājsistēma Windows™ (dators)
- Mobilo ierīču operētājsistēma iOS™ (iPhone™/iPad™ mobilās digitālās ierīces)
- Mobilo ierīču operētājsistēma Android™ (mobilā digitālā ierīce)

Programmatūras instalēšana

Lai instalētu Heart Connect attālināto programmatūru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Atveriet vietni <http://heartconnect.bostonscientific.com/download>.
2. Atlasiet attiecīgās operētājsistēmas platformas lejupielādes opciju.

PIEZĪME: Mobilo ierīču platformu lietojumprogrammas ir pieejamas attiecīgajos mobilo lietojumprogrammu veikalos. iOS lietotājiem lietojumprogrammas nosaukums ir Heart Connect Remote Software (Heart Connect attālinātā programmatūra). Android lietotājiem lietojumprogrammas nosaukums ir Heart Connect.

3. Sāciet instalēšanu, lejupielādējot instalācijas failu un palaizot to (datora lietojumprogrammām) vai atlasot instalēšanai no lietojumprogrammu veikala (mobilajām lietojumprogrammām).
4. Kad instalēšanas process ir pabeigts, palaidiet lietojumprogrammu un piesakieties, izmantojot lietotāja kontu, kas izveidots, kā aprakstīts šeit: "Lietotāja konta izveide" lpp. 13.

SVARĪGI! Lai saņemtu tiešsaistes sapulces zvanus no lokālā lietotāja, nodrošiniet, ka lietojumprogramma darbojas un jūs esat pieteicies.

Kontaktpersonu uzaicinājumu pieņemšana

Lokālais lietotājs, izmantojot Heart Connect sistēmu, var pievienot attālinātos lietotājus kontaktpersonu sarakstam, lai tiešsaistes sapulcēs izveidotu savienojumu ar attālinātajiem lietotājiem. Kad attālinātais lietotājs ir uzaicināts, attālinātajam lietotājam pa e-pastu tiek nosūtīts pieprasījums pieņemt uzaicinājumu.

Lai pieņemtu kontaktpersonas uzaicinājumu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Atlasiet e-pasta ziņojumā iekļauto saiti. Tiek atvērta Heart Connect sistēmas tīmekļa lapa.
2. Piesakieties, izmantojot lietotāja kontu, kas izveidots atbilstoši tam, kā norādīts šeit: "Lietotāja konta izveide" lpp. 13. Tiek parādīta norāde, ka uzaicinājums ir pieņemts.

PIEZĪME: Ja lietotāja konts vēl nav izveidots, atlasiet opciju reģistrēties jaunam kontam un izpildiet konta izveides norādījumus, kas sniegti šeit: "Lietotāja konta izveide" lpp. 13. Izpildiet saistītās lietojumprogrammas instalēšanas norādījumus, kas sniegti šeit: "Heart Connect attālinātās programmatūras instalēšana" lpp. 13. **Pēc lietotāja konta izveides vēlreiz atveriet kontaktpersonas uzaicinājuma e-pasta ziņojumu un izpildiet iepriekš minēto 1. un 2. darbību.**

Tiešsaistes sapulces zvanu saņemšana

SVARĪGI!

- Lokālajam lietotājam ir jāzina, kā pareizi izmantot pievienoto medicīnisko aprīkojumu, jo jebkurā laikā var rasties tiklā sakaru kavējumi vai zudumi. Ja lokālais lietotājs pārāk paļaujas uz attālināto lietotāju, zaudēti vai kavēti tiklā sakari var nodarīt kaitējumu pacientam.
- Lokālajam lietotājam ir jāatbilst pievienotā medicīniskā aprīkojuma lietošanas profesionalitātes līmenim attiecībā uz tā paredzēto mērķi.
- Sapulces dalībniekiem ir jābūt skaidri definētam paredzētajam par pacientu aprūpes pienākumiem no lokālā lietotāja un attālināto lietotāju puses tiešsaistes sapulces laikā. Var rasties situācijas, kas saistītas ar pacientiem vai pievienoto medicīnisko aprīkojumu, kuru gadījumā lokālajam lietotājam ir laikus jārikojas. Lokālajam lietotājam ir jābūt gatavam reaģēt uz šādām situācijām.
- Lai saņemtu tiešsaistes sapulces zvanus no lokālā lietotāja, nodrošiniet, ka lietojumprogramma darbojas un jūs esat pieteicies.

Kad kāds lokālais lietotājs ierosina tiešsaistes sapulci ar kontaktpersonu, iestādes nosaukums (ja konfigurēts ekrānā About (Par)) un atrašanās vieta (pēc izvēles) attālinātajam lietotājam tiek rādīta ar uzaicinājuma pieņemšanas vai noraidīšanas opciju pogām. Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet uz opcijas **Accept** (Pieņemt) vai nospiediet šo pogu.

Pievienšanās tiešsaistes sapulcēm

Notiekošām sapulcēm var pievienoties, izmantojot lokālā lietotāja izsniegto sapulces ID. Noklikšķiniet uz opcijas vai pieskarieties tai, lai pievienotos sapulcei Heart Connect attālinātajā programmatūrā, un ievadiet sapulces ID. Noklikšķiniet uz pogas Join Meeting (Pievienoties sapulcei) vai pieskarieties tai, lai pievienotos sapulcei.

Dalība tiešsaistes sapulcēs

Lokālā lietotāja koplietotā ekrāna skatīšana

Attālinātie lietotāji var skatīt Modeļa 3300 programmētāja ekrānu pēc Heart Connect zvana pieņemšanas.

SVARĪGI! Ja savienojums ir zemas kvalitātes, koplietotā video displeja informācija, ko redz attālinātie lietotāji, var nebūt sinhrona ar medicīniskā aprikojuma displeju. Turklāt, ja tiek zaudēti video/audio sakari starp lokālo lietotāju un attālināto lietotāju, var būt aptuveni 30 sekunžu aizkave, pirms tiek konstatēts savienojuma zudums. Ja savienojums ir zemas kvalitātes, sazinieties ar vietējo IT nodaļu vai Boston Scientific.

Piekluve izvēlnes elementiem lokālā lietotāja koplietotā ekrāna skatīšanas laikā

Vairākums izvēlnes elementu ir pieejami attālinātajam lietotājam, novietojot peles kursoru uz ekrāna vai pieskaroties tam. Izvēlnes elementiem, piemēram, **Annotate** (Pievienot anotāciju), var piekļūt datora lietojumprogrammā, novietojiet peles kursoru uz ekrāna augšdaļā esošās izvēlnes **More** (Vairāk) vai **View Options** (Skatīt opcijas) vai atlasot to.

PIEZĪME: Izvēlne **More** (Vairāk) ir pieejama tikai pilnkrāna režīma laikā.

PIEZĪME: Mobilajā lietotnē funkcijai **Annotate** (Pievienot anotāciju) var piekļūt, pieskaroties zīmuļa ikonai.

Citu attālināto lietotāju pievienošana tiešsaistes sapulcei

Attālinātie lietotāji var uzaicināt citus attālinātos lietotājus pievienoties notiekošai tiešsaistes sapulcei, izmantojot vienu no divām metodēm – ar uzaicinājumu vai sapulces ID.

Lai pievienotu citus attālinātos lietotājus ar uzaicinājumu (datora lietojumprogrammā), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumam **Invite** (Uzaicināt) vai noklikšķiniet uz tā.
2. Pieskarieties vai noklikšķiniet, lai pa e-pastu nosūtītu uzaicinājumu.
3. Ievadiet vēlamās e-pasta adreses un nosūtiet e-pasta ziņojumu.
4. Adresāts saņem e-pasta ziņojumu, kas ietver sapulces ID un pieejamās savienojuma metodes (URL un tālrunis), lai adresāts varētu pievienoties sapulcei.

Lai pievienotu citus attālinātos lietotājus ar uzaicinājumu (mobilajā lietojumprogrammā), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties izvēlnes vienumam **Participants** (Dalībnieki) vai noklikšķiniet uz tā.
2. Pieskarieties izvēlnes vienumam **Invite** (Uzaicināt) vai noklikšķiniet uz tā.
3. Parādītajā sarakstā pieskarieties vēlamā pakalpojuma lietojumprogrammai (piemēram, e-pasta, īsziņu lietojumprogrammai) vai noklikšķiniet uz tās.
4. Ievadiet adresāta informāciju un nosūtiet uzaicinājumu, izmantojot izvēlēto pakalpojumu.
5. Adresātiem tiek nosūtīta saite ar sapulces ID, lai viņi varētu pievienoties sapulcei.

Lai pievienotu citus attālinātos lietotājus, izmantojot sapulces ID (datora lietojumprogrammā), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties uzaicinājuma izvēlnes elementam vai noklikšķiniet uz tā, lai atvērtu ekrānu Invite (Uzaicinājums). Sapulces ID ir redzams ekrāna augšdaļā.

2. Norādiet sapulces ID adresātiem, lai viņi varētu pievienoties sapulcei kā attālinātie lietotāji. Skatiet šeit: "Pievienošanās tiešsaistes sapulcēm" lpp. 14.

Lai pievienotu citus attālinātos lietotājus, izmantojot sapulces ID (mobilajā lietojumprogrammā), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Noklikšķiniet jebkurā ekrāna vietā vai pieskarieties tai, lai skatītu izvēlnes opcijas. Sapulces ID ir redzams ekrānā augšdaļā.
2. Norādiet sapulces ID adresātiem, lai viņi varētu pievienoties sapulcei kā attālinātie lietotāji. Skatiet šeit: "Pievienošanās tiešsaistes sapulcēm" lpp. 14.

Audio sakari

Ir pieejami divi veidi, kā pievienoties tiešsaistes sapulces audio sakariem – izmantojot datora audio un tālruņa audio.

Datora audio citiem sapulces dalībniekiem ir dzirdams, izmantojot interneta savienojumu. Lai sapulces laikā izmantotu datora audio, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai sapulcei iespējotu audio, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Attālinātiem lietotājiem, kuri lieto datorus—

- Atlasiet **Join Audio** (Pievienot audio), pēc tam atlasiet **Computer Audio** (Datora audio), pēc tam atlasiet **Join Audio Conference by Computer** (Pievienoties audio konferencei ar datoru).

Attālinātiem lietotājiem, kuri lieto mobilās ierīces —

- Ekrānā pieskarieties un atlasiet **Audio/Join Audio** (Audio/Pievienot audio), pēc tam atlasiet **Call Using Internet Audio/Call via Device Audio** (Sazināties, izmantojot interneta audio/Sazināties, izmantojot ierīces audio)
2. Tikko ir iespējots datora audio, tā skaņu var izslēgt, izmantojot ekrāna izvēlnes elementus, un skaļumu var pielāgot ar datorā vai mobilajā ierīcē pieejamajām vadīklām.
 3. Lai sapulcei atspējotu audio, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Attālinātiem lietotājiem, kuri lieto datorus—

- Pieskarieties **Leave Computer Audio** (Atslēgt datora audio) vai noklikšķiniet uz tā, izmantojot izvēlni **Audio** (Audio).

Attālinātiem lietotājiem, kuri lieto mobilās ierīces —

- Pieskarieties **Disconnect Audio** (Atvienot audio) vai noklikšķiniet uz tā, izmantojot izvēlni **More** (Vairāk).

Tālruņa audio var izmantot, sapulcei pievienojoties ar tālruni. Lai sapulces laikā izmantotu tālruņa audio, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Audio izvēlnē pieskarieties pie **Phone Call** (Tālruņa zvans) vai noklikšķiniet uz tā. (Mobilās lietojumprogrammās audio izvēlnē pieskarieties pie **Dial in** (Izvanāties) vai noklikšķiniet uz tā.)
2. Zvaniet uz vienu no sarakstā pieejamajiem tālruņa numuriem un izpildiet norādījumus tālruni, lai ievadītu sapulces ID un dalībnieka ID. (Mobilajās lietojumprogrammās Heart Connect automātiski veic zvanu un ietver sapulces ID un dalībnieka ID.)

PIEZĪME: Sapulces tālruņa numuri ir pieejami ne visās valstīs.

Video sakari

Kad attālinātie lietotāji pievienojas tiešsaistes sapulcei, video sākotnēji ir atspējots. Video var ieslēgt vai izslēgt, ekrānā atlasot video izvēlnes elementus.

Piekluve audio un video iestatījumiem

Datoru lietotājiem papildu audio un video iestatījumi ir pieejami, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī pa labi no video ikonās pieskaroties karātu ikonai (*) vai noklikšķinot uz tās. Ar šo darbību tiek atvērts izvēlnes elements **Video Settings** (Video iestatījumi).

Mobilo ierīču lietotājiem papildu audio un video iestatījumi ir pieejami, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī pieskaroties pie **Video Settings** (Video iestatījumi).

Attālināto lietotāju anotāciju pievienošanas iespējas

Attālinātais lietotājs var pievienot anotāciju ar bultiņu, pieskaroties izvēlnes **View Options** (Skatīt opcijas) atlasē elementam **Annotate** (Pievienot anotāciju) vai noklikšķinot uz tās.

Izmantojot datora lietojumprogrammu, papildu izvēlnes elementi ir pieejami, pieskaroties ekrāna augšdaļā esošajai izvēlnei **View Options** (Skatīt opcijas) vai noklikšķinot uz tās.

PIEZĪME: Mobilajā lietotnē funkcijai **Annotate** (Pievienot anotāciju) var piekļūt, pieskaroties zīmuļa ikonai.

Atslēgšanās no sapulces

Attālinātais lietotājs var atslēgties no tiešsaistes sapulces, pieskaroties ekrāna apakšējā labajā stūrī esošajam tekstam **Leave Meeting** (Atslēgties no sapulces) vai noklikšķinot uz tā.

PIEZĪME: Ja pēdējais attālinātais lietotājs atstāj sapulci, sapulce beigsies arī lokālajam lietotājam.

Heart Connect attālinātās programmatūras uzturēšana

Heart Connect attālinātās programmatūras atjauninājumi

Kad ir pieejams Heart Connect attālinātās programmatūras atjauninājums, attālinātais lietotājs tiek informēts pa e-pastu un viņš var lejupielādēt un instalēt atjauninājumu. Instalējiet atjauninājumus, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, lai nodrošinātu visu svarīgu izmaiņu ieviešanu.

PAPILDINFORMĀCIJA

Importētājs Eiropas Savienībā

Importētājs ES: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, Nederland

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

рсия. Да не се използва.
erze. Ne používat.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Ne používať.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
Botany NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.
92302087.023 LV OUS 2020-06

