

 Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
International : +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-003 fr Europe 2020-04

CE 2797



GUIDE QUICK START

Communicateur LATITUDE™




Lire avant de procéder à l'installation.

Informations utiles relatives au Communicateur LATITUDE

Utilisation

Le Communicateur LATITUDE est conçu pour rassembler des informations en provenance de votre dispositif implanté. Votre Communicateur envoie ensuite ces données au site Internet du médecin afin que votre équipe médicale puisse y accéder et aider le médecin à gérer vos soins continus.

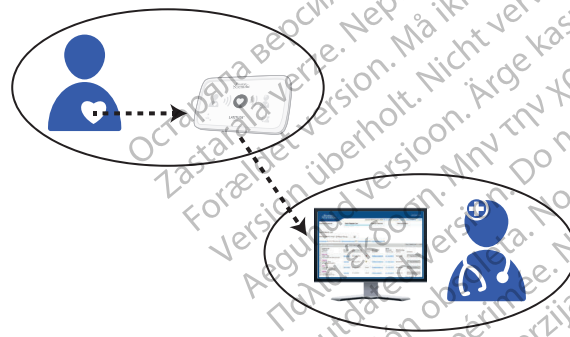

 **Il ne s'agit pas d'un système médical d'urgence.**

Fonctionnement






Une fois votre Communicateur configuré (retournez pour consulter les étapes de configuration), il vérifiera régulièrement votre dispositif selon un calendrier défini par votre centre. Parfois, les vérifications se feront automatiquement, et parfois le Communicateur aura besoin de votre aide. Appuyez simplement sur le bouton Cœur lorsqu'il clignote pour aider à finaliser la vérification du dispositif.



Où placer votre Communicateur ?

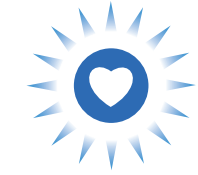- À moins de 3 mètres (10 pieds) de votre table de chevet ou de l'endroit où vous dormez. Si cela n'est pas possible, installez votre Communicateur dans un endroit où vous passez beaucoup de temps chaque jour.
- À au moins 30 cm (12 po) des téléviseurs, lecteurs de DVD, ordinateurs, modems, routeurs, fours à micro-ondes et autres équipements électroniques.
- A un emplacement où vous pouvez vous installer confortablement et voir la face avant du Communicateur.
- Suivant la méthode de connexion utilisée :
 - **Cellulaire** : dans un endroit où vous captez un bon signal cellulaire.
 - **Internet** : à proximité, mais à au moins un mètre (3 pieds) de votre modem ou routeur Internet.

Que signifient ces voyants lumineux ?


Si vous voyez...	Cela signifie que...	Procédez comme suit...
 Bouton Cœur clignotant	Le Communicateur a besoin d'aide pour finaliser une vérification du dispositif programmée. <i>Remarque : ceci n'indique pas qu'un problème avec votre dispositif implanté a été détecté.</i>	Appuyez sur le bouton Cœur. Restez près du Communicateur jusqu'à ce que tous les voyants apparaissent comme à la ligne suivante.
	Les données de votre dispositif implanté ont été transmises au site Internet du médecin.	Aucune autre action n'est requise.
	Il existe un problème potentiel qui doit être résolu par votre médecin.	Appelez votre médecin.
 OU 	Si l'icône Appeler le médecin ou trois ondes sont allumées en jaune, cela signifie que votre Communicateur connaît un problème de connexion ou ne fonctionne pas correctement.	Reportez-vous à l'erreur concernée dans la section Résolution des problèmes de votre manuel du patient.

Retournez pour consulter les étapes de configuration.




1 Confirmez les paramètres des commutateurs.

REMARQUE : Ce guide Quick Start fournit des instructions sur le réglage et la configuration du commutateur pour les connexions cellulaires ou Internet uniquement. Si vous utilisez une connexion téléphonique standard, consultez votre Manuel du patient pour ces informations.

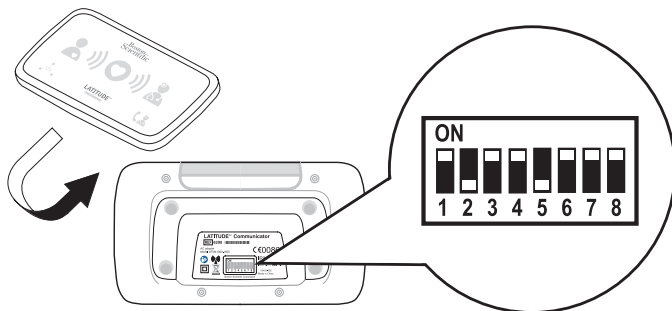

Vérifiez les interrupteurs blancs numérotés de 1 à 8 au bas de votre Communicateur. S'ils correspondent aux paramètres des commutateurs illustrés ci-dessus, aucune action n'est nécessaire. S'ils ne correspondent pas, faites-les glisser vers le haut ou vers le bas comme illustré.

2 Connectez l'alimentation.

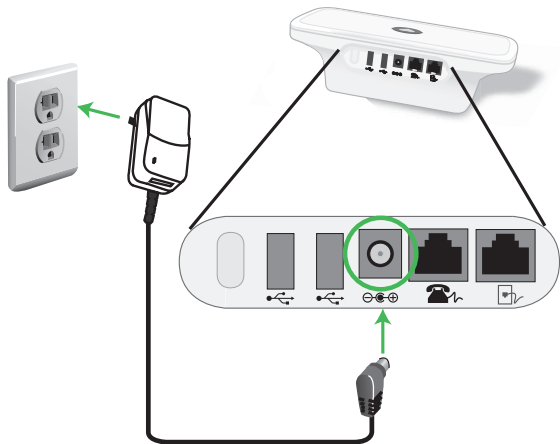

3 Identifiez la **méthode de connexion** utilisée pour vous connecter au site Internet du médecin :


- A. Cellulaire **ou**
B. Internet

Connectez ensuite les câbles pour la méthode **choisie**, comme illustré.


Consultez votre Manuel du patient pour de plus amples informations.

4 Connectez les câbles selon la méthode de connexion choisie (A **ou** B).

A. Connexion cellulaire avec un adaptateur cellulaire USB

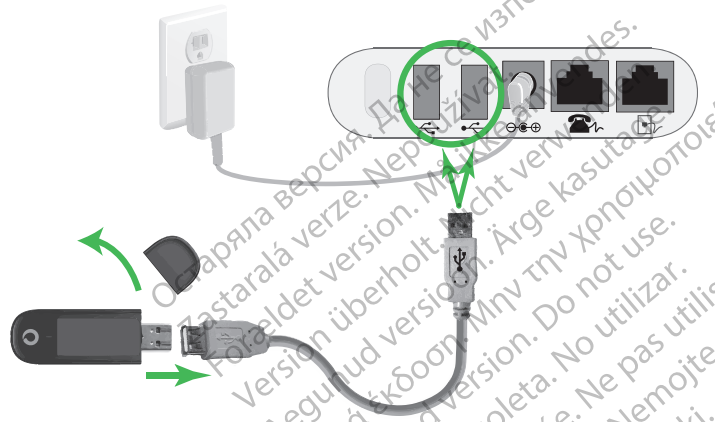

ou B. Connexion Internet avec un adaptateur Ethernet USB

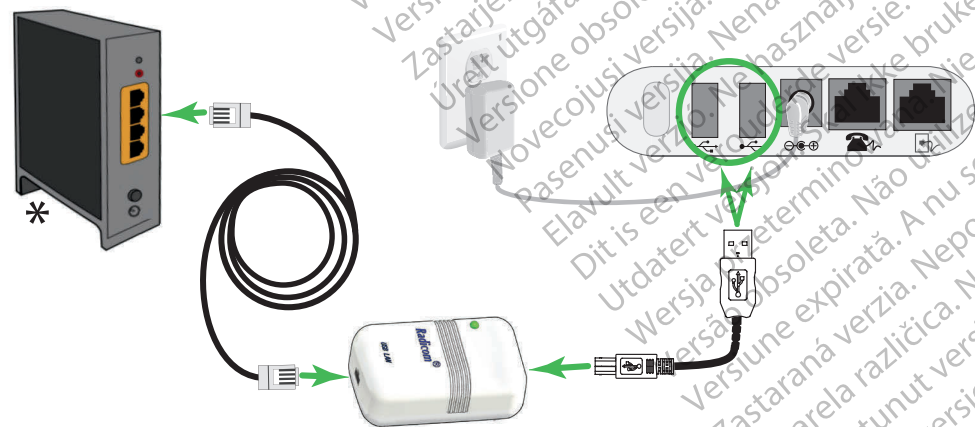

* Modem ou routeur Internet

Conservez en permanence votre système de connexion branché à votre Communicateur.

Cela permet à votre Communicateur d'envoyer les données collectées de votre dispositif implanté au site Internet du médecin afin que votre équipe médicale puisse y accéder.

5 Appuyez sur le bouton Cœur clignotant du Communicateur LATITUDE pour lancer le processus de configuration.



6 Attendez jusqu'à la fin du transfert de données. Ceci peut durer quelques minutes.

Collecte des données provenant de votre dispositif implanté.

Transmission des données
Si le bouton Cœur clignote de nouveau, réappuyez dessus.

7 Attendez la mise à jour du logiciel.



Une mise à jour logicielle peut avoir lieu. Patientez plusieurs minutes jusqu'à ce que le bouton Cœur clignote, puis appuyez dessus une seconde fois. Cela peut se produire plusieurs fois. Appuyez sur le bouton Cœur à chaque fois qu'il clignote.

8 Vous avez réussi !



Si les voyants s'allument comme indiqué ci-dessus, la configuration est terminée ! Les voyants s'éteindront automatiquement après 2 minutes.

9 Laissez votre Communicateur branché en permanence.



Cela permet à votre Communicateur de vérifier votre dispositif implanté à des moments définis par votre médecin.

? Besoin d'aide ?

Si vous voyez des ondes jaunes ou l'icône Appeler le médecin en jaune (comme illustré de l'autre côté de ce guide), consultez l'erreur concernée dans la section Résolution des problèmes de votre manuel du patient.

Pour plus d'informations, contactez votre médecin ou appelez le Service Client LATITUDE au numéro indiqué pour votre pays dans le manuel du patient.

Retournez pour obtenir des informations utiles.

