

 Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Globalmente: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-004 it Europe 2020-04

C € 2797



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Comunicatore LATITUDE™




Leggere prima dell'installazione.

Informazioni utili sul Comunicatore LATITUDE

A cosa serve?

Il Comunicatore LATITUDE è progettato per raccogliere informazioni dal proprio dispositivo impiantato. Il Comunicatore invia quindi questi dati al sito web del medico affinché il team sanitario possa accedere per la gestione del trattamento in corso.

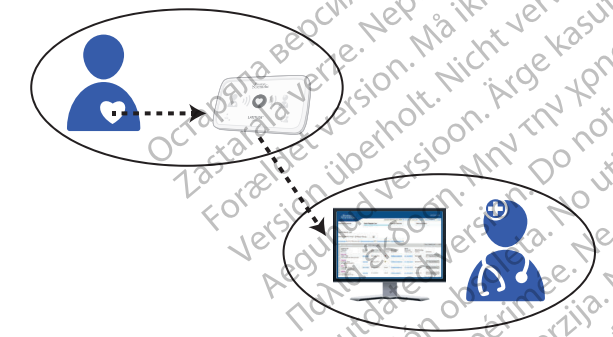

 **Non si tratta di un sistema medico di emergenza.**

Come funziona?


Una volta impostato il Comunicatore (vedere sul retro per le fasi di impostazione), questo controllerà periodicamente il dispositivo, in base alla programmazione impostata dalla clinica. In alcuni casi ciò avverrà automaticamente, altre volte il Comunicatore avrà bisogno di assistenza. È sufficiente premere il pulsante "Cuore" mentre lampeggia per completare il controllo del dispositivo.



Dove posizionare il Comunicatore?

- Entro 3 metri dal letto o dove si dorme. Se ciò non fosse possibile, posizionare il Comunicatore dove si trascorre la maggior parte del tempo di ogni giornata.
- Almeno a 30 cm di distanza da televisori, lettori di DVD, personal computer, modem, router, microonde e altre apparecchiature elettroniche.
- Dove è possibile sedersi comodamente e vedere la parte anteriore del Comunicatore.
- A seconda del metodo di connessione utilizzato:
 - Cellulare:** in un punto in cui si riesce a ottenere un buon segnale.
 - Internet:** vicino, ma non a meno di 1 metro da un modem o router.

Cosa significano queste luci?

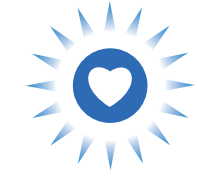
Se vedi...	Significa...	Fai questo...
 Pulsante "Cuore" lampeggiante	Il Comunicatore ha bisogno di aiuto per il completamento del controllo programmato del dispositivo. <i>Nota: ciò non indica un problema con il proprio dispositivo impiantato.</i>	Premere il pulsante "Cuore". Trovarsi accanto al Comunicatore fino a che le luci non sono mostrate come nella riga successiva.
	I dati provenienti dal proprio dispositivo impiantato sono stati inviati al sito web del clinico.	Non è necessaria un'ulteriore azione.
	Esiste un potenziale problema che deve essere gestito dall'operatore sanitario.	Chiamare il proprio operatore sanitario.
 OPPURE 	Ciascuna icona Onda gialla o Chiama il medico gialla significa che il Comunicatore sta avendo un problema di collegamento o non sta funzionando in modo adeguato.	Fare riferimento all'errore relativo nella sezione Risoluzione problemi del Manuale per il paziente.

Vedere sul retro per le fasi di impostazione.



1 Confermare le impostazioni dell'interruttore.

NOTA: questa Guida all'installazione fornisce istruzioni per l'impostazione dell'interruttore e l'impostazione generale solo per le connessioni con cellulare o Internet. Se si sta utilizzando una connessione telefonica standard, fare riferimento al Manuale per il paziente per le relative informazioni.

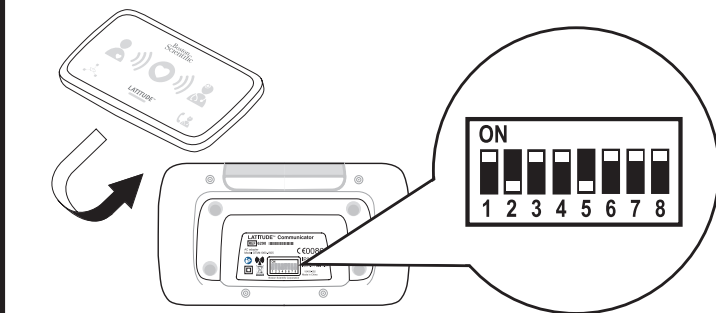

Controllare gli interruttori bianchi numerati 1-8 sulla parte inferiore del Comunicatore. Se corrispondono alle impostazioni dell'interruttore mostrate sopra, non è necessaria alcuna azione. Se non corrispondono, farle scorrere su o giù per impostarle come mostrato.

2 Collegare l'alimentazione di corrente.

3 Identificare quale metodo **unico** di connessione sarà utilizzato per collegarsi al sito web del medico:

A. Cellulare **oppure**
B. Internet

Quindi, collegare i cavi per quell'**unico** metodo come mostrato.

Fare riferimento al proprio Manuale per il paziente per ulteriori dettagli.

4 Collegare i cavi per **un unico** metodo di connessione (A o B).

A. Collegamento cellulare, mediante un adattatore cellulare USB

Tenere sempre inserito il proprio metodo di connessione nel Comunicatore.

Ciò consente al Comunicatore di inviare i dati raccolti dal proprio dispositivo impiantato al sito web del medico affinché il team sanitario possa accedere.

oppure B. Connessione Internet, mediante un adattatore Ethernet USB

* Router o modem Internet

5 Premere il pulsante "Cuore" lampeggiante sul Comunicatore LATITUDE per avviare il processo di impostazione.

6 Attendere che i dati vengano inviati. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti.

Raccolta di dati dal dispositivo impiantato

Invio di dati in corso

Se il pulsante "Cuore" lampeggia di nuovo, premerlo ancora una volta.

7 Attendere l'aggiornamento software.

Potrebbe essere in corso un aggiornamento software. Attendere alcuni minuti che il pulsante "Cuore" lampeggi, quindi premerlo di nuovo. Questo potrebbe succedere più volte. Premere il pulsante "Cuore" ogni volta che lampeggia.

8 ✓ Operazione riuscita!

Se gli indicatori vengono accesi come mostrato sopra, l'impostazione è completa! Le luci si spengono automaticamente dopo 2 minuti.

9 Tenere sempre il Comunicatore inserito nella presa.

Ciò consente al Comunicatore di controllare il proprio dispositivo impiantato quando programmato dal proprio operatore sanitario.

? Occorre ulteriore assistenza?

Se si visualizza l'icona Onda gialla o Chiama il medico gialla (come mostrato sull'altro lato della presente Guida), fare riferimento al relativo errore nella sezione Risoluzione problemi del proprio Manuale per il paziente.

Per ulteriore assistenza, contattare il proprio operatore sanitario o l'Assistenza di LATITUDE al numero corrispondente alla propria nazione, elencato nel Manuale per il paziente.

Capovolgere per informazioni utili.