


## Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE

### Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται;

Η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή πληροφοριών από την εμφυτευμένη συσκευή σας. Η Συσκευή επικοινωνίας σας αποστέλλει, στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα στην Ιστοσελίδα Ιατρών ώστε να παρέχει πρόσβαση στην ομάδα φροντίδας υγείας σας και να τη βοηθά στη διαχείριση της συνεχούς φροντίδας σας.

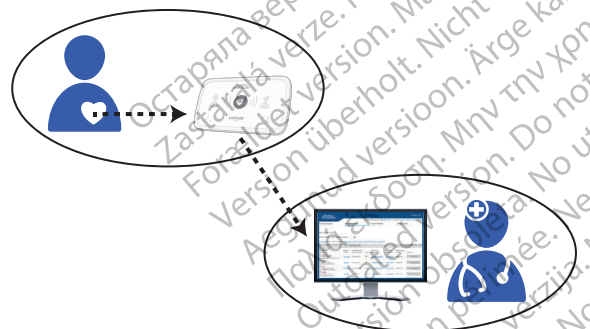

**!** Το παρόν δεν αποτελεί ιατρικό σύστημα έκτακτης ανάγκης.

### Πώς λειτουργεί;

Μόλις ρυθμιστεί η Συσκευή επικοινωνίας (αναποδογυρίστε για να δείτε τα βήματα ρύθμισης), θα πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι βάσει προγράμματος που ορίζεται από την κλινική. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει αυτόματα, άλλες φορές η Συσκευή επικοινωνίας ενδέχεται να χρειαστεί τη βοήθειά σας. Για να βοηθήσετε στην ολοκλήρωση του ελέγχου της συσκευής, απλώς πατήστε το Κουμπί καρδιάς όταν αναβοσβήνει.








### Πού μπορείτε να τοποθετήσετε τη Συσκευή επικοινωνίας σας;

- Σε απόσταση εντός 3 μέτρων από το σημείο όπου κοιμάστε ή δίπλα στο κρεβάτι σας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετήστε τη Συσκευή επικοινωνίας σε σημείο όπου περνάτε αρκετό χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σας.
- Τουλάχιστον 30 εκατοστά μακριά από τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων βίντεο (DVD), υπολογιστές, μόντεμ, δρομολογητές, μικροκύματα και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Σε σημείο όπου μπορείτε να καθίσετε άνετα και να έχετε οπτική επαφή με το μπροστινό μέρος της Συσκευής επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείται:

- **Κυψελοειδής:** Σε μια τοποθεσία όπου έχετε καλό κυψελοειδές σήμα.
- **Internet:** Κοντά, αλλά όχι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από το μόντεμ ή τον δρομολογητή της σύνδεσης στο Internet.

### Τι υποδεικνύουν αυτές οι φωτεινές σημάνσεις;

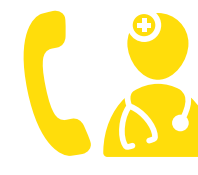Αν δείτε ...	Αυτό σημαίνει ...	Κάντε το εξής ...
 Κουμπί καρδιάς που αναβοσβήνει	Η Συσκευή επικοινωνίας χρειάζεται βοήθεια ώστε να ολοκληρωθεί ένας προγραμματισμένος έλεγχος της συσκευής. <i>Σημείωση:</i> Αυτό δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με την εμφυτευμένη συσκευή σας.	Πατήστε το Κουμπί καρδιάς.  Παραμείνετε δίπλα στη Συσκευή επικοινωνίας μέχρι όλες οι φωτεινές σημάνσεις να εμφανίζονται όπως στην επόμενη σειρά.
 Δεδομένα από την εμφυτευμένη συσκευή σας έχουν αποσταλεί στην Ιστοσελίδα Ιατρών.		Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.
	Υπάρχει πιθανό πρόβλημα του οποίου πρέπει να επιληφθεί ο πάροχος υγείας σας.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υγείας σας.
 ή 	Το Κίτρινο εικονίδιο κύματος ή το Κίτρινο εικονίδιο κλήσης ιατρού δηλώνει ότι η Συσκευή επικοινωνίας σας αντιμετωπίζει πρόβλημα σύνδεσης ή δεν λειτουργεί σωστά.	Ανατρέξτε στο αντίστοιχο σφάλμα που υπάρχει στην ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων του Εγχειριδίου ασθενή.

Αναποδογυρίστε για να δείτε τα βήματα ρύθμισης.



Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
Παγκοσμίως: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com  
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation  
or its affiliates. All rights reserved.  
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.

92436021-007 el Europe 2020-04

### ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

### Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE™




Διαβάστε πριν από την εγκατάσταση.

CE 2797




# 1 Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις διακοπτών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο παρών Οδηγός γρήγορης εκκίνησης παρέχει οδηγίες για τη ρύθμιση των διακοπτών και τη διαδικασία ρύθμισης μόνο για κυψελοειδείς συνδέσεις ή συνδέσεις Internet. Εάν χρησιμοποιείτε τυπική τηλεφωνική σύνδεση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο ασθενή για αυτές τις πληροφορίες.

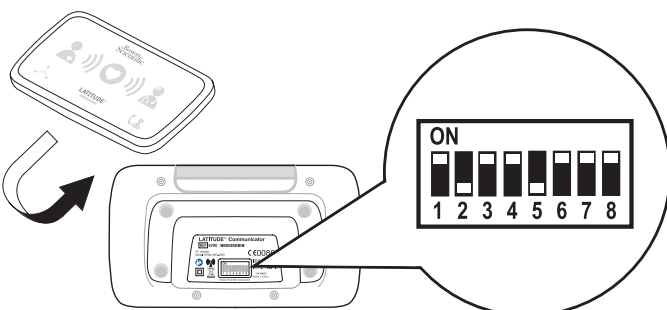

Ελέγξτε τους λευκούς διακόπτες που φέρουν αρίθμηση 1-8 στο κάτω μέρος της Συσκευής επικοινωνίας. Εάν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις διακοπτών που φαίνονται παραπάνω, δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια. Εάν δεν αντιστοιχούν, μετακινήστε τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να τους ρυθμίσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

# 2 Συνδέστε τη συσκευή τροφοδοσίας.

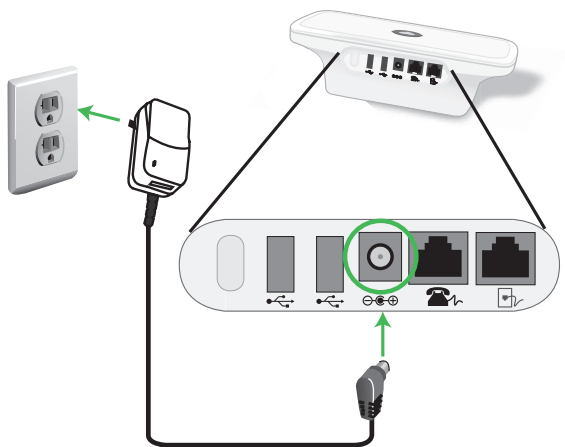

# 3 Προσδιορίστε τη συγκεκριμένη μέθοδο σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα ιατρών:


- A. Κυψελοειδής ή
- B. Internet

Στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια για τη **συγκεκριμένη** μέθοδο όπως φαίνεται στην εικόνα.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο ασθενή.

# 4 Συνδέστε τα καλώδια για τη **συγκεκριμένη** μέθοδο σύνδεσης (A ή B).

## A. Κυψελοειδής σύνδεση, με τη χρήση Κυψελοειδή προσαρμογέα USB

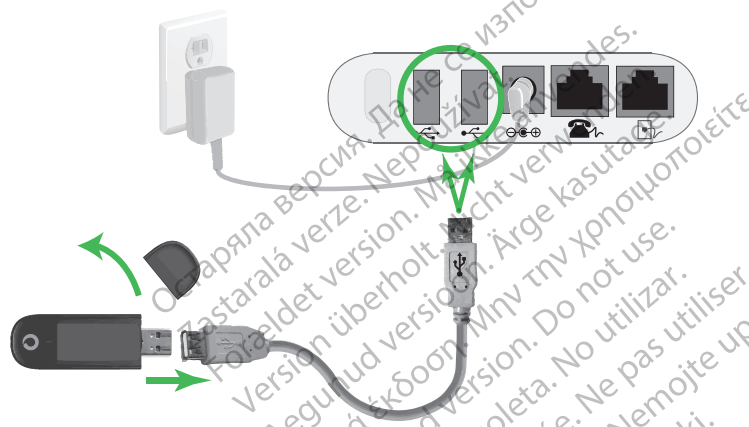

## ή B. Σύνδεση στο Internet, με χρήση Προσαρμογέα Ethernet USB

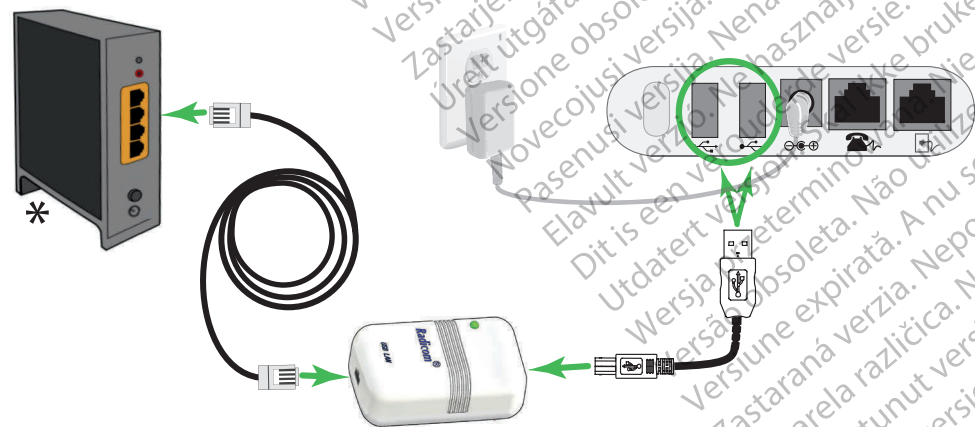

\* Μόντεμ ή δρομολογητής σύνδεσης στο Internet

Αφήνετε τη μέθοδο σύνδεσής σας πάντοτε συνδεδεμένη στη Συσκευή επικοινωνίας σας.

Αυτό επιτρέπει στη Συσκευή επικοινωνίας σας να αποστέλλει τα δεδομένα που έχει συλλέξει από την εμφυτευμένη συσκευή σας στην Ιστοσελίδα ιατρών ώστε η ομάδα φροντίδας υγείας σας να έχει πρόσβαση σε αυτά.

# 5 Πατήστε το Κουμπί καρδιάς που αναβοσβήνει στη Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE, για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης.




# 6 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή δεδομένων. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Συλλογή δεδομένων από την εμφυτευμένη συσκευή σας

Αποστολή δεδομένων  
Εάν αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά το Κουμπί καρδιάς, πατήστε το ξανά.

# 7 Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.

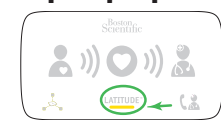

Ενδέχεται να διενεργείται ενημέρωση λογισμικού. Περιμένετε αρκετά λεπτά μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το Κουμπί καρδιάς και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές. Πατάτε το Κουμπί καρδιάς κάθε φορά που αναβοσβήνει.

# 8 Τα καταφέρατε!



Εάν οι φωτεινές ενδείξεις ανάβουν όπως φαίνεται παραπάνω, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί! Οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν αυτόματα σε 2 λεπτά.

# 9 Αφήνετε τη Συσκευή επικοινωνίας σας πάντοτε συνδεδεμένη.



Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στη Συσκευή επικοινωνίας να ελέγχει την εμφυτευμένη συσκευή κατά τις χρονικές στιγμές που έχουν προγραμματιστεί από τον πάροχο υγείας σας.

# ? Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Εάν δείτε οποιαδήποτε Κίτρινη ένδειξη κυμάτων ή Κίτρινο εικονίδιο κλήσης ιατρού (όπως φαίνεται στην άλλη πλευρά του παρόντος Οδηγού), ανατρέξτε στο αντίστοιχο σφάλμα στην ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων του Εγχειριδίου ασθενή.

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πάροχο υγείας σας ή καλέστε την Υποστήριξη LATITUDE στον αριθμό που αναφέρεται για τη χώρα σας στο Εγχειρίδιο ασθενή.

Αναποδογυρίστε για χρήσιμες πληροφορίες.