

 Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

 Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Hele verden: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-009 da Europe 2020-04

CE 2797



VEJLEDNING TIL HURTIG START

LATITUDE™ kommunikator




Læs dette, før du installerer.

Nyttige oplysninger om LATITUDE-kommunikatoren

Hvad bruges den til?

LATITUDE kommunikatoren er beregnet til at indsamle oplysninger fra din implanterede enhed. Din kommunikator sender derefter disse data til hjemmesiden for klinikpersonale, hvor det medicinske team har adgang til dem som en hjælp til at administrere din igangværende behandling.

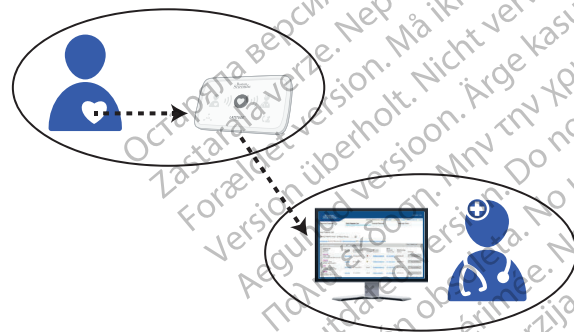

 Dette er ikke et medicinsk nødbehandlingssystem.

Hvordan fungerer den?

Når din kommunikator er konfigureret (vend guiden om for at se konfigurationstrinnene), kontrollerer den din enhed med jævne mellemrum ud fra en tidsplan, der er fastlagt af klinikken. Nogle gange sker dette automatisk, og andre gange skal kommunikatoren have din hjælp til dette. Tryk blot på den blinkende hjerteknap, når den blinker, for at få hjælp til at fuldføre kontrollen af enheden.



Hvor skal du placere din kommunikator?

- Inden for en afstand på 3 meter (10 fod) fra din seng, eller hvor du sover. Hvis dette ikke er muligt, skal du placere din kommunikator et sted, hvor du befinder dig en stor del af tiden hver dag.
- Mindst 30 cm (12 in) fra fjernsyn, video- og dvd-afspillere, pc'er, modemmer, routere, mikroovne og andet elektronisk udstyr.
- Et sted, hvor du kan sidde komfortabelt og se forsiden af kommunikatoren.
- Afhængigt af den anvendte forbindelse:
 - **Mobil:** Et sted, hvor der er et godt mobilsignal.
 - **Internet:** I nærheden af, men mindst 1 meter (3 fod) fra internetmodemmet eller -routeren.

Hvad betyder disse lyssignaler?


Hvis du ser følgende...	Betyder det, at...	Gør dette...
 Blinkende hjerteknap	Kommunikatoren har brug for hjælp med at fuldføre den planlagte enhedskontrol <i>Bemærk: Dette indikerer ikke et problem med din implanterede enhed.</i>	Tryk på hjerteknappen. Bliv ved siden af kommunikatoren, indtil alle lyssignalerne er som vist i den næste række.
	Der er sendt data fra din implanterede enhed til hjemmesiden for klinikpersonale.	Der kræves ingen yderligere handlinger.
	Der er et potentielt problem, som din læge skal tage sig af.	Ring til din læge.
 ELLER 	En gul lampe eller et gult ikon for opkald til læge betyder, at din kommunikator har et problem med at oprette forbindelse eller ikke fungerer korrekt.	Se den relevante fejl i fejlfindingsafsnittet i patienthåndbogen.

Vend guiden om for at se installationstrinnene.




1 Bekræft kontaktindstillingerne.

BEMÆRKNING: Denne vejledning til hurtig start indeholder kun vejledninger i kontaktindstilling og konfiguration for mobile forbindelser eller internetforbindelser. Hvis du bruger en almindelig telefonforbindelse, kan du se disse oplysninger i patienthåndbogen.

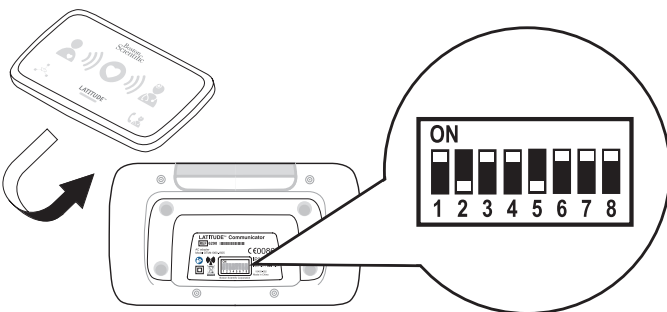

Tjek de hvide kontakter nummereret 1-8 i bunden af kommunikatoren. Hvis de stemmer overens med de kontaktindstillinger, der er vist herover, er der ikke brug for nogen handling. Hvis de ikke stemmer overens, skal du skubbe dem op eller ned for at indstille dem som vist.

2 Tilslut lysnetledningen.

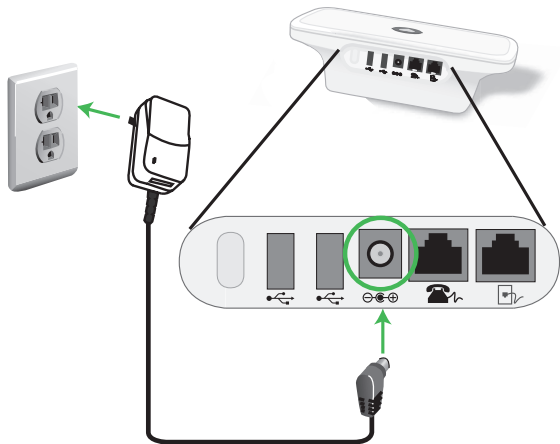

3 Identificer den forbindelsesmetode, du vil anvende til at oprette forbindelse til hjemmesiden for klinikpersonale:


- A. Mobil **eller**
- B. Internet

Forbind derefter kablerne for **den** valgte metode som vist.


Se patienthåndbogen for at få flere oplysninger.

4 Forbind kablerne til din foretrukne forbindelse (A **eller** B).

A. Mobilnetværksforbindelse, ved hjælp af en mobil USB-adapter

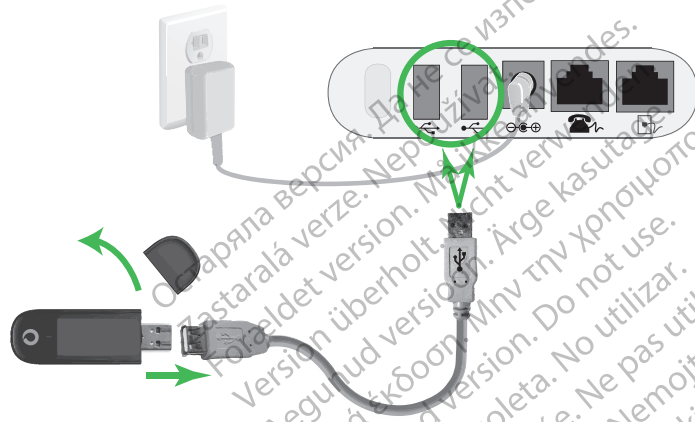

eller B. Internetforbindelse ved hjælp af en USB Ethernet-adapter

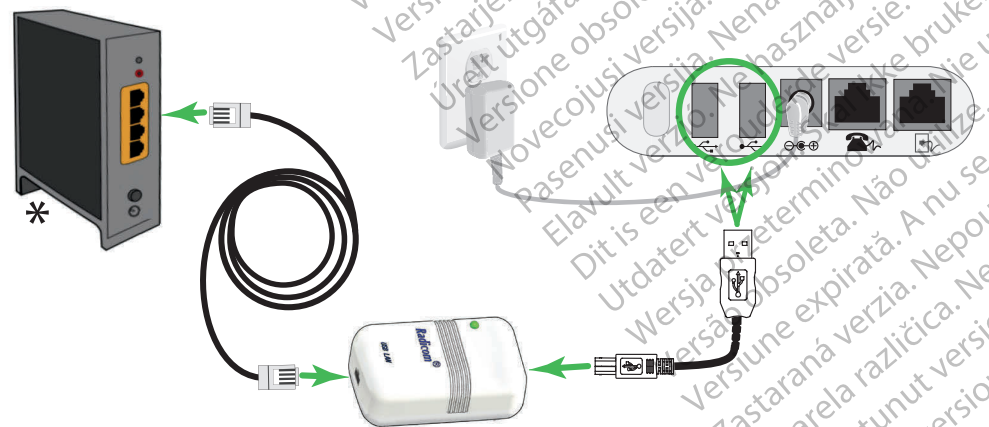

* Internetrouter eller -modem

Lad altid den anvendte forbindelse være tilsluttet kommunikatoren.

Dermed kan kommunikatoren sende de data, der er indsamlet fra din implanterede enhed, til hjemmesiden for klinikpersonale, hvor din læge har adgang til dem.

5 Tryk på den blinkende hjerteknap på LATITUDE kommunikatoren for at starte konfigurationsprocessen.



6 Vent, mens dataene sendes. Dette kan tage flere minutter.

Indsamler data fra din implanterede enhed

Afsender data
Hvis hjerteknappen blinker igen, skal du trykke på den igen.

7 Vent på softwareopdateringen.



Der kan være en softwareopdatering i gang. Vent nogle minutter, indtil hjerteknappen blinker igen, og tryk derefter på den igen. Dette kan forekomme flere gange. Tryk på hjerteknappen, hver gang den blinker.

8 Gennemført!



Hvis indikatorerne er tændt som vist ovenfor, er installationen færdig! Lysene slukkes automatisk efter 2 minutter.

9 Lad altid din kommunikator være sat i stikkontakten.



Dermed kan din kommunikator kontrollere din implanterede enhed på de tidspunkter, som din læge har planlagt.

? Har du brug for mere hjælp?

Hvis du ser en gul lampe eller et gult ikon for opkald til læge (som vist på den anden side af denne vejledning), skal du se den relevante fejl i fejlfindingsafsnittet i patienthåndbogen.

Du kan få mere hjælp ved at kontakte din læge eller ringe til LATITUDE support på det nummer, der er angivet for dit land i patienthåndbogen.

Vend vejledningen om for at få nyttige oplysninger.