

 Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

 Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Pro všechny země: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-014 cs Europe 2020-04

 € 2797



STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

Komunikátor LATITUDE™




Před instalací si přečtěte následující informace.

Užitečné informace o Komunikátoru LATITUDE

K čemu se používá?

Komunikátor LATITUDE je určen ke shromažďování informací z implantovaného prostředku. Komunikátor tyto údaje potom odesílá na webovou stránku pro lékaře, kde k nim má přístup lékařský tým, který tyto informace používá k řízení vaší současné léčby.

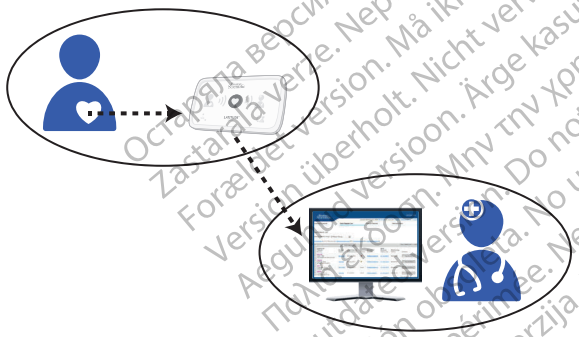

 **Nejedná se o zdravotnický systém pro akutní stavy.**

Jak to celé funguje?


Po nastavení (*postup nastavení je na zadní straně*) bude Komunikátor pravidelně kontrolovat váš prostředek podle plánu nastaveného na klinickém pracovišti. Tyto kontroly budou někdy probíhat automaticky a jindy bude Komunikátor vyžadovat vaši pomoc. Kontrolu prostředku jednoduše provedete stisknutím blikajícího Tlačítka srdce.



Kam komunikátor umístit?

- Do vzdálenosti 3 m, tj. 10 stop, od místa, kde spíte nebo vedle postele. Pokud to není možné, umístěte komunikátor tam, kde trávíte značnou část dne.
- Minimálně 30 cm (12 palců) od televizí, přehrávačů DVD disků, osobních počítačů, modemů, směrovačů, mikrovlnných trub a dalších elektronických zařízení.
- Na místo, kde můžete pohodlně sedět a vidět na přední stranu komunikátoru.
- V závislosti na použité metodě připojení:
 - **Mobilní telefony:** Na místo s dobrým signálem mobilního telefonu.
 - **Internet:** Poblíž, ale ne blíže než 1 metr (3 stopy) od internetového modemu nebo směrovače.


Co znamenají tyto kontrolky?

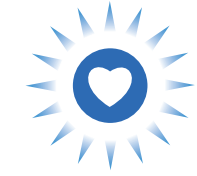Pokud vidíte, že...	Znamená to, že...	Udělejte následující...
 Tlačítko srdce bliká	Komunikátor vyžaduje pomoc s provedením naplánované kontroly prostředku. <i>Poznámka: Neznamená to problém s implantovaným prostředkem.</i>	Stiskněte tlačítko srdce. Zůstaňte v blízkosti komunikátoru, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí stejně jako v následujícím řádku.
	Údaje z implantovaného prostředku byly odeslány na webovou stránku pro lékaře.	Dále nemusíte dělat nic.
	Vyskytl se možný problém, který vyžaduje pozornost poskytovatele zdravotní péče.	Obracejte se na svého poskytovatele zdravotní péče.
 NEBO 	Žlutý indikátor vln a žlutý symbol volat lékaři znamená, že komunikátor má problém s připojením nebo nepracuje správně.	Postupujte podle příslušných pokynů v části Odstraňování potíží v příručce pro pacienty.

Postup nastavení naleznete na zadní straně. 


1 Potvrďte nastavení přepínače.

POZNÁMKA: Tato Stručná úvodní příručka uvádí pokyny k nastavení přepínače pouze pro mobilní a internetové připojení. Pokud k připojení používáte standardní telefonní linku, najdete tyto informace v Příručce pro pacienty.

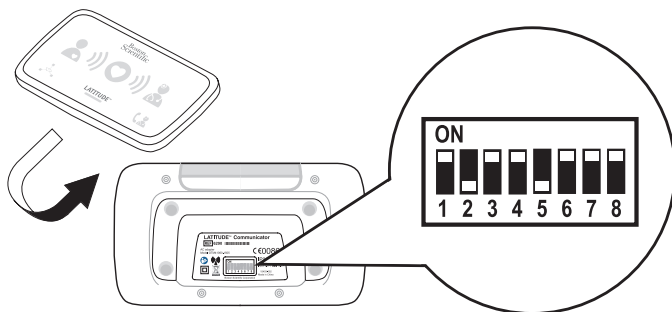

Zkontrolujte bílé přepínače očíslované 1–8 na dolní straně komunikátoru. Pokud odpovídají výše uvedenému nastavení, není nic dalšího potřeba. Pokud neodpovídají, přesuňte je nahoru či dolů, aby odpovídaly ilustraci.

2 Připojte zdroj napájení.

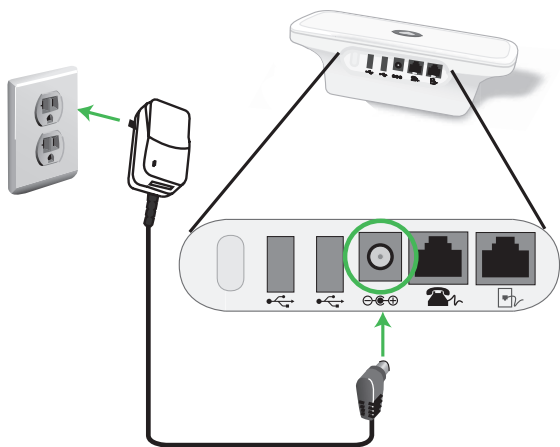

3 Určete způsob připojení, který použijete pro připojení k webové stránce pro lékaře:


- A. Mobilní telefon **nebo**
- B. Internet

Potom následovně připojte potřebné kabely podle **zvolené** metody připojení.


Podrobnější pokyny naleznete v Příručce pro pacienty.

4 Připojte kabely podle zvoleného způsobu **připojení** (A **nebo** B).

A. Mobilní připojení s použitím mobilního adaptéru USB

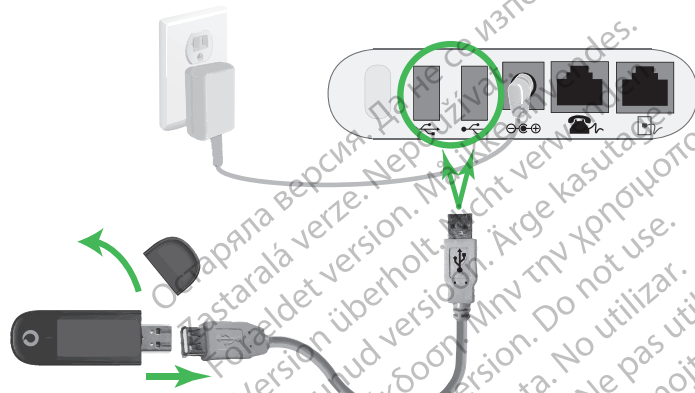

nebo B. Internetové připojení s použitím ethernetového adaptéru USB

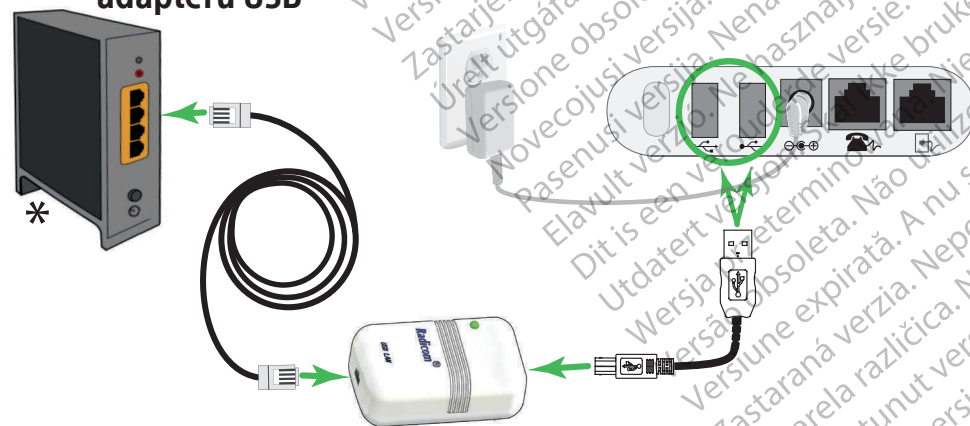

* Internetový směrovač nebo modem

Zajistěte, aby zvolený způsob připojení ke komunikátoru byl vždy proveden.

Komunikátoru to umožní odeslat údaje získané z implantovaného prostředku na webovou stránku pro lékaře, kde k nim má přístup poskytovatel zdravotní péče.

5 Spusťte proces nastavení stisknutím blikajícího tlačítka srdce na komunikátoru LATITUDE.



6 Počkejte, dokud se data neodešlou. Může to trvat několik minut.

- Získávání dat z implantovaného prostředku
 - Odesílání dat
- Pokud tlačítko srdce opět bliká, stiskněte ho znovu.

7 Počkejte na aktualizaci softwaru.



Může probíhat aktualizace softwaru. Počkejte několik minut, dokud tlačítko srdce nezačne opět blikat – poté jej znovu stiskněte. Toto může nastat několikrát. Stiskněte tlačítko srdce pokaždé, když bliká.

8 Úspěch!



Pokud indikátory svítí stejně jako na obrázku výše, nastavení je dokončeno. Kontrolky samy zhasnou po 2 minutách.

9 Komunikátor nechávejte vždy připojený.



Komunikátoru to umožní zkontrolovat implantovaný prostředek podle plánu vašeho poskytovatele zdravotní péče.

? Potřebujete pomoc?

Pokud svítí žlutý indikátor vln nebo žlutý Symbol lékaře, (viz ilustrace na další straně této příručky), postupujte podle příslušných pokynů v části Odstraňování potíží v Příručce pro pacienty.

Další informace získáte od svého poskytovatele zdravotní péče nebo na lince podpory LATITUDE. Číslo pro vaši zemi je uvedeno v Příručce pro pacienty.

Na zadní straně najdete užitečné informace.