

 Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Más országokban: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-016 hu Europe 2020-04

CE 2797



RÖVID ÚTMUTATÓ

LATITUDE™ kommunikátor




Olvassa el telepítés előtt.

Hasznos információk a LATITUDE kommunikátorról

Mire szolgál?

A LATITUDE kommunikátor adatokat gyűjt az Ön beültetett készülékéből. A kommunikátor ezután elküldi ezeket az adatokat az orvosi honlapra, ahol az orvosi csapat segítségére lesznek az Ön folyamatos egészségügyi ellátásában.

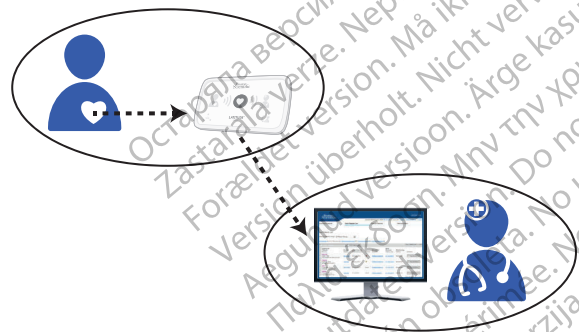

 **Nem sürgősségi orvosi rendszer.**

Hogy működik?

Ha beállította a kommunikátort, (a beállítási lépéseket a másik oldalon találja), időközönként ellenőrzi a készüléket a rendelő által beállított ütemezés szerint. Néha ez megtörténik automatikusan, máskor a kommunikátor az Ön közreműködését igényli. A készülék ellenőrzésének elvégzéséhez csak nyomja meg a villogó, szívet ábrázoló gombot, amikor az villog.



Hová helyezze a kommunikátort?

- 3 méternél nem távolabbra az ágyától (ahol alszik). Ha ez nem lehetséges, helyezze a kommunikátort oda, ahol sok időt tölt a nap folyamán.
- Legalább 30 cm távolságra a televíziókészülékektől, DVD-lejátszóktól, személyi számítógépektől, modemektől, routerektől, mikrohullámú sütőktől vagy más elektronikus eszközöktől.
- Ahol kényelmesen tud ülni, és látja a kommunikátor első oldalát.
- A csatlakozás módjától függően:
 - **Mobiladat-kapcsolat:** Olyan helyre, ahol a mobiljelerősség megfelelő.
 - **Internet:** Az internetmodem vagy router közelébe, de 1 méternél nem közelebb.

Mit jelentenek ezek a fények?


Ha ezt látja ...	Azt jelenti ...	Tegye ezt ...
 Villogó, szívet ábrázoló gomb	A kommunikátor az Ön beavatkozására vár, hogy elvégezhesse a készülék ütemezett ellenőrzését. <i>Megjegyzés: Ez nem jelenti azt, hogy probléma van a beültetett készülékkel.</i>	Nyomja meg a szívet ábrázoló gombot. Maradjon a kommunikátor mellett, amíg meg nem jelennek a következő sorban látható fényjelzések.
	A beültetett készülékről származó adatokat az eszköz elküldte az orvosi honlapra.	Nincs további tennivaló.
	Potenciális probléma lépett fel, amelyet az egészségügyi szakembernek kell megoldania.	Hívja az egészségügyi szolgáltatóját.
 VAGY 	A sárga hullámvonal vagy a „Hívja az orvosát!” ikonok azt jelentik, hogy kapcsolódási probléma lépett fel, vagy pedig a kommunikátor nem működik megfelelően.	A lehetséges hibák leírását lásd a Használati útmutató betegek részére Hibaelhárítás című részében.

A beállítási lépéseket lásd a túloldalon.




1 Ellenőrizze a kapcsolók beállításait.

MEGJEGYZÉS: Ez a Rövid útmutató a kapcsolók beállításait és a beállításra vonatkozó utasításokat mutatja be, amelyek kizárólag mobilhálózat vagy internetkapcsolat esetén használhatók. Ha standard telefoncsatlakozást használ, a kapcsolódó információkért tekintse meg a Használati útmutató betegei részére című dokumentumot.

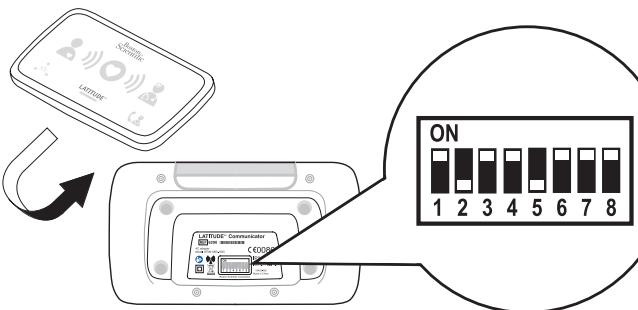

Ellenőrizze a kommunikátor alján található, 1-8 számozású fehér kapcsolókat. Ha egyeznek a fent látható kapcsolóbeállításokkal, nincs további teendője. Ha nem egyeznek, csúsztassa a kapcsolókat lefelé vagy felfelé az ábrának megfelelően.

2 Csatlakoztassa a tápegységet.

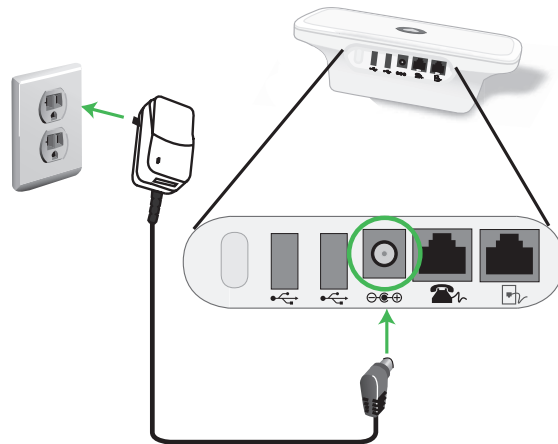

3 Válassza ki az alábbiak közül az egyik csatlakoztatási módszert, amellyel az adatokat elküldi majd az orvosi honlapra.


- A. Mobil **vagy**
- B. Internet

Ezután csatlakoztassa a **kiválasztott** módszer szerinti kábeleket az ábrák szerint.

További részletek itt talál: Használati útmutató betegek részére.

4 Csatlakoztassa a kábeleket az egyik csatlakozási módszer szerint (A vagy B).


A. Mobilcsatlakoztatás USB mobiladapter segítségével

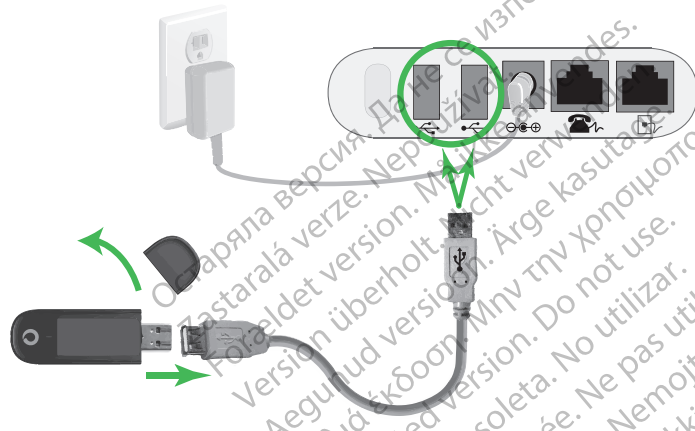

A választott eszköz legyen mindig a kommunikátorhoz csatlakoztatva.

Ez lehetővé teszi, hogy a kommunikátor elküldje a beültetett készülékről gyűjtött adatokat az orvosi honlapra, amelyhez az orvosnak hozzáférése van.

vagy B. internetkapcsolat USB ethernet adapter segítségével

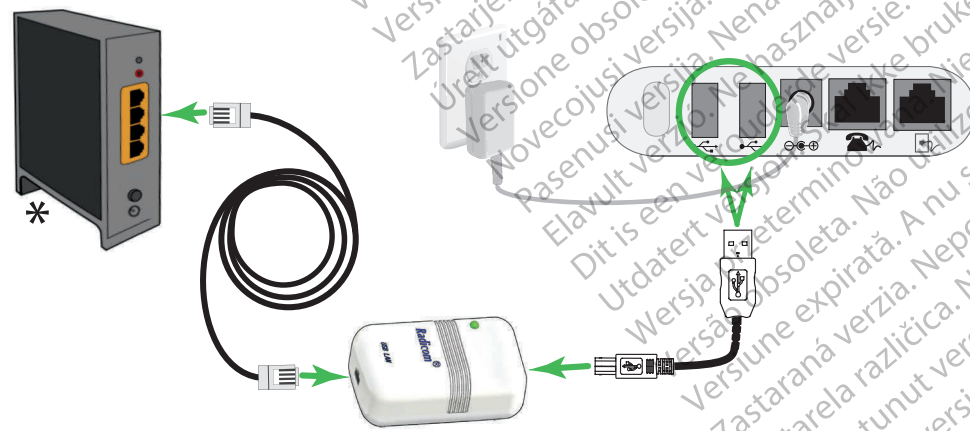

* Internetrouter vagy -modem

5 A beállítási folyamat indításához nyomja meg a villogó, szívet ábrázoló gombot a LATITUDE kommunikátoron.



6 Várjon, amíg az eszköz elküldi az adatokat. Ez eltarthat néhány perccig.

Adatok gyűjtése a beültetett készülékről

Adatok küldése
Ha a szívet ábrázoló gomb újra villog, nyomja meg újra.

7 Várjon, amíg a szoftverfrissítés befejeződik.



Elképzelhető, hogy szoftverfrissítés van folyamatban. Várjon néhány percet, amíg a szívet ábrázoló gomb villogni kezd, majd nyomja meg. Ez több alkalommal is bekövetkezhet. Minden alkalommal nyomja meg a szívet ábrázoló gombot, ha az villog.

8 Sikerült!



Ha a fények a fent látható módon világítanak, a beállítás befejeződött. A fények 2 perc múlva automatikusan kikapcsolnak.

9 Ne szüntesse meg a kommunikátor csatlakozását.



Ez lehetővé teszi, hogy a kommunikátor az orvos által ütemezett időben ellenőrizze a beültetett készülékét.

? További segítségre van szüksége?

Ha megjelenik egy sárga hullám vagy orvost ábrázoló ikon (lásd ennek az útmutatónak a túloldalát), keresse meg a hiba leírását a Használati útmutató betegek részére Hibaelhárítás című részében.

További segítségért forduljon orvosához, vagy hívja a LATITUDE ügyfélszolgálatot a használati útmutatóban található (az Ön országához tartozó) telefonszámon.

A túloldalon hasznos információkat talál.