




RX FIXIERSYSTEM<sup>†</sup>

Der Führungsdraht kann an der richtigen Stelle fixiert werden, um den Zugang aufrecht zu erhalten

- ◆ Erhältlich mit kurzem 260 cm Führungsdraht oder einem Standard-Führungsdraht von 450 cm, um der bevorzugten Arbeitsweise des Arztes gerecht zu werden
- ◆ Der Führungsdraht kann während der Prozedur jederzeit fixiert oder freigegeben werden
- ◆ Der Produktwechsel, die Kontrastmittelinjektion und die Durchführung der Prozedur werden erleichtert
- ◆ RX 39 ist kompatibel mit 0,025" (0,64 mm) Führungsdraht
- ◆ RX 44 und RX 49 sind kompatibel mit 0,035" (0,89 mm) Führungsdraht

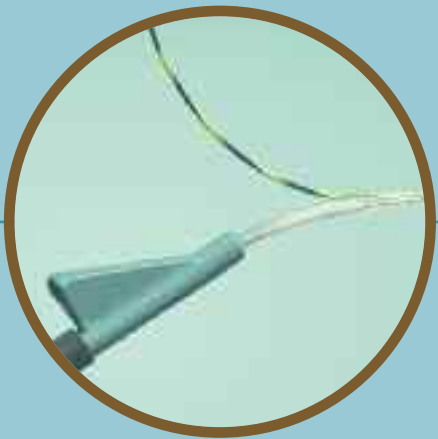

Autotome™ RX

Sondierungspapillotom

AUTOTOME RX SONDIERUNGSPAPILLOTOM\*

Bestellnummer	Beschreibung	Schneidedraht- länge (mm)	Spitzenlänge (mm)	Spitzen-AD (F) (mm)	Empfohlener Führungsdraht
M005 <b>45150</b>	Autotome RX 49	20	5	4,9 1,63	0,035" (0,89 mm) Hydra Jagwire™ Führungsdraht
M005 <b>45160</b>	Autotome RX 49	30	5	4,9 1,63	0,035" (0,89 mm) Hydra Jagwire™ Führungsdraht
M005 <b>45170</b>	Autotome RX 44	20	5	4,4 1,47	0,035" (0,89 mm) Hydra Jagwire™ Führungsdraht
M005 <b>45180</b>	Autotome RX 44	30	5	4,4 1,47	0,035" (0,89 mm) Hydra Jagwire™ Führungsdraht
M005 <b>45190</b>	Autotome RX 39	20	5	3,9 1,30	0,025" (0,64 mm) Jagwire™ Führungsdraht
M005 <b>45200</b>	Autotome RX 39	30	5	3,9 1,30	0,025" (0,64 mm) Jagwire™ Führungsdraht

\*Kompatibel mit Universal-Anschlußkabeln.

**Europäisches Zentrallager – Niederlande**  
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800  
**Europäisches Zentrale – Paris**  
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99  
**Argentinien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 555 2678 F: +5411 4996 8517  
**Australien/Neuseeland**  
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404  
**Belgien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343  
**Brasilien**  
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212  
**Chile**  
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915  
**China – Guangzhou**  
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789  
**China – Peking**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566  
**China – Shanghai**  
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900  
**Dänemark** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05  
**Deutschland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 08000 723300 F: 08000 723319

**Finnland**  
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883  
**Frankreich**  
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01  
**Griechenland**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310  
**Großbritannien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513  
**Hongkong**  
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276  
**Indien – Bangalore**  
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153  
**Indien – Chennai**  
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716  
**Indien – Delhi**  
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808  
**Indien – Mumbai**  
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199  
**Irland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968  
**Italien**  
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200  
**Kanada**  
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396  
**Kolumbien**  
T: +57 1 612 4761 F: +57 1 612 4761

**Korea**  
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776  
**Mexiko**  
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28  
**Mittlerer Osten/arabische Golfstaaten/Nordafrika**  
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445  
**Niederlande**  
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05  
**Norwegen** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 800 104 04 F: 800 101 90  
**Österreich**  
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60  
**Polen**  
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10  
**Portugal**  
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58  
**Schweden**  
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 00  
**Schweiz**  
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01  
**Spanien – Barcelona**  
T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45  
**Spanien – Madrid**  
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03  
**Süd Ost Asien – Malaysia**  
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

**Süd Ost Asien – Philippinen**  
T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047  
**Süd Ost Asien – Singapur**  
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899  
**Süd Ost Asien – Thailand**  
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400  
**Südost Europa**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310  
**Südafrika**  
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077  
**Taiwan**  
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270  
**Tschechische Republik**  
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935  
**Türkei – Istanbul**  
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67  
**Ungarn**  
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41  
**Uruguay**  
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212  
**Venezuela**  
T: +58 212 959 62756 F: +58 212 959 5328

Alle Marken- und Urheberrechte gehören den entsprechenden Rechteinhabern. VORSICHT: Diese Produkte dürfen nur durch oder im Auftrag eines Arztes erworben werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Anleitungen zur Benutzung sind der dem Produkt beigegebenen Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Informationen nur für die Verwendung in Ländern mit gültigen Produktregistrierungen bei den zuständigen Gesundheitsbehörden.  
PSST IC 1827 Gedruckt in UK von Gosling.

Autotome™ RX

Sondierungspapillotom

Boston  
Scientific



RX Biliary System<sup>™</sup>  
A difference  
you can feel.™

Boston  
Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

© 2009 Boston Scientific Corporation oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.  
DINEND2152GA

# RX Biliary System™

A difference you can feel.™

Das Endoskop ist Ihre Grundausrüstung, aber es ist Ihr Gefühl, das Sie zu einer erfolgreichen Prozedur befähigt. Die Produkte des RX Biliary Systems bieten Ihnen durch verbesserte Manipulationsmöglichkeiten perfekte Kontrolle und erleichterten Zugang während der ERCP. Dies ergibt für Sie...*einen Unterschied, den Sie fühlen können.*

Im Laufe der Jahre hat Boston Scientific das Vertrauen und die Treue von Kunden in der ganzen Welt gewonnen, die das RX Biliary System routinemäßig für ihre ERCPs verwenden. Unser langjähriger Erfolg in der Entwicklung von RX biliären Produkten hat es ermöglicht, die Standards von ERCP-Verfahren zu optimieren. Durch die Innovation und Weiterentwicklung von Produkten geben wir Ihnen Kontrolle und Zugang direkt „in die Fingerspitzen“.

## Autotome™ RX Sondierungspapillotom

### FLEXIBLES UND REAKTIVES DESIGN

*Direct Wire Technology™ – entwickelt für Flexibilität und Reaktionsvermögen zur Unterstützung der präzisen Papillotomie*

- ♦ Die Einführung des Katheters wird durch die Spitzenausrichtung und die Positionierfähigkeit des Schneidedrahtes erleichtert
- ♦ Erhältliche verjüngte Spitzengrößen: 3,9 F (1,30 mm), 4,4 F (1,47 mm) und 4,9 F (1,63 mm), die eine Anpassung an unterschiedliche Patientenanatomien ermöglichen
- ♦ 5 cm – 7 cm OTW-Strecke erlaubt den Produktwechsel durch einen einzelnen Anwender
- ♦ Übergangsmöglichkeit von der Over-the-Wire- zur Kurzdraht-ERCP-Technik, ohne dass das Produkt aus dem Endoskop entfernt werden muss

### MERGING LUMEN TECHNOLOGY™

*Bei den RX 39 und RX 44 Papillotomen verbinden sich die proximalen Lumen zu einem einzigen distalen Lumen*

- ♦ Diese Technologie wurde entwickelt, um die Injektion des Kontrastmittels zu erleichtern und gleichzeitig den Führungsdrahtzugang durch die offene Lumentechnologie aufrecht zu erhalten
- ♦ Sie kann helfen, das Risiko einer submukösen Injektion zu reduzieren, indem der Kontrastmittelfluss abgeleitet wird




RX 39



RX 44




RX 49

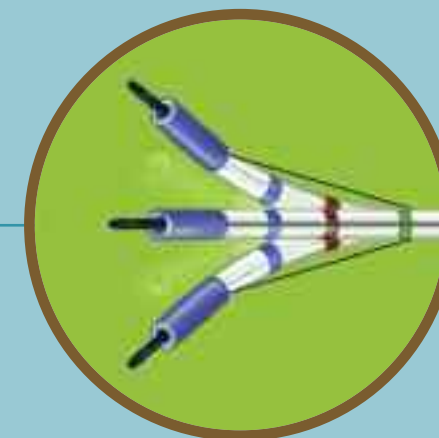

### SPITZENAUSRICHTUNG

*Der ergonomische Drehgriff verfügt über ausgezeichnete Kontrolleigenschaften*

- ♦ Er wurde entwickelt, um die präzise Spitzenbewegung und Drahtmanipulation zu unterstützen und das Einführen des Papillotoms zu erleichtern
- ♦ Die Griffe sind mit einem Label mit dem entsprechenden Außendurchmesser der Spitze versehen\*

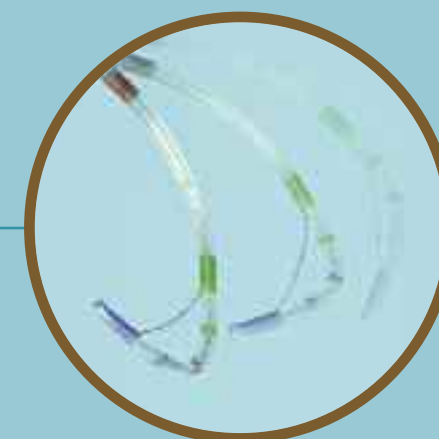

### FLEXCONTROL SYSTEM\*

*Als Unterstützung für eine präzise Papillotomie*

- ♦ Erleichtert den Erhalt der Spitzen-Abwinkelung und dadurch der Schneidedrahtposition