

# Autotome™ RX


Papilótomo de canulação



## DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO RX†

O fio-guia trava no local para manter o acesso

- ◆ Aceita fios-guia curtos, de 260 cm, ou padrão, de 450 cm, adaptando-se às preferências técnicas do médico
- ◆ O fio-guia pode ser travado e destravado a qualquer momento durante o procedimento
- ◆ Facilita a troca de dispositivos, injeção de contraste e terapia biliar
- ◆ Modelo RX 39 compatível com fios-guia de 0,025" (0,64 mm), modelos RX 44 e RX 49 compatíveis com fios-guia de 0,035" (0,89 mm)

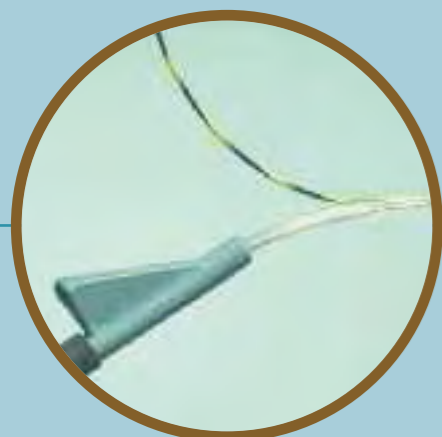

## PAPILÓTOMO DE CANULAÇÃO AUTOTOME RX\*

Nº de ref.	Descrição	Comprimento de Fio de Corte (mm)	Comprimento da ponta (mm)	Diâmetro externo da ponta (F) (mm)		Fio-guia recomendado
M00545150	Autotome RX 49	20	5	4,9	1,63	Fio-Guia Hydra Jagwire™ de 0,035" (0,89mm)
M00545160	Autotome RX 49	30	5	4,9	1,63	Fio-Guia Hydra Jagwire de 0,035" (0,89mm)
M00545170	Autotome RX 44	20	5	4,4	1,47	Fio-Guia Hydra Jagwire de 0,035" (0,89mm)
M00545180	Autotome RX 44	30	5	4,4	1,47	Fio-Guia Hydra Jagwire de 0,035" (0,89mm)
M00545190	Autotome RX 39	20	5	3,9	1,30	Fio-Guia Jagwire™ de 0,025" (0,64mm)
M00545200	Autotome RX 39	30	5	3,9	1,30	Fio-Guia Jagwire de 0,025" (0,64mm)

\* Compatível com cabos ativos universais

**Centro de Distribuição Europeu – Países Baixos**  
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

**Sede na Europa – Paris**  
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

**Alemanha (Ligação gratuita)**  
T: 0800 723300 F: 0800 723319

**Argentina (Ligação gratuita)**  
T: 0800 555 2678 F: +54 11 4896 8517

**Austrália/Nova Zelândia**  
T: +61 2 9333 8100 F: +61 2 9330 1404

**Austria**  
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

**Bélgica (Ligação gratuita)**  
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

**Brasil**  
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

**Canadá**  
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

**Chile**  
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

**China – Pequim**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

**China – Cantão**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 20 8767 9789

**China – Xangai**  
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

**Colômbia**  
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

**Coreia**  
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

**Dinamarca (Ligação gratuita)**  
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

**Espanha – Barcelona**  
T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

**Espanha – Madri**  
T: +34 91 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

**Sudeste da Europa**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Finlândia**  
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

**França**  
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

**Grã Bretanha (Ligação gratuita)**  
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

**Grécia**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Hong Kong**  
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

**Hungria**  
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

**Índia – Bangalore**  
T: +91 80 2212 4929/9 F: +91 80 2207 5153

**Índia – Chennai**  
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

**Índia – Deli**  
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

**Índia – Mumbai**  
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

**Irlanda (Ligação gratuita)**  
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

**Itália**  
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

**Países Baixos**  
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

**México**  
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

**Noruega (Ligação gratuita)**  
T: 800 104 04 F: 800 101 90

**Oriente Médio/Golfo Pérsico/Africa do Norte**  
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

**Polónia**  
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

**Portugal**  
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

**República Checa**  
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

**África do Sul**  
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

**Suécia**  
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

**Suíça**  
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

**Sudeste da Ásia – Filipinas**  
T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

**Sudeste da Ásia – Malásia**  
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

**Sudeste da Ásia – Singapura**  
T: +65 6418 8898 F: +65 6418 8899

**Sudeste da Ásia – Tailândia**  
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

**Taiwan**  
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

**Turquia – Istambul**  
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

**Uruguai**  
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

**Venezuela**  
T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. PRECAUÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso estão indicadas no rótulo do produto, fornecido com cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente.  
PSST IC 1827 Impresso no Reino Unido por Gosling.

# Autotome™ RX

Papilótomo de canulação



Boston Scientific

RX Biliary System™  
A difference you can feel.™

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

© 2009 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. DINEND2152SA

†O dispositivo de travamento RX é vendido separadamente

# RX Biliary System™

A difference you can feel.™

O endoscópio indica o caminho, porém a sensação tátil o conduzirá por onde deverá ir. Os mecanismos que compõem o sistema biliar RX foram desenvolvidos para permitir acesso e oferecer controle, simultaneamente transmitindo uma sensação de confiança no dispositivo. Tudo isso entrega... uma diferença que é possível sentir.

Ao longo do tempo, a Boston Scientific ganhou a confiança e fidelidade de seus clientes em todo o mundo, que optaram por utilizar o sistema biliar RX como seu sistema habitual. Nosso extenso histórico de sucesso no design de dispositivos biliares de alto desempenho nos permitiu mudar as perspectivas dos procedimentos de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Graças à inovação e aperfeiçoamento de nossos produtos, o acesso e controle certos estarão em suas mãos.

# Autotome™ RX

## Papilótomo de canulação

### DESIGN FLEXÍVEL E SENSÍVEL

A tecnologia *Direct Wire Technology™* foi desenvolvida para proporcionar flexibilidade e sensibilidade, para uma esfínterectomia precisa.

- ◆ Capacidade de orientação da ponta e do fio de corte para facilitar a canulação.
- ◆ Variedade de tamanhos de pontas cônicas: pontas de 3,9 F (1,30 mm), 4,4 F (1,47 mm) e 4,9 F (1,63 mm), para adaptação às diferentes anatomias dos pacientes
- ◆ Comprimento de troca de 5 cm – 7 cm para que o controle permaneça apenas com uma pessoa
- ◆ Possibilidade de trocar a técnica de CPRE sobre fio-guia para a técnica de fio-guia curto sem precisar remover os dispositivos do endoscópio

### MERGING LUMEN TECHNOLOGY™

Lúmens proximais se fundem em um único lúmen distal nos papilótomos RX 39 e RX 44

- ◆ Desenvolvida para facilitar a injeção de meio de contraste, ao mesmo tempo em que mantém o acesso, graças à tecnologia de lúmen aberto
- ◆ Pode contribuir para reduzir o risco de injeção submucosa, ao permitir o desvio do fluxo de contraste




RX 39



RX 44




RX 49

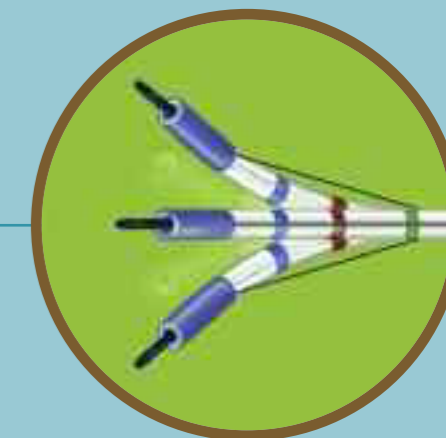

### ORIENTAÇÃO DA PONTA

Manopla ergonômica e giratória criada para obter controle excelente

- ◆ Projetado para mover a ponta e manipular o fio-guia com alta precisão, facilitando a canulação
- ◆ As manoplas estão marcadas com os diâmetros externos das respectivas pontas, para facilitar a seleção\*

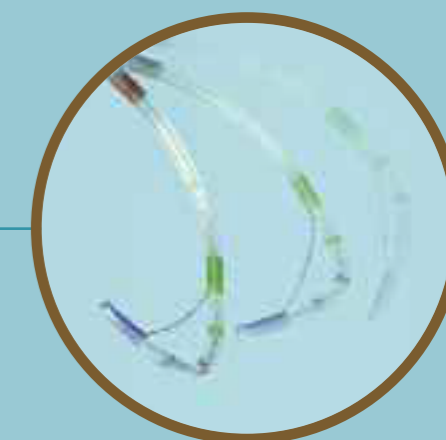

### SISTEMA FLEXCONTROL\*

Desenvolvido para contribuir para uma esfínterectomia precisa

- ◆ Desenvolvido para melhorar a manipulação do fio-guia e controle da curvatura

As ilustrações são exclusivamente para fins informativos e podem não indicar resultados clínicos reais.

\*Somente papilótomos Autotome RX 39 e RX 44