

Kit de Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) Padrão

Kit de PEG Padrão

Número do pedido	Descrição	Unidades
M00568381	Kit de PEG Padrão de 20Fr (6,67mm), Pull	Caixa 2
M00568401	Kit de PEG Padrão de 20Fr (6,67mm), Push	Caixa 2
M00568391	Kit de PEG Padrão de 24Fr (8,00mm), Pull	Caixa 2
M00568411	Kit de PEG Padrão de 24Fr (8,00mm), Push	Caixa 2

Acessórios de PEG

Número do pedido	Descrição	Unidades
M00580641	Adaptador em Y de 20Fr (6,67mm)	Caixa 10
M00580651	Adaptador em Y de 24Fr (8,00mm)	Caixa 10
M00580731	Suportes Redondos de 20Fr (6,67mm)	Caixa 10
M00580781	Clipe C de 20Fr (6,67mm) e 24F (8,00mm)	Caixa 10

Tubo de Alimentação Jejunal Through-The-PEG (TTP)

Tubo de Alimentação Jejunal TTP EndoVive

Número do pedido	Descrição	Estilo da Ponta	Unidades
M00566320	TUBO de Alimentação Jejunal TTP de 8,5 Fr (2,83 mm)	Tipo de curvatura	Caixa 1
M00566330	TUBO de Alimentação Jejunal TTP de 8,5 Fr (2,83 mm)	Ponta Trançada	Caixa 1
M00566340	TUBO de Alimentação Jejunal TTP de 12 Fr (4,00mm)	Tipo de curvatura	Caixa 1
M00566350	TUBO de Alimentação Jejunal TTP de 12 Fr (4,00mm)	Ponta Trançada	Caixa 1

Dispositivo de Ancoragem Recomendado

Número do pedido	Descrição	Comprimento de Trabalho (cm)	Canal de Operação Mínimo (mm)	Abertura do Clipe (mm)	Unidades
M00522610	Clipe Resolution™	235	2,8	11	Unidade
M00522611	Clipe Resolution™	235	2,8	11	Caixa 10
M00522612	Clipe Resolution™	235	2,8	11	Caixa 20

Tubos de Gastrostomia

Tubos de Alimentação de Substituição de Balão de Perfil Padrão

Número do pedido	Descrição	Unidades
M00582040	Tubo G de Substituição de 12Fr (4,00 mm), Reto	Caixa 1
M00582050	Tubo G de Substituição de 14Fr (4,67mm), Reto	Caixa 1
M00582060	Tubo G de Substituição de 16Fr (5,33mm), Reto	Caixa 1
M00582070	Tubo G de Substituição de 18Fr (6,00mm), Reto	Caixa 1
M00582080	Tubo G de Substituição de 20Fr (6,67mm), Reto	Caixa 1
M00582090	Tubo G de Substituição de 22Fr (7,33mm), Reto	Caixa 1
M00582100	Tubo G de Substituição de 24Fr (8,00mm), Reto	Caixa 1
M00582110	Tubo G de Substituição de 28Fr (9,33mm), Reto	Caixa 1
M00582120	Tubo G de Substituição de 12Fr (4,00 mm), Ângulo Reto	Caixa 1
M00582130	Tubo G de Substituição de 14Fr (4,67mm), Ângulo Reto	Caixa 1
M00582140	Tubo G de Substituição de 16Fr (5,33mm), Ângulo Reto	Caixa 1
M00582150	Tubo G de Substituição de 18Fr (6,00mm), Ângulo Reto	Caixa 1
M00582170	Tubo G de Substituição de 22Fr (7,33mm), Ângulo Reto	Caixa 1
M00582161	Tubo G de Substituição de 24Fr (8,00mm), Ângulo Reto	Caixa 1
M00582171	Tubo G de Substituição de 28Fr (9,33mm), Ângulo Reto	Caixa 1

Tubos de Alimentação de Substituição de Botão de Perfil Baixo

Troca de Botão de Perfil Baixo

Número do pedido	Descrição	Comprimento (cm)	Código de Cor	Unidades
M00562760	Troca do Botão de Perfil Baixo de 18 Fr (6,00mm)	1,2	Amarelo	Caixa 1
M00562770	Troca do Botão de Perfil Baixo de 18 Fr (6,00mm)	1,7	Amarelo	Caixa 1
M00562780	Troca do Botão de Perfil Baixo de 18 Fr (6,00mm)	2,4	Amarelo	Caixa 1
M00562790	Troca do Botão de Perfil Baixo de 18 Fr (6,00mm)	3,4	Amarelo	Caixa 1
M00562800	Troca do Botão de Perfil Baixo de 18 Fr (6,00mm)	4,4	Amarelo	Caixa 1
M00562820	Troca do Botão de Perfil Baixo de 24 Fr (8,00mm)	1,7	Azul	Caixa 1
M00562830	Troca do Botão de Perfil Baixo de 24 Fr (8,00mm)	2,4	Azul	Caixa 1
M00562840	Troca do Botão de Perfil Baixo de 24 Fr (8,00mm)	3,4	Azul	Caixa 1
M00562850	Troca do Botão de Perfil Baixo de 24 Fr (8,00mm)	4,4	Azul	Caixa 1
M00568170	Troca do Botão de Perfil Baixo de 28 Fr (9,33mm)	1,5	Verde	Caixa 1
M00568180	Troca do Botão de Perfil Baixo de 28 Fr (9,33mm)	2,8	Verde	Caixa 1
M00568190	Troca do Botão de Perfil Baixo de 28 Fr (9,33mm)	4,3	Verde	Caixa 1

Acessórios para Botão de Perfil Baixo

Número do pedido	Descrição	Comprimento (cm)	Código de Cor	Unidades
M00580401	Tubo de Descompressão de 18Fr (6,00mm)	1,2	Amarelo	Caixa 10
M00580411	Tubo de Descompressão de 18Fr (6,00mm)	1,7	Amarelo	Caixa 10
M00580421	Tubo de Descompressão de 18Fr (6,00mm)	2,4	Amarelo	Caixa 10
M00580431	Tubo de Descompressão de 18Fr (6,00mm)	3,4	Amarelo	Caixa 10
M00580441	Tubo de Descompressão de 18Fr (6,00mm)	4,4	Amarelo	Caixa 10
M00580461	Tubo de Descompressão de 24Fr (8,00mm)	1,7	Azul	Caixa 10
M00580471	Tubo de Descompressão de 24Fr (8,00mm)	2,4	Azul	Caixa 10
M00580481	Tubo de Descompressão de 24Fr (8,00mm)	3,4	Azul	Caixa 10
M00580491	Tubo de Descompressão de 24Fr (8,00mm)	4,4	Azul	Caixa 10
M00580171	Adaptador de Bolus em Linha Reta de 18Fr (6,00mm)		Amarelo	Caixa 10
M00580181	Adaptador de Ângulo Reto Contínuo de 18Fr (6,00mm)		Amarelo	Caixa 10
M00580231	Adaptador de Bolus em Linha Reta de 24Fr (8,00mm)		Azul	Caixa 10
M00580241	Adaptador de Ângulo Reto Contínuo de 24Fr (8,00mm)		Azul	Caixa 10
M00580271	Adaptador de Alimentação de Bolus em Linha Reta de 28Fr (9,33mm)		Verde	Caixa 10
M00580281	Adaptador de Alimentação de Ângulo Reto Contínuo de 28Fr (9,33mm)		Verde	Caixa 10

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso foram fornecidas apenas em países com registros de produtos da autoridade sanitária aplicável.

©2016 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ENDO-301501-AA Fevereiro de 2016.

EndoVive®

Dispositivos para Acesso Enteral



**Boston
Scientific**


Características do Produto

Tubo de PEG de Silicone de Alto Grau com Suporte tipo Domo

- Desenvolvido para desempenho e fluxo consistente
- Remoção por Tração Facilitada
- Dispositivo de remoção universal de 240 cm x D.E. 1,9 mm

Dispositivo de Remoção Universal de 240 cm x D.E. 1,9 mm

- Atravessa endoscópios com canal de trabalho de 2,0 mm ou mais
- Dispositivo de tamanho universal, destinado a eliminar o custo de um dispositivo especializado

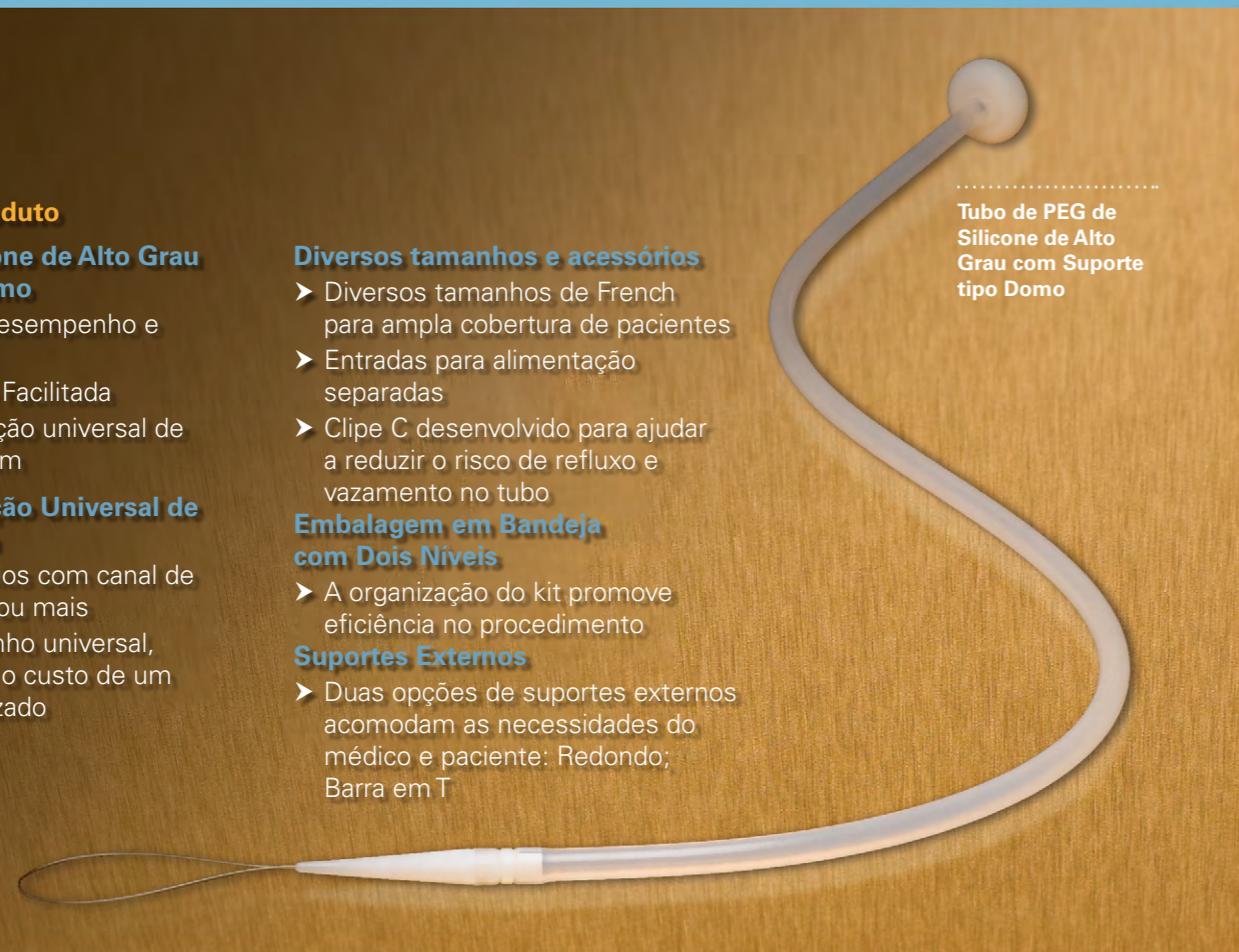

Tubo de Alimentação Jejunal Through-The-PEG (TTP)

Características do Produto

Design Inovador

- Desenvolvido para colocação através de um tubo de PEG Padrão existente
- Tubo-J de TTP de 68 cm de comprimento, 8,5Fr, compatível com PEG de 20 Fr
- Tubo-J de TTP de 68 cm de comprimento, 8,5Fr, compatível com PEG de 24 Fr
- Disponível com Pontas *Pigtail* e Curvada, cada uma com um laço de sutura para facilitar a ancoragem da ponta distal após o Ligamento de Treitz
- Compatível tanto com as Duas Técnicas de Colocação *Push* e *Pull* (*over-the-wire*)

Material Flexima

- O material radiopaco facilita a visualização em fluoroscopia

Temp Tip

- Ponta Cônica temporária projetada para fornecer percurso suave até o jejunum para ajudar a assegurar a colocação correta
- A Temp Tip foi projetada para dissolver com a temperatura corporal, permitindo a utilização de todo o diâmetro da ponta distal no lúmen, o que pode ajudar a reduzir a obstrução prematura do tubo

Estilete de Endurecimento Oco

- Oferece rigidez adicional, destinada a melhorar a capacidade de empurra e permitir maior controle do médico durante a colocação

Dispositivo de Ancoragem Recomendado

- Clipe Resolution™



Características do Produto

Balão em Formato de "Panqueca"

- Desenvolvido para oferecer características de deflação de balão para inserção e remoção que podem ser mais confortáveis ao paciente.
- Insuflação de Balão Consistente de 6 ml para todos os tamanhos

Gastrostomia de Perfil Padrão com Suporte Externo Angulado Direito Opcional

- Projetado para minimizar a possível distorção do tubo na inserção
- Projetado para minimizar a remoção prematura devido à forma do tubo
- Projetado para minimizar a probabilidade de o adaptador em Y e o adaptador do tubo de alimentação se soltarem e derramarem o conteúdo da bolsa de nutrição
- Medicamentos separados e entradas para alimentação
- Eixo transparente para visualização do lúmen interno



Trocá de Botão de Perfil Baixo

CONTEÚDO DOS KITS

- Kit de Botão
- Dispositivo de Medição de Estoma Percutâneo (PSDM)
- Pacote com uma Variedade de Discos Espaçadores
- Tubo de Descompressão de Ângulo Reto
- Kit de Cuidados com o Paciente



Características do Produto

Substituição de Perfil Baixo com Suporte tipo Botão de Silicone de Alto Grau

- Silicone radiopaco projetado para aprimorar a confirmação da colocação
- Inserido através de trato de estoma existente
- O perfil baixo ajuda a reduzir o risco de remoção acidental
- Flexibilidade do produto na pele desenvolvida para dar mais conforto ao paciente e maior apelo cosmético
- Projetado para reduzir o refluxo gástrico
- O kit inclui acessórios desenvolvidos para permitir a descompressão gástrica
- Tamanhos de French codificados por cor, com acessórios de alimentação correspondentes de diversos comprimentos para ampla cobertura de pacientes
- Espaçadores redondos especialmente projetados para acomodar tamanhos "intermediários" e aumento de peso em curtos períodos