


# Escova de Citologia RX

Escova de Citologia Orientada por Fio

Boston  
Scientific

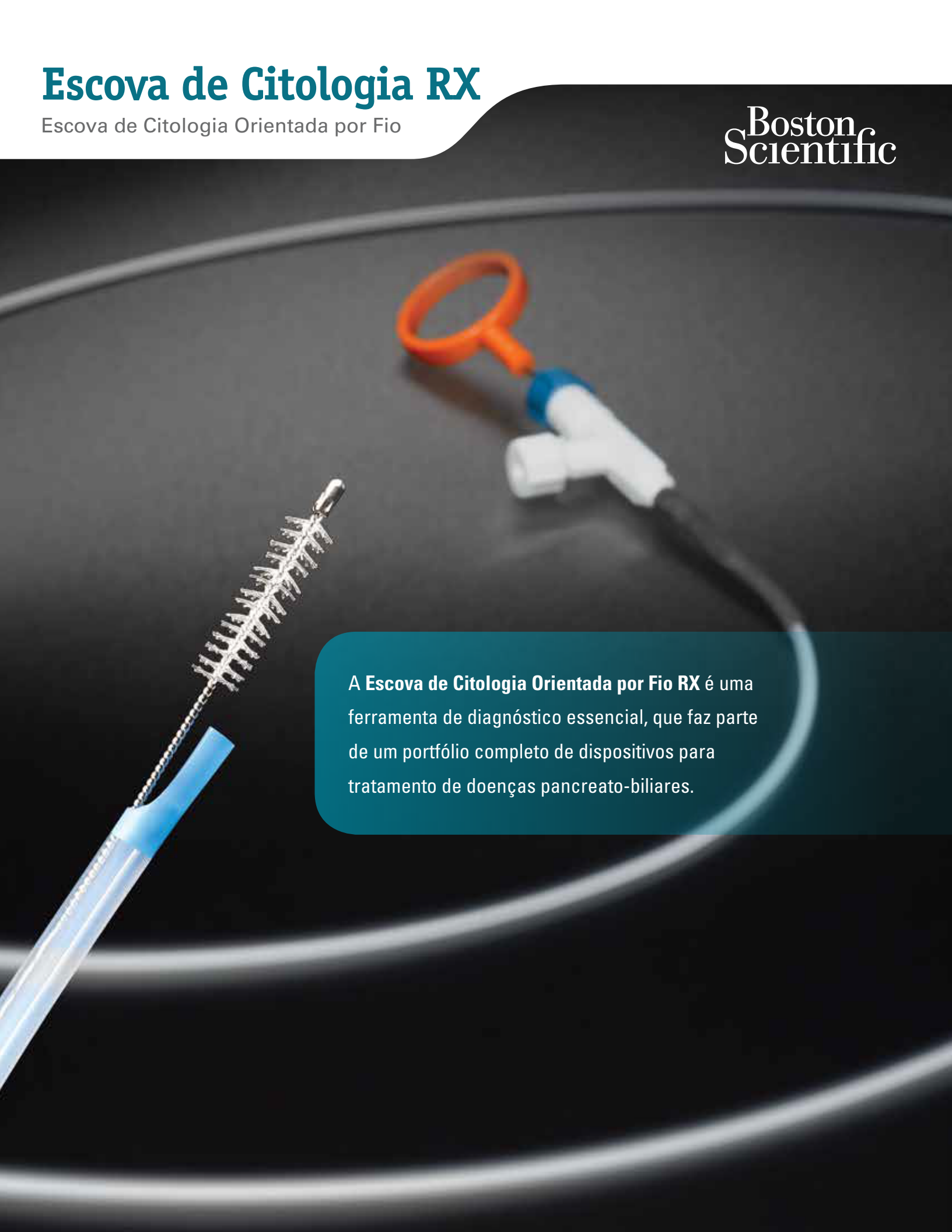

A Escova de Citologia Orientada por Fio RX é uma ferramenta de diagnóstico essencial, que faz parte de um portfólio completo de dispositivos para tratamento de doenças pancreato-biliares.

# Escova de Citologia RX


Escova de Citologia Orientada por Fio



*A Escova de Citologia Orientada por Fio RX é um cateter duplo lúmen orientado por fio para a coleta de células e detecção de neoplasias malignas no ducto biliar.*

## CARACTERÍSTICAS DO DISPOSITIVO

- A manopla possui um tubo de metal reforçado para acionamento confiável.
- O marcador distal radiopaco auxilia na visualização do cateter em fluoroscopia, para posicionamento correto.
- O canal aberto permite a troca rápida do fio-guia.

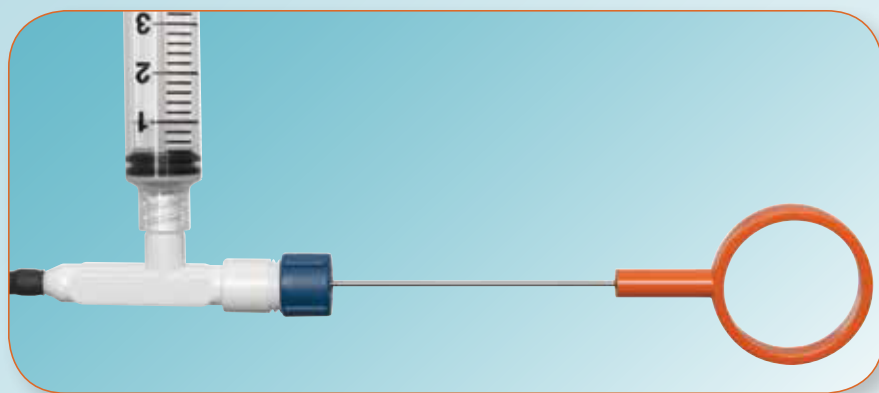

O lúmen da escova pode ser utilizado para injetar contraste pelo luer proximal.

## INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Número do Pedido	Descrição do Produto	Largura da Escova (mm)	D.E. do Cateter (F)	Comprimento de Trabalho (cm)	Fio-Guia Recomendado (pol.)	Unidades
M00545000	Escova de Citologia RX	2,1	8	200	0,035	Unidade

**Boston Scientific**

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752-1234  
www.bostonscientific.com/endo-resources

**Informações para pedidos  
1.888.272.1001**

©2014 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ENDO-253201-AA Julho de 2014.

As Indicações, Contraindicações, Avisos e Instruções de Uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo.

**Atenção: A Legislação Federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por médicos ou sob receita médica.**

**ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica.**