

# Upsylon™ Y-Mesh e Colpassist™ Dispositivo de Posicionamento Vaginal

## Upsylon Y-Mesh

A Malha em Y Upsylon [Y-Mesh] é **leve**, com uma tecnologia de baixa área de superfície que minimiza o contato da malha com a parede vaginal. As características de manuseio da malha, poros largos e cor azul são projetadas para fácil **posicionamento** e **fixação** para auxiliar a colocação.



# Upsylon


### Método e Força da Perna de Fixação

Comparação com a Malha em Y Restorelle e teste padrão de nó de sutura 13.

Força de Fixação da Malha (Média)	
Upsylon™ Y-Mesh n=30	<b>23,2 lbs</b>
Restorelle™ Y Mesh n=9	16,5 lbs

Dados dos arquivos da Boston Scientific  
Resultados com base em testes de bancada.  
Os testes de bancada podem não ser, necessariamente, um indicativo do desempenho clínico.

Projetado para *força* com sutura amarrada em 13 pontos.

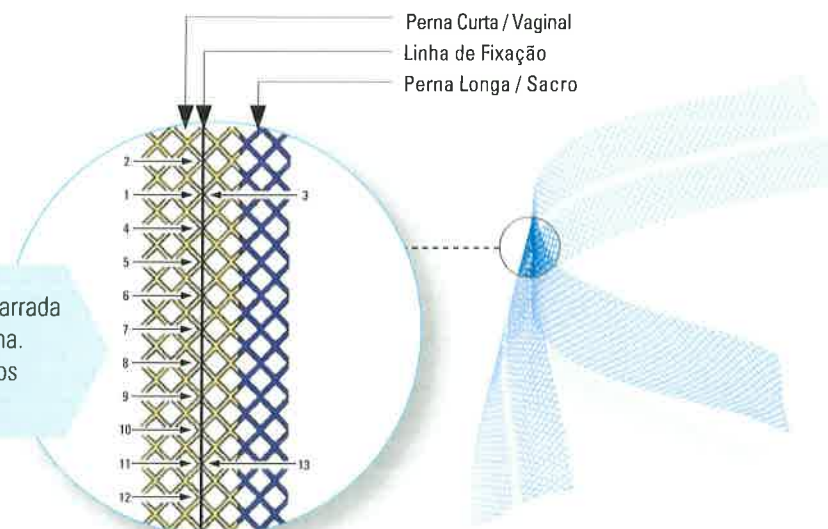

A sutura da perna de fixação é amarrada em 11 localizações em toda a malha. Além disso, há dois pontos traseiros para um total de 13 pontos.

É *mais que* uma malha leve,  
É de fácil posicionamento e fixação.

- Características da Malha projetadas para fornecer estabilidade para o posicionamento e fixação
- Cor azul projetada para fornecer melhor visualização da malha diante do tecido



		Upsylon™ Malha em Y (BSC)	Restorelle™ Malha em Y	Alyte™ Enxerto de Malha em Y (Sacral)	Alyte Enxerto de Malha em Y (Vaginal)	Artisyn™ Malha em forma de Y	IntePro™ Enxerto em Y
Básico	Peso da Malha (g/m²)	<b>25</b>	20	33,5	16,5	28'	52
	Tamanho do Poro (mm²)	<b>2,8</b>	3,0	2,9***	2,9***	3,9**	Maior: 6,9*** Menor: 3,4***
Área de Baixa Superfície	Diâmetro da Fibra (microns)	<b>100</b>	75	90	90	100	100
	Comprimento da Fibra (cm/cm²)	<b>35,4</b>	48,7	58,5	28,8	39,6	73,6
	Razão da Área de Superfície	<b>1,11</b>	1,17	1,65	,81	1,24'	2,31
Manuseio de Malha	Espessura (microns)	<b>200</b>	305	377	287	533	527
	Maleabilidade (Padrão ASTM D-4032) Rigidez (N)	<b>0,53</b>	0,11	Not Tested	0,15	0,71**	Not Tested
	Sutura Extraível (Direção de Extrusão) Força(N)	<b>18,3</b>	11,5	18,3	8,8	13,5	23,3
Cor	Cor da Malha	<b>Blue w/ Natural CenterStripe</b>	Natural	Natural com Listras Azuis	Natural com Listras Azuis	Natural com Listras Azuis	Natural

Dados dos arquivos da Boston Scientific  
Resultados com base em testes de bancada.  
Os testes de bancada podem não ser necessariamente um indicativo do desempenho clínico.

\* Após absorção \*\* Pré-absorção \*\*\* Incluindo Fibra Transversal

### Características de Manuseio<sup>1</sup>





## Colpassist™ Dispositivo de Posicionamento Vaginal

O Dispositivo de Posicionamento Vaginal Colpassist é o primeiro dispositivo projetado especificamente para o posicionamento vaginal em procedimentos ginecológicos e como uma plataforma de sutura para fixação da parede vaginal durante sacrocolpopexia.

- Dois tamanhos e opções criam uma superfície plana de sutura
- Manipulação vaginal multidirecional durante a dissecação e colocação de malha



**Figura 1:** Imagem de dissecação posterior realizada com Colpassist Dispositivo de Posicionamento Vaginal fornecendo o posicionamento.



## Upsylon™ Y-Mesh e Colpassist™ Dispositivo de Posicionamento Vaginal

Boston Scientific



É mais que uma malha leve,  
É de fácil posicionamento e fixação.

### Upsylon™ Y-Mesh e Colpassist Dispositivo de Posicionamento Vaginal

Número da Ordem	Descrição	Unidade
M0068318200	Upsylon Malha em Y	Cada
M0068318210	Colpassist Dispositivo de Posicionamento Vaginal	Cada
M0068318220	Upsylon Y-Mesh e Colpassist Kit Dispositivo de Posicionamento Vaginal	Cada

1 Teste de sutura extraível pelo ASTM D882 na direção transversal da malha. Maleabilidade / rigidez medidas utilizando uma versão modificada do ASTM D4032 (uma única camada de malha de 50mm x 90mm). Os tamanhos das amostras variam de 1-5 para malhas de produtos não-BSC versus 20 ou mais amostras testadas para malha da BSC. As médias registradas em várias amostras foram medidas.

Resultados com base em testes de bancada. Testes de bancada podem não ser necessariamente um indicativo do desempenho clínico. Upsylon e Colpassist são marcas comerciais não registradas da Boston Scientific Corporation ou de suas afiliadas. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

**Para Upsylon Malha em Y: CUIDADO:** A Lei Federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ou mediante a prescrição de um médico treinado na realização de procedimentos de malha para correção cirúrgica de prolapso genital.

**Para Colpassist Dispositivo de Posicionamento Vaginal: CUIDADO:** A Lei Federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ou mediante a prescrição de um médico.

Por favor, consulte o folheto da embalagem fornecida com estes produtos para Indicações completas de Utilização, Contraindicações, Advertências, Precauções, Eventos Adversos e Instruções antes de usar esses produtos.

Boston Scientific  
Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation  
One Boston Scientific Place  
Natick, MA 01760-1537  
www.bostonscientific.com/gynecology

**Informações sobre pedidos**  
**1.888.272.1001**

© 2013 Boston Scientific Corporation  
ou suas afiliadas.  
Todos os direitos reservados.

WH-155601BP-AA 100 5/13

Always there.  
Dedicated to Women's Health