


AMS Ambicor™

Prótese Peniana Inflável

Prótese peniana inflável de duas peças

A prótese AMS Ambicor apresenta um índice geral de satisfação do paciente e parceiros de 96% e 91%, respectivamente¹

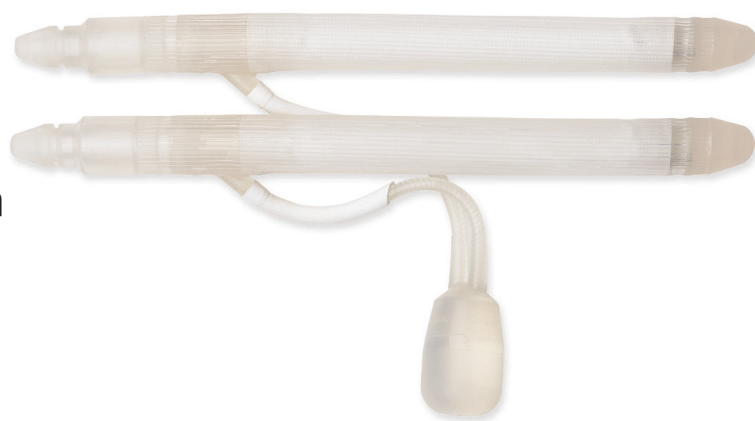

Sobre o dispositivo

- ▶ Cilindro de alta pressão projetado para proporcionar suporte aos pacientes com disfunção erétil (DE), com DE e Doença de Peyronie¹
- ▶ O projeto de duas peças é mais fácil de ser colocado cirurgicamente que uma prótese peniana inflável de três peças
 - ▶▶ Sem reservatório separado
 - ▶▶ Implante pré-preenchido e pré-conectado
- ▶ **Diâmetro:** 12,5 mm, 14 mm, 15,5 mm
- ▶ **Comprimento:** 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm ou 22 cm
- ▶ RTEs empilháveis e ajustáveis (snap-fit) para um encaixe seguro
- ▶ Mais facilidade para inflar os cilindros²
- ▶ Alto índice de satisfação do paciente e dos parceiros¹
- ▶ Deflação de dobra em uma só etapa
- ▶ **Extensores de Extremidade Posterior (RTEs - Rear Tip Extenders) Ajustáveis (Snap-fit):** acrescenta 0,5 a 7,5 cm (excluindo 7,0 cm) de comprimento à extremidade do cilindro proximal, em incrementos de 0,5 cm para ajustes customizados


Informações importantes de segurança³

- ▶ Não se destina a uso por pacientes com infecções urogenitais ou infecções ativas de pele em regiões de cirurgia
- ▶ Impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como outras opções de tratamento intervencionista
- ▶ Pode resultar em encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis
- ▶ Pacientes com diabetes, lesões na medula espinhal ou feridas abertas podem ter um aumento no risco de infecções associadas à prótese

AMS
MEN'S HEALTH


Especificações dimensionais

Diâmetro do cilindro	Comprimento do cilindro	Número do produto
12,5 mm	14 cm	72401450
12,5 mm	16 cm	72401451
12,5 mm	18 cm	72401452
14 mm	16 cm	72401453
14 mm	18 cm	72401454
14 mm	20 cm	72401455
15,5 mm	18 cm	72401456
15,5 mm	20 cm	72401457
15,5 mm	22 cm	72401458
Pacote de RTE Snap-Fit		72402890

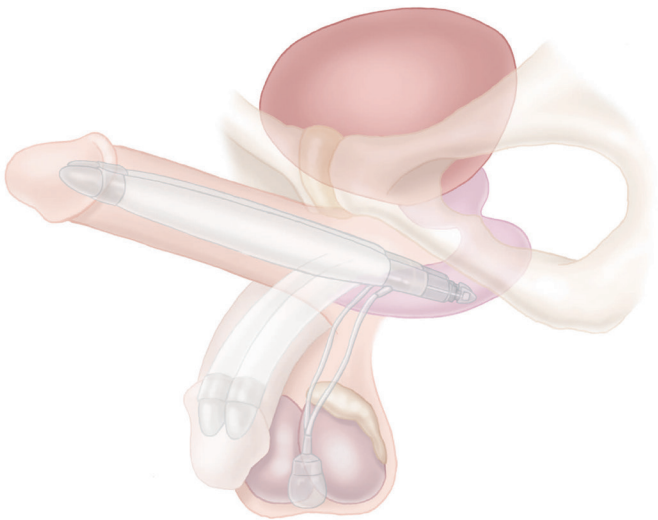

AMS Ambicor™ Prótese Peniana Inflável é altamente recomendada¹

n=131

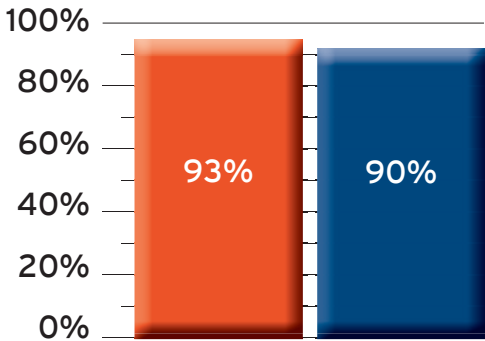

93% dos pacientes
recomendariam a outros
n=131

90% dos parceiros
recomendariam a outros
casais em situações similares
n=131

1. Levine LA, Estrada CR, Morgentaler A. Mechanical reliability and safety of, and patient satisfaction with the Ambicor inflatable penile prosthesis: results of a 2 center study. J Urol. 2001 Set;166(3):932-7.
2. Manual do Centro Cirúrgico para a Prótese Peniana Inflável AMS Ambicor™, American Medical Systems, Inc. 2013.
3. Instruções de Uso da Prótese Peniana Inflável AMS Ambicor™, American Medical Systems, Inc. 2013.

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.

Atenção: A lei restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.

Antes do uso, favor revisar as Instruções de Uso para obter uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências, precauções e possíveis eventos adversos.

Indicações de Uso: A Prótese Peniana AMS Ambicor™ destina-se a uso no tratamento de disfunções erétil masculina crônica ou orgânica (impotência).

Contraindicações: Pacientes com infecções urogenitais ativas ou infecções ativas na pele na região de cirurgia.

Advertências: O implante do dispositivo impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como opções de tratamentos intervencionistas. Homens com diabetes, lesões na medula espinal ou feridas abertas podem ter um aumento no risco de infecção associada ao implante de uma prótese. Uma falha em avaliar e prontamente tratar erosão pode resultar em uma piora significativa da condição médica, levando a infecção e perda de tecido. O implante pode resultar em um encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis. Cicatrizes ou contratura abdominal ou peniana pré-existentes podem tornar o implante cirúrgico mais complicado ou impraticável.

Precauções: Pode ocorrer a migração dos componentes do dispositivo se os cilindros forem de tamanhos inadequados, se a bomba ou o reservatório não forem posicionados de forma apropriada ou se os comprimentos dos tubos forem incorretos.

Possíveis Eventos Adversos: Podem incluir mau funcionamento/falha do dispositivo levando à necessidade de cirurgia adicional, e migração do dispositivo levando, possivelmente, à exposição através do tecido, erosão do dispositivo/tecido, infecção, inflação não prevista do dispositivo e dor/machucado.

AMS
MEN'S HEALTH

Fabricado pela AMS, uma subsidiária integral da Boston Scientific
300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752
www.amsmenshealth.com

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. © 2016 Boston Scientific ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. MH-394221-AA DEC 2016