


HANAROSTENT® Naturfit™ Colon 9F Flare


HANAROSTENT® Naturfit™ 大腸用ステントに
Flareタイプが登場

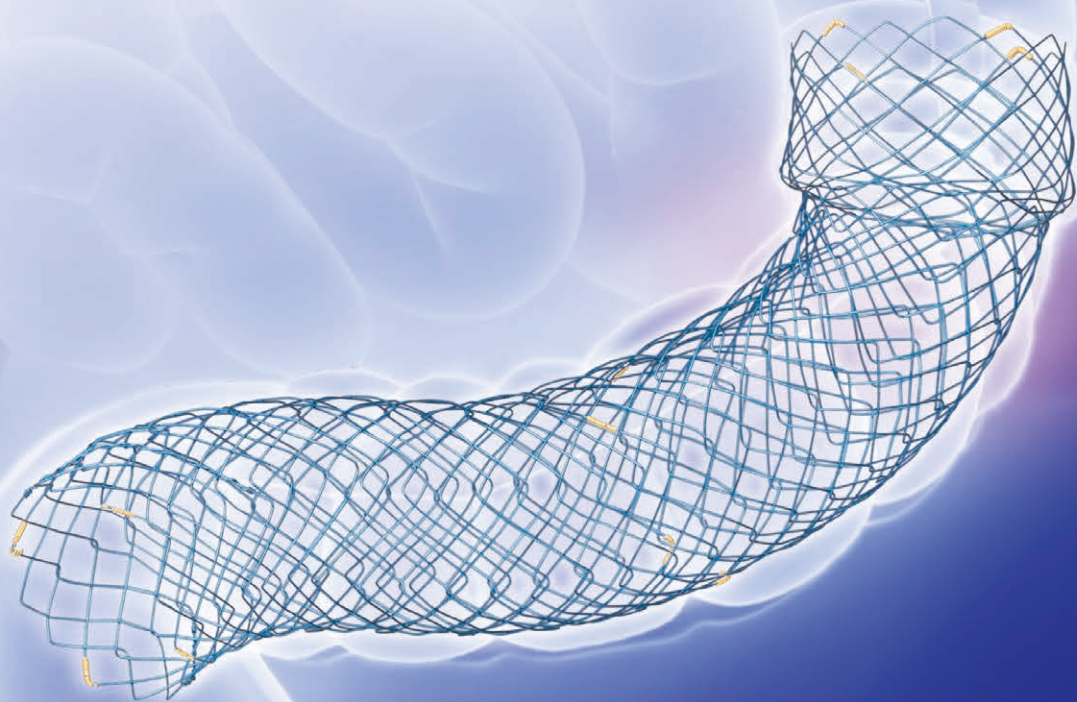

HANAROSTENT® Naturfit™ Colon 9F Flare




断端フレアによりMigrationのリスク低減が期待できます

口側にフレア部分（長さ15mm）を設けることにより、管腔内での引き抜き抵抗が増すため、蠕動運動によるMigrationを防ぐことが期待できます。

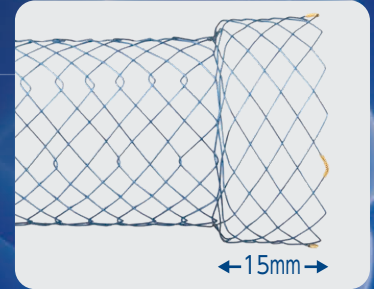

Naturfitの基本性能+より留置しやすいステントへ

Naturfitが持つ、視認性・柔軟性・再収納機能に加え、1周のバンド数増加（12本→14本）クロス比率増加（2本→8本）により、デリバリー時のリリース抵抗低減、ステント縦方向への伸縮低減が期待できます。

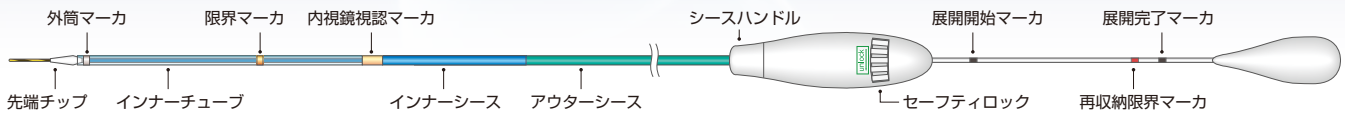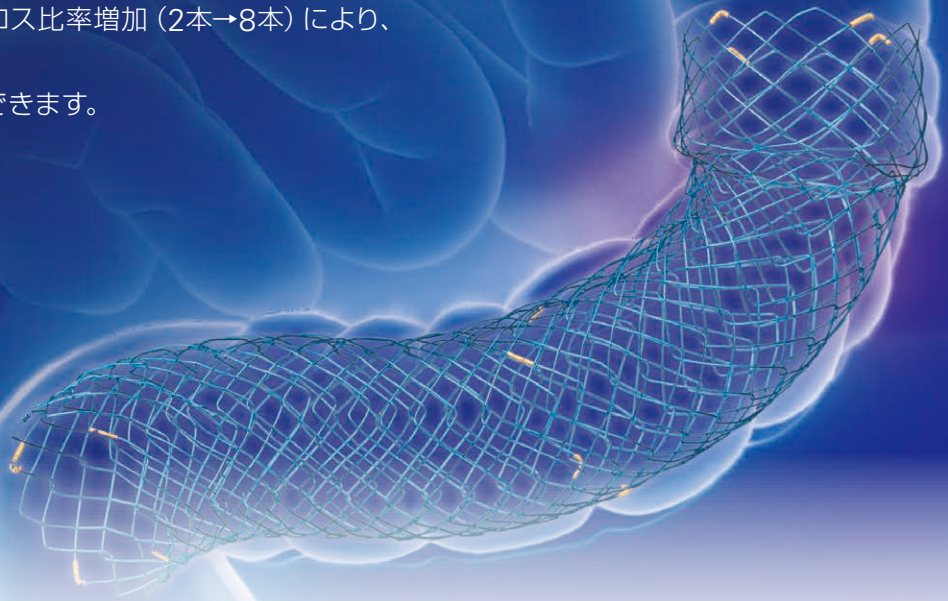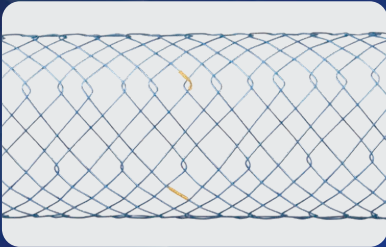

カタログ番号	ステント			デリバリーシステム		ガイドワイヤ (inches)
	外径(mm)	フレア部外径(mm)	全長(cm)	外径(F)	有効長(cm)	
M00526100	22	27	6	9	230	0.035
M00526110	22	27	9	9	230	0.035
M00526120	22	27	12	9	230	0.035

径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT Naturfit 大腸用
 医療機器承認番号：22900BZ100018000
 外国特例承認取得者：M.I.TechCo.,Ltd.
 選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
 ©2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
 All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
 Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
 本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1139401-AB