

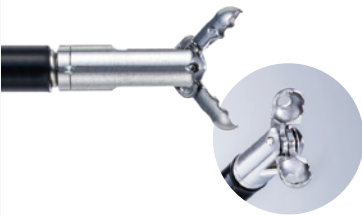


Rotabite ロータバイト 高周波止血鉗子

タイプ	Type Gastric	Type Upper	Type Lower
先端形状			
開き幅	5.4mm	6.0mm	4.0mm
シース外径	2.4mm	2.4mm	2.4mm
最小適合鉗子口径	2.8mm	2.8mm	2.8mm
有効長	168cm	168cm	198cm

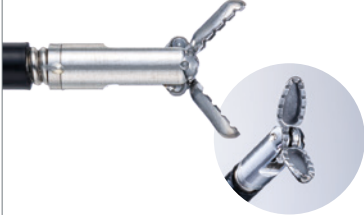


Rotabite
ロータバイト 高周波止血鉗子

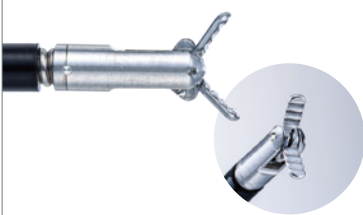

Type Gastric



Type Upper

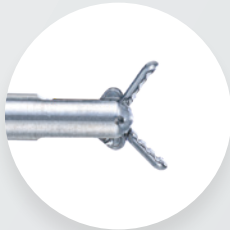

Type Lower

製品情報については、
ホームページからご覧いただけます。



販売名:ロータバイト高周波止血鉗子
医療機器認証番号:306AFBZX00045000
製造販売業者:吉川化成株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston
Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp


ENDO-2334304-AA

出血点への迅速なアプローチにより、 止血処置における手技のストレス軽減・処置時間短縮を目指しました

1 編み込みトルクワイヤー機構

良好な先端部回転性能による
出血点へのスムーズなアプローチ

〈シース断面図〉


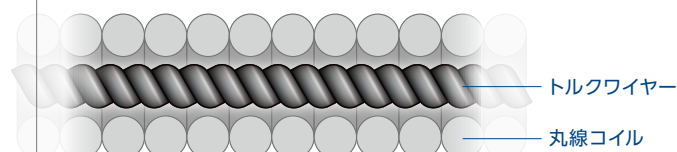


2 剛性の最適化を図った細径シース

スムーズなデバイス挿入と
内視鏡吸引性能の両立を追求


3 出血部位の確実な把持を意図した 3種のカップ形状

掴み直し回数を低減し、処置時間の短縮をサポート

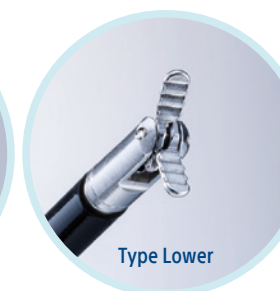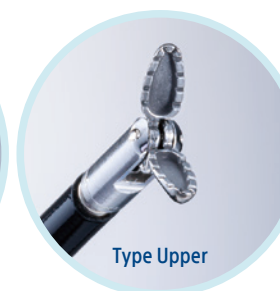

4 突出の少ないカップ開閉機構

止血時の良好な視野とスムーズな近接操作

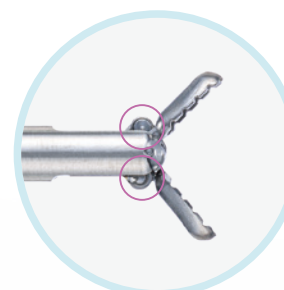

Rotation × Bite
Rotabite