

Scivita Medical Full Imaging System

Full HD Endoscopic Image Processor

	<table><tr><td>モデル</td><td>HDVS-S200D</td></tr><tr><td>サイズ(mm)</td><td>320(W)×231(D)×77(H)</td></tr><tr><td>重量(kg)</td><td>約3.0</td></tr><tr><td>出力インターフェース</td><td>(DVI×1, SDI×2)</td></tr><tr><td>記録インターフェース</td><td>USB×1</td></tr><tr><td>搭載機能</td><td>White balance, freeze, zoom, LED intensity, photo, video, USB recording, electronic endoscope port</td></tr></table>	モデル	HDVS-S200D	サイズ(mm)	320(W)×231(D)×77(H)	重量(kg)	約3.0	出力インターフェース	(DVI×1, SDI×2)	記録インターフェース	USB×1	搭載機能	White balance, freeze, zoom, LED intensity, photo, video, USB recording, electronic endoscope port
モデル	HDVS-S200D												
サイズ(mm)	320(W)×231(D)×77(H)												
重量(kg)	約3.0												
出力インターフェース	(DVI×1, SDI×2)												
記録インターフェース	USB×1												
搭載機能	White balance, freeze, zoom, LED intensity, photo, video, USB recording, electronic endoscope port												


Single-use video cholangioscope

モデル	SCV-P-01G	SCV-P-02G
外径(mm)	3.70 (11F)	2.95 (9F)
鉗子口径(mm)	2.00	1.20
有効長(mm)		2200
屈曲角度		4方向>50°
視野角		120°
被写界深度(mm)		2-50


スコープ先端 サイズ比較

*等倍拡大した図となっております。

Scivita Disposable Imaging Catheter

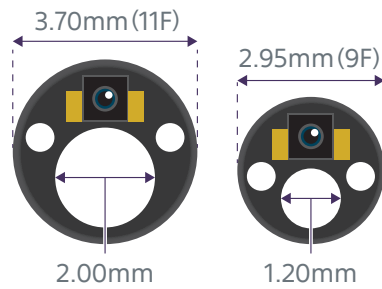

SpyScope™ DS II

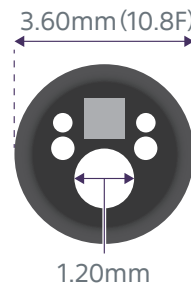

Scivita Medicalは2016年に侵襲性の低い診断や治療をコンセプトとした、内視鏡領域に関わるデバイスを開発する会社として設立されました。R&Dセンターは中国と日本に拠点を置いています。
Boston Scientificは、革新的な医療機器ソリューションが提供できるScivita Medicalと協業することで、日本の患者さんにより良い治療を提供していきます。

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：サイビタ フル HD イメージングシステム
医療機器届出番号：13B1X00043000096
製造販売業者：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

販売名：スパイグラスデジタル内視鏡
医療機器認証番号：227ABBZX00066000
製造販売業者：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

販売名：クラリトロン シングルユース 経口胆道ビデオスコープ
医療機器認証番号：306AFBZI00096000
外国特許承認取得者：Scivita Medical Technology Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.



ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-2203412-AB

Scivita Medical Full Imaging System

細径、鮮明、そしてコントロール自在
ニーズに応じた2種のScope
観察から処置まで、よりスムーズに

- ✓ High definition resolution
- ✓ Multifunctional use



Full HD Endoscopic Image Processor

LED adjustment


3段階 (Low, Medium, High) で明るさの調節が可能です。

Freeze

映像を高画質でキャプチャ保存できます。

Zoom

2段階のズーム機能 (1.2倍、1.5倍) を搭載しています。

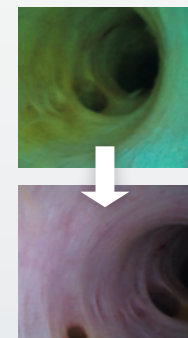

White balance

ホワイトバランスを調整します。

Photo

撮影画像を記録します*。

Video

撮影動画を記録します*。

USB connector

撮影した画像・動画をUSBに保存が可能です*。



*本体にキャプチャ画像及び動画は保存されません

Disposable Imaging Catheter



握りやすいハンドルデザイン

凹凸を減らし、より内視鏡に近いハンドルをデザイン。ロックをかけたままの操作も可能 (ハーフロック)。

*専用バンド付属、シングルオペレーター対応

フレキシブルな先端アングル

ハンドルおよびスコープの設計により、4方向のアングルで優れた操作性を実現し、直感的操作でスムーズな手技に貢献。

2つのサイズラインナップ

9Fと11Fのスコープサイズで、より幅広い症例での使用が可能。

