

WallFlex™ Biliary Transhepatic Stent

ウォールフレックス 経皮経肝用 胆道ステント


**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



Open to the
Possibilities.™

WallFlex™ Biliary Transhepatic Stent

ウォールフレックス 経皮経肝用 胆道ステント

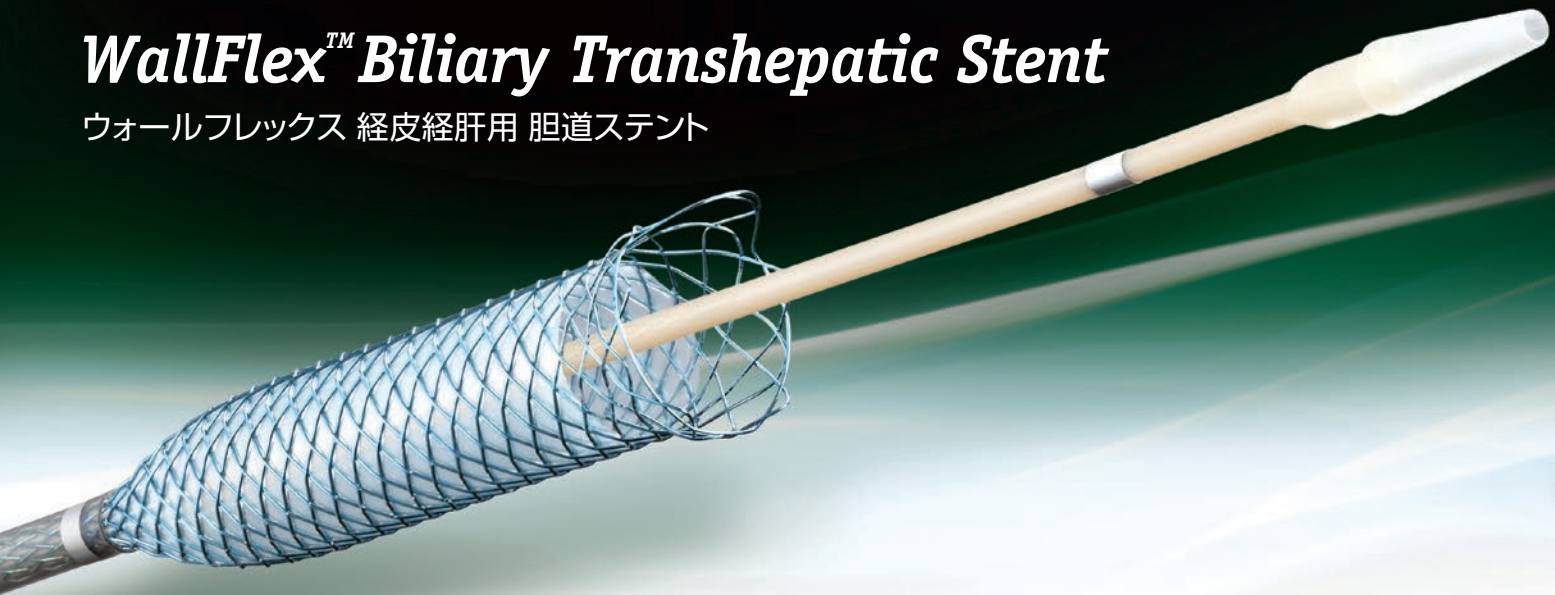

優れた拡張力と柔軟性を発揮するPlatinol™ 構造

- 透視下での視認性に優れたプラチナコアとフレキシブルなナイチノールワイヤで構成される独自の「Platinol™」構造は、適切な拡張力を維持しながら胆管にしっかり追従します。

マイグレーションのリスクを低減する安心のフレア形状

- ステント両端はマイグレーションのリスクを低減し、ステントをしっかりと固定するフレア形状。
- フレア部分は適度な拡張力で組織に対して過度の圧力を加えません。

独自開発の特殊シリコンPermalume™ カバー

- 柔軟性と耐久性を備えた独自のPermalume™ カバーは、ステント内腔の開口径を最大限に確保し、ステント開存期間の延長に寄与します。
- ステントの内側に密着させたカバーは、屈曲時にも皺が寄りにくく、リインターベンションの際にもカテーテルの挿入がスムーズに行えます。


ウォールフレックス 経皮経肝用 胆道ステント

カタログ番号	ステント			カテーテル		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径 (mm)	ステント長 (cm)	カバー長 (cm)	外径 (Fr)	有効長 (cm)	
7470	8	6	5	8.5	75	MAX. 0.035
7471	8	8	7	8.5	75	MAX. 0.035
7472	10	4	3	8.5	75	MAX. 0.035
7473	10	6	5	8.5	75	MAX. 0.035
7474	10	8	7	8.5	75	MAX. 0.035

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：ウォールフレックスピリアリー パーシャルカバード ステント(経皮)
医療機器承認番号：22500BZX00356000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

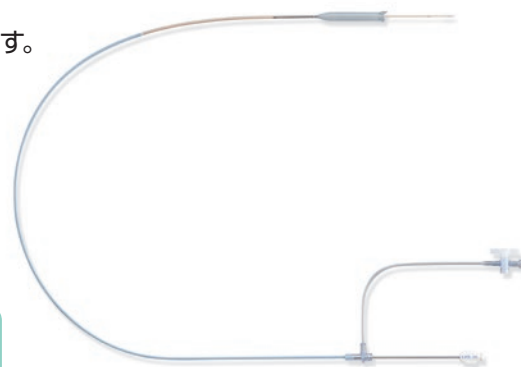

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1609-31606-B-ODP / PSST20160912-0985