

Virtus™
2-Marker Microcatheter

先端部外径：2.1F

X線不透過マーカ
(マーカ間3cm)

有効長：130cm, 150cm

手元部外径：2.8F

ストレインリリーフ

ハブ

- 内腔：0.022 inch
- 先端開放時最大注入耐圧：1200 psi(8.27×10⁶Pa)
- 先端形状：ストレート

Virtus

カタログ番号	品 名	先端部外径 / 内径 (F/inches)	有効長 (cm)	マーカ数
18-466	Virtus/022/2.1/2.8/2RO/130	2.1/0.022	130	2
18-467	Virtus/022/2.1/2.8/2RO/150	2.1/0.022	150	2

※径表示換算目安：1 mm=3 French=0.0394 inches

Virtus™
販売名：マイクロカテーテル
医療機器承認番号：21600BZZ00575000
製造販売業者：川澄化学工業株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.




販売業者：
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

製造販売業者：
川澄化学工業株式会社
本社 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟9階

1608-81134-5／PSST20160803-0827

Virtus™
2-Marker Microcatheter

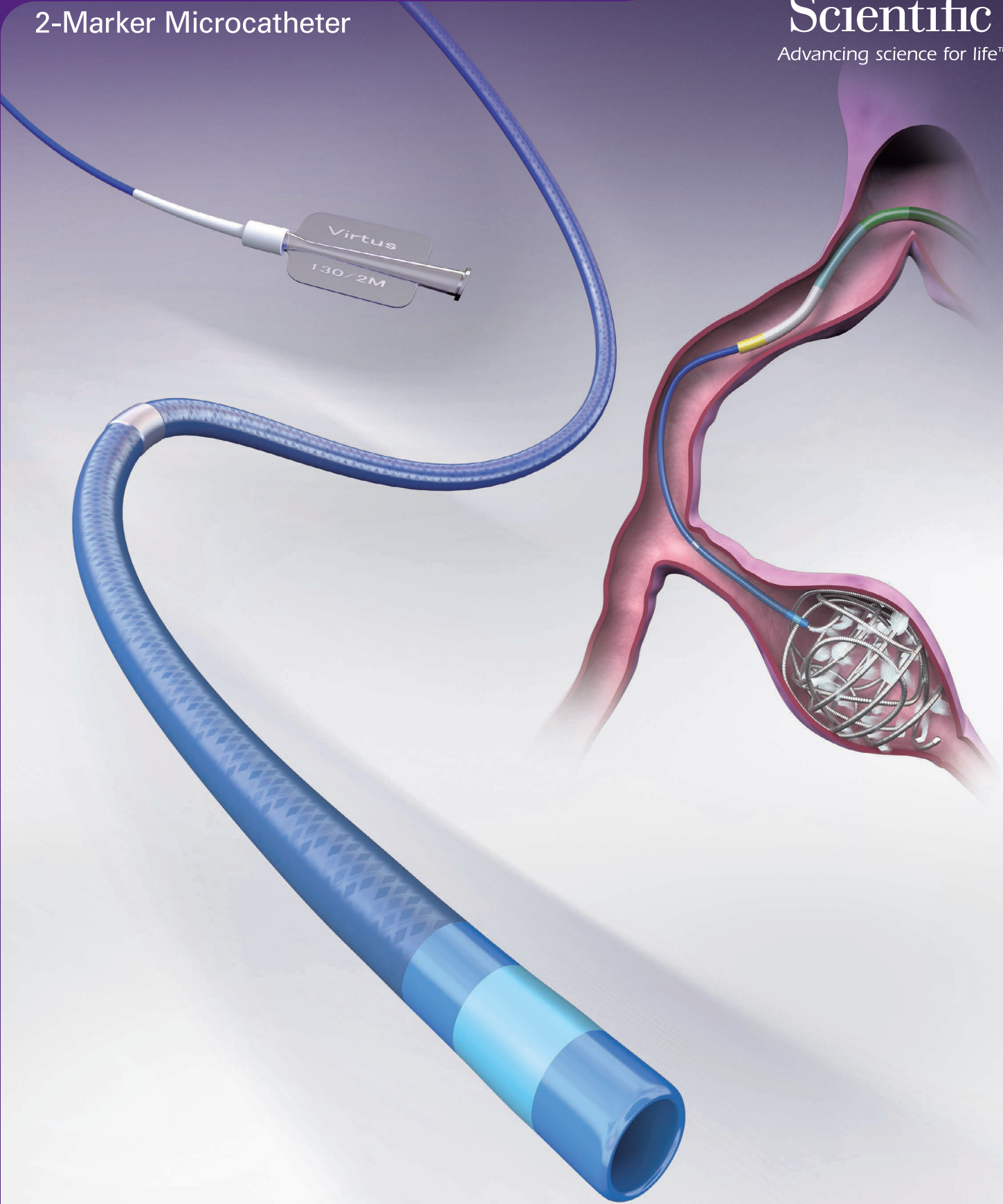

“コイルメーカー”が送り出す、“コイルデリバリー専用”カテーテル
コイルのパフォーマンスを最大限にサポートします

Virtus™
2-Marker Microcatheter

ヴィルタス
Virtus™

2-Marker Microcatheter

Trackability

標的部位への高い到達性を実現

- 独自の三層圧着切替押し出し技術（硬度の異なる樹脂をスムーズに圧着）により、高い追従性を実現しました

Stability

コイル留置時のカテーテル安定性を向上

- シャフト硬度のバランスを徹底的に検証し、コイル留置時のカテーテル安定性を向上させました

Deliverability

よりスムーズなコイルデリバリーを実現

- PTFE 加工が施された 0.022inch の均一な内腔構造により、GDC™ や IDC™ 等のベアコイルはもとより、Interlock™ 等のファイバードコイルのデリバリーがよりスムーズになりました
- 内腔がテーパ化されていないため、コイルを押す力が効率的に伝わります (Fig.1, 2)
- シャフト内径よりハブ入口径を小さく設計することで機能性を追求。コイルやガイドワイヤ等の滑らかな挿入感を実現しました (Fig.3)

Fig.1 : 均一な内腔構造

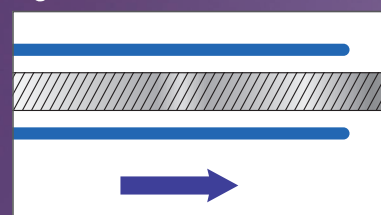


Fig.2 : テーパー化された内腔


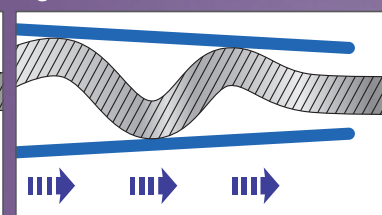


Fig.3 : 機能性を追求したハブデザイン

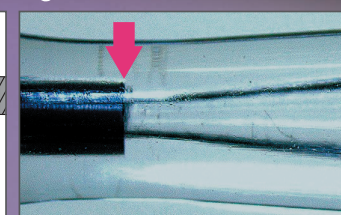

Interlock™
販売名：Fibered IDCコイル
医療機器承認番号：22100BZX01103000

IDC™
販売名：プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム
医療機器承認番号：21000BZY00328000