

**KIS-
Integration**

LATITUDE™ NXT

TELEMEDIZINISCHES PATIENTEN-MANAGEMENT-SYSTEM

LATITUDE™ Link

DATA MANAGEMENT SYSTEM



Boston Scientific hat es sich zum Ziel gesetzt, Lösungen zur Verbesserung der klinischen Effizienz und der Versorgung von Patienten mit Herzschrittmachern und Defibrillatoren bereitzustellen. Das LATITUDE™ NXT Patienten-Management-System und LATITUDE Link™ Data Management System ermöglichen die nahtlose Integration von Patienten- und Aggregatdaten in die elektronische Krankenakte (EMR/KIS), um fundiertere und schnelle Entscheidungen für die Versorgung der Patienten treffen zu können.

LATITUDE NXT

Telemedizinisches Patienten-Management-System

Warum weiterhin Patienten-Management-Berichte aus LATITUDE NXT drucken, um sie dann manuell zu scannen und in das KIS hochzuladen? Die EMR-Integration von LATITUDE NXT ist sicherer und spart Zeit, indem Daten und Berichte automatisch an das KIS übertragen werden.

PRAKTISCH

Das LATITUDE NXT externe Patienten-Management-System ist kompatibel mit Health Level 7 (HL7) und ist für die KIS-Integration konzipiert. Daten werden beim Hochladen in die Liste „Zur Prüfung“ eines Patienten von LATITUDE NXT automatisch an das EMR/KIS übertragen.

Unter anderem werden folgende Datenelemente übertragen:

- LATITUDE Alarminformationen
- Ereignisinformationen
- Zähler zu Ereignissen und Stimulation
- Batteriestatus
- Einstellungen:
 - Tachy-Einstellungen
 - Brady-Einstellungen
 - ATR-Einstellungen
- Elektrodeninformationen
 - Detektions- und Stimulations-Amplituden
 - Impedanz
- PDF-Berichte, z. B. ein kombinierter Nachkontrollbericht, ein Herzinsuffizienz-Bericht und Ereignisberichte



INSTALLATION

Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die EMR/KIS-Integration konfigurieren zu lassen, die direkt auf der LATITUDE NXT Webseite unter „Krankenhaus verwalten“ EMR/KIS-Integration verwalten“ zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zur EMR/KIS-Integration von LATITUDE NXT finden Sie auf www.bostonscientific.com/ifu im Dokument „LATITUDE Integration IDCO and HL7 Specifications“ (IDCO- und HL7-Spezifikationen für die LATITUDE Integration).

Das LATITUDE NXT externe Patienten-Management-System und LATITUDE Link Data Management System eignen sich zur Integration in EMR/KIS, die IDCO- oder HL7-Meldungen unterstützen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Kompatibilität an Ihren EMR/KIS-Lieferanten oder den Boston Scientific LATITUDE Kundenservice (latitude.international@bsci.com).

In einer Umfrage unter Krankenhäusern, die mit EMR/KIS arbeiten, wurde von deutlichen Vorteilen für den Betrieb und die Verwaltung berichtet¹:

- 67 % der Kliniken verzeichneten einen Rückgang bei den Kosten für Unterlagen in Papierform
- 55 % gaben an, dass sich die Qualität der Dokumentation verbessert hat
- 64 % berichteten über eine verbesserte Leistungserfassung


LATITUDE Link

Data Management System

Die Zeiten, in denen Berichte von einem Boston Scientific CRM-Programmiergerät ausgedruckt, eingescannt und anschließend in eine Patientenakte hochgeladen werden mussten, sind vorbei! LATITUDE Link vereinfacht diesen Workflow durch die nahtlose Übertragung von Daten des Programmiergeräts an Ihr EMR/KIS.

PRAKTISCH

- Gesundheitsinformationen von Patienten können vom Programmiergerät an LATITUDE Link und dann in die Patientenakte in Ihrem EMR/KIS oder Geräte-Management-System übertragen werden
- Wenn mehrere Berichte übertragen werden, fasst LATITUDE Link diese vor dem Speichern in Ihrem EMR/KIS zu einer einzelnen PDF zusammen
- Mit allen Programmiergeräten von Boston Scientific kompatibel

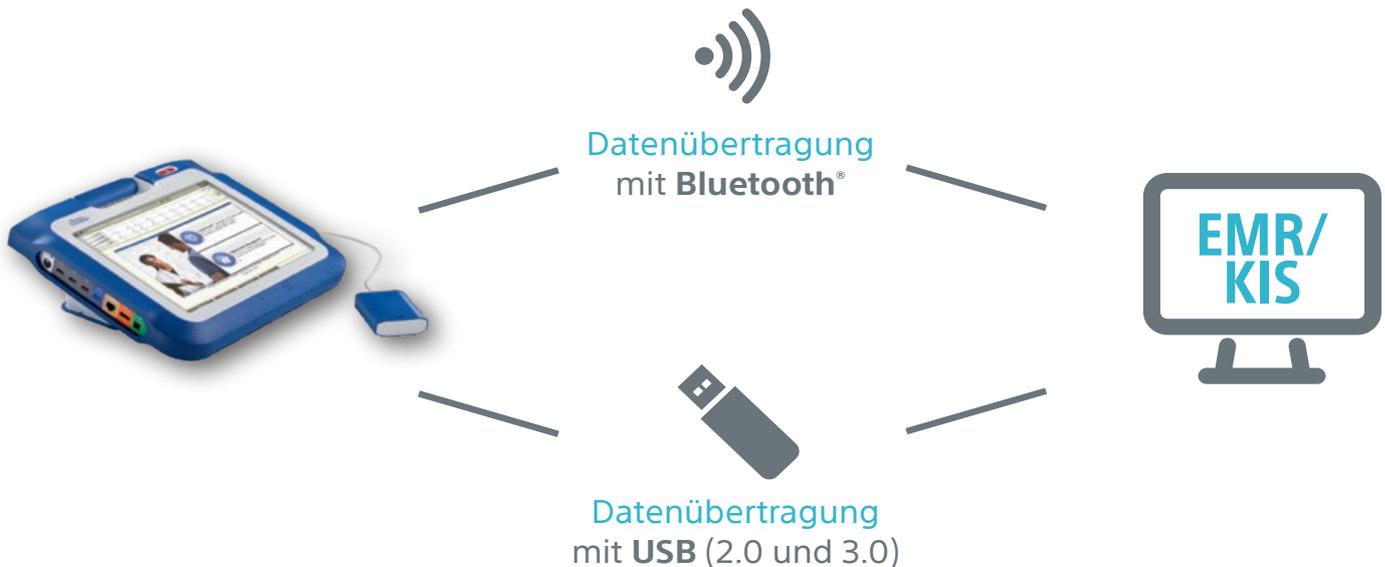

INSTALLATION

Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die LATITUDE Link Software für Ihr EMR/KIS- oder Geräte-Management-System installieren und konfigurieren zu lassen.

Um weitere Informationen über LATITUDE Link zu erhalten oder das LATITUDE Link Import-Dienstprogramm (Import Utility) und die LATITUDE Link Viewer Software herunterzuladen, besuchen Sie www.BostonScientific.com/LatitudeLink.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail über IntlTechService@bsci.com an unseren technischen Kundendienst wenden. Informationen über die LATITUDE NXT EMR-Integration und die HL7- und IDCO-Spezifikationen für LATITUDE Link finden Sie unter www.bostonscientific.com/ifu.

¹ The Advisory Board Company & HIMSS Analytics. EMR benefits and benefit realization methods of stage 6 and 7 hospitals: Hospitals with advanced EMRs report numerous benefits. 2012.

Alle Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ACHTUNG: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen diese Produkte ausschließlich an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der Produktkennzeichnung des jeweiligen Produkts zu entnehmen. Die abgebildeten Produkte werden ausschließlich zu INFORMATIONSZWECKEN gezeigt und sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht zugelassen oder dürfen nicht verkauft werden. Dieses Material ist nicht zur Verwendung in Frankreich vorgesehen.

CRM-922306-AA

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

2021 © Copyright Boston Scientific Corporation oder deren Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.