

# Hydra Jagwire™

Führungsdraht

## HYDRA JAGWIRE FÜHRUNGSDRAHT

Bestellnummer	Beschreibung	Länge (cm)	Dream Tip-Konfiguration	Schaft	Durchmesser (in) (mm)
M00556001	Hydra Jagwire	260	Gerade	Standard	0,035 0,89
M00556011	Hydra Jagwire	260	Gebogen	Standard	0,035 0,89
M00556021	Hydra Jagwire SS	260	Gerade	Steif	0,035 0,89
M00556031	Hydra Jagwire SS	260	Gebogen	Steif	0,035 0,89
M00556041	Hydra Jagwire	450	Gerade	Standard	0,035 0,89
M00556051	Hydra Jagwire	450	Gebogen	Standard	0,035 0,89
M00556061	Hydra Jagwire SS	450	Gerade	Steif	0,035 0,89
M00556071	Hydra Jagwire SS	450	Gebogen	Steif	0,035 0,89

2 Stck. pro Packung

**Europäisches Zentrallager – Niederlande**  
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

**Europäisches Zentrale – Paris**  
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

**Argentinien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

**Australien/Neuseeland**  
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

**Belgien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

**Brasilien**  
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

**Chile**  
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

**China – Guangzhou**  
T: +86 20 6767 9791 F: +86 20 8767 9789

**China – Peking**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

**China – Shanghai**  
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

**Dänemark** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

**Deutschland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 08000 723300 F: 08000 723319

**Finnland**  
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

**Frankreich**  
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

**Griechenland**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Großbritannien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

**Hongkong**  
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

**Indien – Bangalore**  
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

**Indien – Chennai**  
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

**Indien – Delhi**  
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

**Indien – Mumbai**  
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

**Irland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

**Italien**  
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

**Kanada**  
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

**Kolumbien**  
T: +57 1 612 4761 F: +57 1 612 4761

**Korea**  
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

**Mexiko**  
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

**Mittlerer Osten/Arabische Golfstaaten/Nordafrika**  
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

**Niederlande**  
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

**Norwegen** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 800 104 04 F: 800 101 90

**Österreich**  
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

**Polen**  
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

**Portugal**  
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

**Schweden**  
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 00

**Schweiz**  
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

**Spanien – Barcelona**  
T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

**Spanien – Madrid**  
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

**Süd Ost Asien – Malaysia**  
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

**Süd Ost Asien – Philippinen**  
T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

**Süd Ost Asien – Singapur**  
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

**Süd Ost Asien – Thailand**  
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

**Südost Europa**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Südafrika**  
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

**Taiwan**  
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

**Tschechische Republik**  
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

**Türkei – Istanbul**  
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

**Ungarn**  
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

**Uruguay**  
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

**Venezuela**  
T: +58 212 959 62756 F: +58 212 959 5328

**Boston Scientific**

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

Alle Marken- und Urheberrechte gehören den entsprechenden Rechteinhabern. VORSICHT: Diese Produkte dürfen nur durch oder im Auftrag eines Arztes erworben werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Anleitungen zur Benutzung sind der dem Produkt beigegebenen Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Informationen nur für die Verwendung in Ländern mit gültigen Produktregistrierungen bei den zuständigen Gesundheitsbehörden.  
PSST IC 1826 Gedruckt in UK von Gosling.

© 2009 Boston Scientific Corporation oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.  
DINEND2109GB

# Hydra Jagwire™

Führungsdraht

**Boston Scientific**



RX Biliary System™  
**A difference you can feel.™**

# RX Biliary System™

A difference you can feel.™

Das Endoskop ist Ihre Grundausstattung, aber es ist Ihr Gefühl, das Sie zu einer erfolgreichen Prozedur befähigt. Die Produkte des RX Biliary Systems bieten Ihnen durch verbesserte Manipulationsmöglichkeiten perfekte Kontrolle und erleichterten Zugang während der ERCP. Dies ergibt für Sie...*einen Unterschied, den Sie fühlen können.*

Im Laufe der Jahre hat Boston Scientific das Vertrauen und die Treue von Kunden in der ganzen Welt gewonnen, die das RX Biliary System routinemäßig für ihre ERCPs verwenden. Unser langjähriger Erfolg in der Entwicklung von RX biliären Produkten hat es ermöglicht, die Standards von ERCP-Verfahren zu optimieren. Durch die Innovation und Weiterentwicklung von Produkten geben wir Ihnen Kontrolle und Zugang direkt "in die Fingerspitzen".

## ZWEI UNTERSCHIEDLICHE SPITZEN AN EINEM EINZIGEN FÜHRUNGSDRAHT

Die Technologie der Führungsdrahtspitze dient dazu, die Effizienz bei der ERCP zu verbessern

- ◆ Das 10 cm hydrophile Dream Tip™ Ende bietet einen atraumatischen Zugang und ein optimiertes taktilen Empfinden
- ◆ Verwenden Sie die 5 cm hydrophile Spitze, wenn Sie bei einer Prozedur eine festere Spitze benötigen
- ◆ Die 5 cm Spitze ist in ihrer Leistung ähnlich dem Jagwire™ Führungsdraht
- ◆ Es stehen Führungsdrahte in einer Länge von 260 cm und 450 cm zur Verfügung, so dass jeder Arzt nach Wunsch mit der Kurzdraht – oder herkömmlichen Over-the-Wire-Technik arbeiten kann
- ◆ Der Führungsdraht kann während der Papillotomie in Position bleiben
- ◆ Es besteht die Auswahl zwischen einem gebogenen oder einem gerade Dream Tip Ende



## TAKTILES EMPFINDEN

Die Klemmvorrichtung ermöglicht eine kontrollierte Drehung der Führungsdrahtspitze

- ◆ Die selektive Sondierung von Gallengängen wird vereinfacht
- ◆ Die Endoglide™ Beschichtung fördert einen reibungslosen Vorschub und verbessert das taktilen Empfinden
- ◆ Der knickbeständige Nitinolenschaft bietet ausgezeichnete Drahtkontrolle und Handhabung

# Hydra Jagwire™

Führungsdraht




## RX FIXIERSYSTEM

Der Führungsdraht kann an der richtigen Stelle fixiert werden, um den Zugang aufrecht zu erhalten

- ◆ Der Führungsdraht kann während der Prozedur jederzeit fixiert oder freigegeben werden
- ◆ Der Produktwechsel, die Kontrastmittelinjektion und die Durchführung der Prozedur werden erleichtert



Wahlweise gebogene oder gerade Spitze

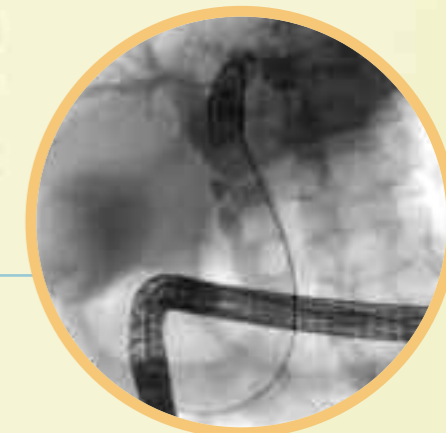

## AUSGEZEICHNETE VISUALISIERUNG

Um den Ductus-Zugang zu erleichtern, kann mit dem Hydra Jagwire Führungsdraht eine Alpha-Schleife gebildet werden

- ◆ Gestreifte Bewegungsmarker geben die Drahtpositionierung während des Drahtvorschubs und dem Produktwechsel an
- ◆ Röntgendichte Marker bei 10 cm und 15 cm erleichtern die genaue Längenmessung der Stenose
- ◆ Die Spitzen mit Wolframkern erhöhen die Röntgensichtbarkeit und erlauben eine radiologische Positionskontrolle während eines Produktwechsels

Wir danken Thomas Kowalski, MD, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA, für die freundliche Überlassung der Bilder