

Hydra Jagwire™

Filo guida

FILO GUIDA HYDRA JAGWIRE

Numero d'ordine	Descrizione	Lunghezza (cm)	Dream Tip Style	Corpo del catetere	Diametro (in) (mm)
M00556001	Hydra Jagwire ST	260	Dritta	Standard	0,035 0,89
M00556011	Hydra Jagwire ANG	260	Angolata	Standard	0,035 0,89
M00556021	Hydra Jagwire ST SS	260	Dritta	Rigido	0,035 0,89
M00556031	Hydra Jagwire ANG SS	260	Angolata	Rigido	0,035 0,89
M00556041	Hydra Jagwire ST	450	Dritta	Standard	0,035 0,89
M00556051	Hydra Jagwire ANG	450	Angolata	Standard	0,035 0,89
M00556061	Hydra Jagwire ST SS	450	Dritta	Rigido	0,035 0,89
M00556071	Hydra Jagwire ANG SS	450	Angolata	Rigido	0,035 0,89

Scatola confezionata / 2

Hydra Jagwire™

Filo guida

Boston
Scientific



Centro Europeo di Distribuzione – Paesi Bassi

T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Sede Centrale Europea – Parigi

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Argentina (Numero Verde)

T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

Australia/Nuova Zelanda

T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Austria

T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Brasile

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Belgio (Numero Verde)

T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Canada

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Cile

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Cina – Beijing

T: +86 10 5525 1588 F: +86 10 8525 1566

Cina – Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Cina – Shanghai

T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombia

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corea

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danimarca (Numero Verde)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Europa Sud Orientale

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlandia

T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

Francia

T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Germania (Numero Verde)

T: 08000 723300 F: 08000 723319

Grecia

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong

T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

India – Bangalore

T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

India – Chennai

T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

India – Delhi

T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

India – Mumbai

T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlanda

T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italia

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Medio Oriente / Golfo / Nord Africa

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Messico

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Norvegia (Numero Verde)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Paesi Bassi

T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

Polonia

T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portogallo

T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

Regno Unito (Numero Verde)

T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Repubblica Ceca

T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Spagna – Barcellona

T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

Spagna – Madrid

T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Sud Africa

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Sud Est Asia – Filippine

T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

Sud Est Asia – Malesia

T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Sud Est Asia – Singapore

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Sud Est Asia – Thailandia

T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Svezia

T: +46 42 154 118 F: +46 42 162 477

Svizzera

T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turchia – Istanbul

T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Ungheria

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston
Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l'uso del presente dispositivo si trovano sull'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Informazioni per l'uso unicamente in paesi con registrazione del prodotto da parte dell'azienda sanitaria.

PSST IC 1826 Stampato nel UK da Gosling.

© 2010 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
DINEND2109IB

RX Biliary System™

A difference you can feel.™


L'endoscopio vi mostra la strada, ma è il vostro tatto a portarvi nel posto giusto. I dispositivi che costituiscono l'RX Biliary System sono stati sviluppati per fornire un accesso e un controllo tali per cui la sensazione di risposta del dispositivo è veramente una... *differenza che si sente*.

Col passare degli anni, la Boston Scientific si è guadagnata la fiducia e la fedeltà di clienti in tutto il mondo che hanno adottato l'RX Biliary System per il loro uso quotidiano. Il nostro successo nello sviluppo di dispositivi biliari RX ad alta performance ci ha permesso di cambiare il panorama delle procedure ERCP. Innovando e migliorando sempre più i nostri prodotti, abbiamo messo il controllo e l'accesso nelle...vostre mani.

DUE PUNTE DIVERSE SU UNO STESSO FILO GUIDA

Tecnologia della punta del filo guida progettata per migliorare l'efficacia della procedura

- ◆ L'estremità idrofila della Dream Tip™ da 10 cm è progettata per eseguire un accesso atraumatico e avere una sensazione tattile ottimale. Passare alla punta idrofila da 5 cm per soddisfare le richieste procedurali di una punta più rigida
- ◆ La punta da 5 cm simile per performance al filo guida Jagwire™
- ◆ Fili guida disponibili nelle lunghezze 260 cm e 450 cm per soddisfare le preferenze dei medici che usano la tecnica short-wire o la tecnica tradizionale over-the-wire
- ◆ Il filo guida può essere lasciato in posizione durante la sfinterotomia
- ◆ Possibilità di scegliere estremità della Dream Tip angolata o dritta

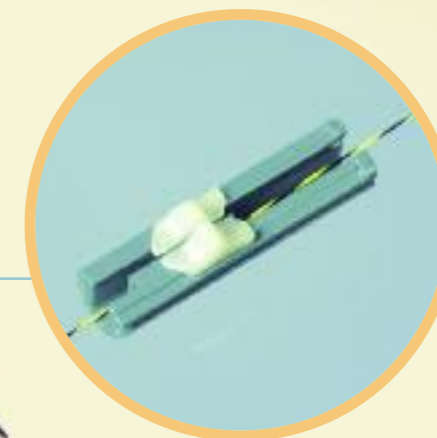

SENSIBILITÀ TATTILE

Dispositivo di torsione a caricamento laterale per manipolare con efficacia la punta del filo guida

- ◆ Progettato per facilitare l'incannulazione profonda del dotto biliare comune
- ◆ Il rivestimento Endoglide™ facilita il passaggio del dispositivo e potenzia la sensazione tattile
- ◆ Corpo del catetere resistente al kinking, in nitinol, per il controllo del filo e della manipolazione

Hydra Jagwire™


Filo guida




DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO RX

Il filo guida si blocca in posizione per mantenere l'accesso

- ◆ Il filo guida può essere bloccato e sbloccato in qualsiasi momento durante la procedura
- ◆ Facilita lo scambio del dispositivo, l'iniezione del mezzo di contrasto e la terapia biliare

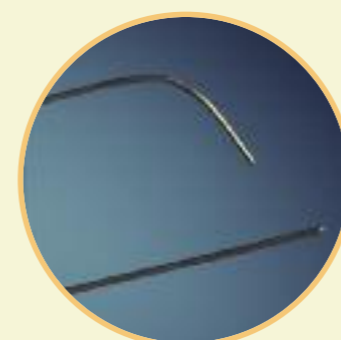

Possibilità di scegliere una punta angolata o dritta

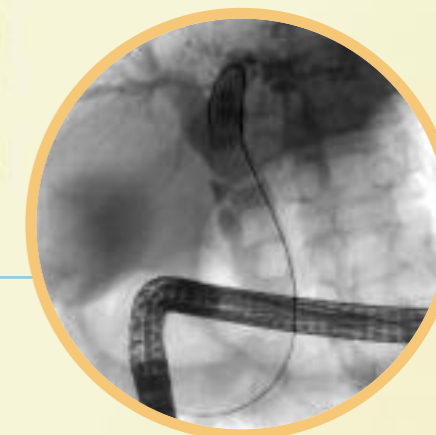

UNA VISUALIZZAZIONE OTTIMA

Il filo guida Hydra Jagwire è progettato per formare un loop per facilitare l'accesso al dotto

- ◆ Marcatore di movimento rigati progettati per indicare il posizionamento del filo durante il suo avanzamento e lo scambio del dispositivo
- ◆ I marcatori radiopachi da 10 cm e 15 cm facilitano la misurazione precisa della stenosi
- ◆ Le punte riempite di tungsteno permettono una migliore visualizzazione fluoroscopica per aiutare a confermare l'accesso durante la sostituzione del dispositivo

Immagini gentilmente concessa da Thomas Kowalski, MD, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA