

Hurricane™ RX

Cathéter biliaire de dilatation à ballonnet

Boston
Scientific



RX Biliary System™
A difference
you can feel.™

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

L'endoscope vous indique le chemin, mais c'est votre toucher qui vous amène où vous devez aller. Le dispositif qui constitue le Système RX Biliary a été développé pour faciliter l'accès et le contrôle avec une sensation de réactivité du dispositif qui est réellement...*une différence que vous pouvez sentir.*

Au fil des ans, Boston Scientific a gagné la confiance et la fidélité des clients du monde entier ayant adopté le système RX Biliary pour une utilisation quotidienne. Notre héritage de succès dans le développement des dispositifs biliaires RX nous a permis de modifier le paysage des procédures de CPRE. En innovant et en sophistiquant nos produits, nous avons mis la facilité de contrôle et d'accès à la portée de vos mains.



Hurricane


Cathéter biliaire de dilata



EXCELLENT PASSAGE DANS LES STÉNOSES

Le cathéter à ballonnet 5,8 F (1,93 mm) à profil (effilé) mince est conçu pour réduire la résistance et faciliter son avancement dans les sténoses

- ◆ L'extrémité 4 F (1,33 mm) permet une progression moins traumatique dans la sténose
- ◆ Le Stylet rigide en acier inoxydable inséré dans la partie proximale du corps du cathéter facilite son avancement
- ◆ La conception à échange rapide (RX) permet le verrouillage du fil-guide pour sécuriser l'accès

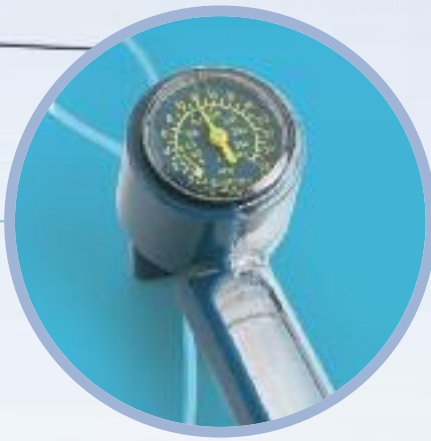

PRESSION ALLANT JUSQU'À 12 ATM (1216kPa)

- ◆ La longueur du ballonnet (4 cm) apporte une stabilité optimale pendant la dilatation de la sténose
- ◆ Le dispositif de gonflage Encore™ 26 permet un dégonflage rapide pour limiter la gêne pour le patient
- ◆ Le matériau semi-compliant a été conçu pour s'adapter à l'anatomie du canal biliaire pendant le gonflage du ballonnet

CONÇU POUR UN POSITIONNEMENT PRECIS

Le ballonnet Hurricane RX offre des options multiples pour la visualisation

- ◆ Deux repères radio-opaques facilitent le positionnement du ballonnet
- ◆ Le produit de contraste peut être injecté avec le fil-guide en place



Dilatation d'une sténose avec le ballonnet de dilataion Hurricane

UNE LARGE GAMME DE TAILLE DE BALLONNETS

Le choix de diamètres et longueurs de ballonnets facilite la sélection d'un ballonnet adapté à l'anatomie du patient et à la taille de la sténose

- ◆ Longueurs de 2 cm et 4 cm
- ◆ Diamètres du ballonnet de 4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Hurricane™ RX

Cathéter biliaire de dilatation à ballonnet

CATHÉTER BILIAIRE DE DILATATION À BALLONNET À USAGE UNIQUE HURRICANE RX*

Code produit	Diam. ext. du ballonnet (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Diam. ext. du cathéter (F) (mm)		Longueur du cathéter (cm)	Pression de gonflage maximale (ATM) (kPa)		Taille minimale du canal (mm)	Fil-guide recommandé (in) (mm)	
M00545890	4	2	5,8	1,93	180	12	1216	3,2	0,035	0,89
M00545900	4	4	5,8	1,93	180	12	1216	3,2	0,035	0,89
M00545910	6	2	5,8	1,93	180	11	1114	3,2	0,035	0,89
M00545920	6	4	5,8	1,93	180	11	1114	3,2	0,035	0,89
M00545930	8	2	5,8	1,93	180	11	1114	3,2	0,035	0,89
M00545940	8	4	5,8	1,93	180	11	1114	3,2	0,035	0,89
M00545950	10	2	5,8	1,93	180	8	810	3,2	0,035	0,89
M00545960	10	4	5,8	1,93	180	8	810	3,2	0,035	0,89

*Fil-guide recommandé: Jagwire™ Hydra 0,035" (0,89 mm).

DISPOSITIF DE GONFLAGE ENCORE™ 26

M00566670 Dispositif de gonflage Encore 26

Date: 01/2013 - **Nom:** Hurricane™ RX - **Indication:** Le cathéter de dilatation à ballonnet biliaire RX Hurricane™ est recommandé pour la dilatation endoscopique des sténoses de l'arbre biliaire et du sphincter d'Oddi. Il peut être utilisé pour injecter un produit de contraste afin de visualiser les canaux biliaires sous radioscopie. **Classe:** Classe IIa - **Organisme:** CE0197 - **Fabricant:** Boston Scientific Corp. -

Indications: Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif. - **Remboursement:** DM IntraGHS

Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ces dispositifs ne peuvent être vendus que sur prescription médicale. Des indications, contre-indications, mises en garde et instructions d'utilisation figurent sur la notice d'utilisation fournie avec chaque dispositif. Ces informations relatives à l'utilisation des produits sont destinées uniquement aux pays dont les produits sont enregistrés par les autorités compétentes.

PSST IC 3118. Imprimé en Les Pays-Bas par De Budelse/Gosling.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

RCS Nanterre B420 668 420
© 2014 Boston Scientific Corporation
ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEND2125FC