

Hurricane™ RX

Biliärer Ballondilatationskatheter

HURRICANE RX EINMAL-BALLONDILATATIONS-KATHETER*

Bestell- Nummer	Ballon AD (mm)	Ballon- länge (cm)	Katheter AD		Katheter- länge (cm)	Max. Aufdehn- druck		Mindest- größe (mm)	Empfohlener Führungsdraht	
			(F)	(mm)		(ATM)	(kPa)		(in)	(mm)
M00545890	4	2	5,8	(1,93)	180	12	(1216)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545900	4	4	5,8	(1,93)	180	12	(1216)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545910	6	2	5,8	(1,93)	180	11	(1114)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545920	6	4	5,8	(1,93)	180	11	(1114)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545930	8	2	5,8	(1,93)	180	11	(1114)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545940	8	4	5,8	(1,93)	180	11	(1114)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545950	10	2	5,8	(1,93)	180	8	(810)	3,2	0,035"	(0,89)
M00545960	10	4	5,8	(1,93)	180	8	(810)	3,2	0,035"	(0,89)

*Empfohlener Führungsdraht: 0,035" (0,89 mm) Hydra Jagwire™ Führungsdraht

ENCORE™ 26 DRUCKSPRITZE MIT INTEGRIERTEM MANOMETER

M00566670 Druckspritze mit integriertem Manometer

Europäisches Zentrallager – Niederlande T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800	Finland T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883	Korea T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776	Süd Ost Asien – Philippinen T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047
Europäisches Zentrale – Paris T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99	Frankreich T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01	Mexiko T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28	Süd Ost Asien – Singapur T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
Argentinien (Kostenfreie Rufnummer) T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517	Griechenland T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310	Mittlerer Osten/Arabische Golfstaaten/Nordafrika T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445	Süd Ost Asien – Thailand T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400
Australien/Neuseeland T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404	Großbritannien (Kostenfreie Rufnummer) T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513	Niederlande T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05	Südost Europa T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310
Belgien (Kostenfreie Rufnummer) T: 0800 94 494 F: 0800 93 343	Hongkong T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276	Norwegen (Kostenfreie Rufnummer) T: 800 104 04 F: 800 101 90	Südafrika T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Brasilien T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212	Indien – Bangalore T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153	Österreich T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60	Taiwan T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Chile T: +562 445 4904 F: +562 445 4915	Indien – Chennai T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716	Polen T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10	Tschechische Republik T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935
China – Guangzhou T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789	Indien – Delhi T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808	Portugal T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58	Türkei – Istanbul T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67
China – Peking T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566	Indien – Mumbai T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199	Schweden T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 00	Ungarn T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
China – Shanghai T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900	Irland (Kostenfreie Rufnummer) T: 1800 882 969 F: 1800 882 968	Schweiz T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01	Uruguay T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
Dänemark (Kostenfreie Rufnummer) T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05	Italien T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200	Spanien – Barcelona T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45	Venezuela T: +58 212 959 62756 F: +58 212 959 5328
Deutschland (Kostenfreie Rufnummer) T: 08000 723300 F: 08000 723319	Kanada T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396	Spanien – Madrid T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03	
	Kolumbien T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761	Süd Ost Asien – Malaysia T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813	

Alle Marken- und Urheberrechte gehören den entsprechenden Rechteinhabern. VORSICHT: Diese Produkte dürfen nur durch oder im Auftrag eines Arztes erworben werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Anleitungen zur Benutzung sind der dem Produkt beigegebenen Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Informationen nur für die Verwendung in Ländern mit gültigen Produktregistrierungen bei den zuständigen Gesundheitsbehörden.

PSST IC 3118 Gedruckt in den UK von Gosling.

**Boston
Scientific**

Delivering what's next.™


www.bostonscientific-international.com

© 2009 Boston Scientific Corporation oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. DINEND2125GB

Hurricane™ RX

Biliärer Ballondilatationskatheter

**Boston
Scientific**

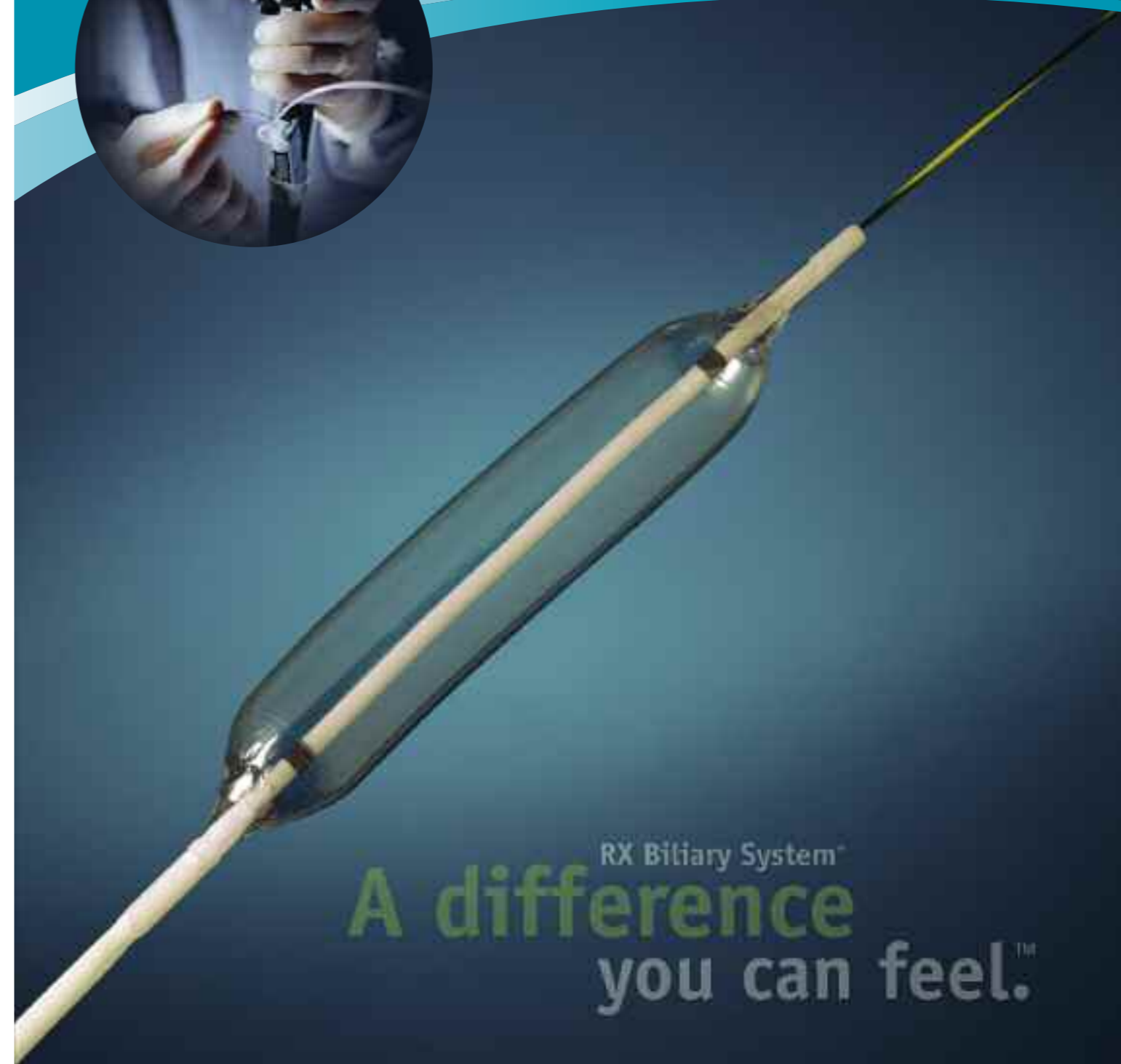

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

Das Endoskop ist Ihre Grundausstattung, aber es ist Ihr Gefühl, das Sie zu einer erfolgreichen Prozedur befähigt. Die Produkte des RX Biliary Systems bieten Ihnen durch verbesserte Manipulationsmöglichkeiten perfekte Kontrolle und erleichterten Zugang während der ERCP. Dies ergibt für Sie...*einen Unterschied, den Sie fühlen können.*

Im Laufe der Jahre hat Boston Scientific das Vertrauen und die Treue von Kunden in der ganzen Welt gewonnen, die das RX Biliary System routinemäßig für ihre ERCPs verwenden. Unser langjähriger Erfolg in der Entwicklung von RX biliären Produkten hat es ermöglicht, die Standards von ERCP-Verfahren zu optimieren. Durch die Innovation und Weiterentwicklung von Produkten geben wir Ihnen Kontrolle und Zugang direkt „in die Fingerspitzen“.

Hurricane™ RX Biliärer Ballondilatationskatheter



AUSGEZEICHNETE STRIKTURPASSAGE

Der 5,8 F (1,93 mm) Ballonschaft mit niedrigem Profil wurde entwickelt, um den Widerstand zu verringern und den Vorschub beim Passieren von Strikturen zu erleichtern

- ◆ Die 4 F (1,33 mm) Spitze ermöglicht den atraumatischen Vorschub durch die Striktur
- ◆ Der in den proximalen Teil des Katheterschafts integrierte Versteifungsmandrin sorgt für hervorragende Vorschubeigenschaften
- ◆ Der Katheter in RX Technologie ermöglicht die Fixierung des Führungsdrahtes an der gewünschten Position und sorgt so für einen sicheren Zugang



DRUCK BIS ZU 12 ATM (1216kPa) MÖGLICH

- ◆ Die lange Ballongröße von 4 cm bietet der Striktur Stabilität während der Dilatation
- ◆ Die Encore™ 26 Druckspritze wurde für das schnelle Deflatieren des Ballons designed, um so mögliche Beschwerden des Patienten zu verringern
- ◆ Das halbflexible Material wurde entwickelt, um sich der Anatomie des Gallengangs während der Ballonaufdehnung anzupassen

FÜR DIE EXAKTE POSITIONIERUNG ENTWICKELT

Der Hurricane RX Ballon bietet eine Vielzahl von Visualisierungsmöglichkeiten

- ◆ Zwei röntgendichte Markierungen helfen bei der Ballonpositionierung
- ◆ Das Kontrastmittel kann mit positioniertem Führungsdraht injiziert werden



Dilatation einer Striktur mit einem Hurricane Dilatationsballon

GROSSE AUSWAHL VON BALLONGRÖSSEN

Verschiedene Ballondurchmesser und -längen erleichtern die Auswahl des für die Patientenanatomie und die Strikturgröße geeigneten Ballons

- ◆ Es sind Längen von 2 cm und 4 cm erhältlich
- ◆ Der Ballon wird mit den Durchmessern 4 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm angeboten

Die Bilder wurden uns freundlicherweise von Mario Traina, MD, ISMETT Hospital, Palermo, Italien, überlassen