

Hurricane™ RX

Catetere biliare per dilatazione a palloncino

CATETERE BILIARE PER DILATAZIONE A PALLONCINO MONOUSO HURRICANE RX*

Numero d'ordine	Diam. del palloncino (mm)	Lunghezza del palloncino (cm)	Diam. del catetere (F) (mm)	Lunghezza del catetere (cm)	Pressione massima di gonfiaggio (ATM) (kPa)	Dimensioni minime del canale (mm)	Filo guida raccomandato (in) (mm)
M00545890	4	2	5,8 (1,93)	180	12 (1216)	3,2	0,035" (0,89)
M00545900	4	4	5,8 (1,93)	180	12 (1216)	3,2	0,035" (0,89)
M00545910	6	2	5,8 (1,93)	180	11 (1114)	3,2	0,035" (0,89)
M00545920	6	4	5,8 (1,93)	180	11 (1114)	3,2	0,035" (0,89)
M00545930	8	2	5,8 (1,93)	180	11 (1114)	3,2	0,035" (0,89)
M00545940	8	4	5,8 (1,93)	180	11 (1114)	3,2	0,035" (0,89)
M00545950	10	2	5,8 (1,93)	180	8 (810)	3,2	0,035" (0,89)
M00545960	10	4	5,8 (1,93)	180	8 (810)	3,2	0,035" (0,89)

*Filo guida raccomandato: Filo guida Hydra Jagwire™ da 0,035" (0,89 mm).

DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO ENCORE™ 26

M00566670 Dispositivo di gonfiaggio Encore 26


Centro Europeo di Distribuzione – Paesi Bassi T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800	Colombia T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761	Irlanda T: 1800 882 969 F: 1800 882 968	Sud Est Asia – Filippine T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047
Sede Centrale Europea – Parigi T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99	Corea T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776	Italia T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200	Sud Est Asia – Malesia T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813
Argentina (Numero Verde) T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517	Danimarca (Numero Verde) T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05	Medio Oriente / Golfo / Nord Africa T: +961 1 805 262 F: +961 1 805 445	Sud Est Asia – Singapore T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
Australia / Nuova Zelanda T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404	Europa Sud Orientale T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310	Messico T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28	Sud Est Asia – Thailandia T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400
Austria T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60	Finlandia T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883	Norvegia (Numero Verde) T: 800 104 04 F: 800 101 90	Svezia T: +46 42 154 118 F: +46 42 162 477
Brasile T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212	Francia T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01	Paesi Bassi T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05	Svizzera T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01
Belgio (Numero Verde) T: 0800 94 494 F: 0800 93 343	Germania (Numero Verde) T: 08000 723300 F: 08000 723319	Polonia T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10	Taiwan T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Canada T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396	Grecia T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310	Portogallo T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58	Turchia – Istanbul T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67
Cile T: +562 445 4904 F: +562 445 4915	Hong Kong T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276	Regno Unito (Numero Verde) T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513	Ungheria T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
Cina – Beijing T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566	India – Bangalore T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153	Repubblica Ceca T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935	Uruguay T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
Cina – Guangzhou T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789	India – Chennai T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716	Spagna – Barcellona T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45	Venezuela T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328
Cina – Shanghai T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900	India – Delhi T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808	Spagna – Madrid T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03	
	India – Mumbai T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199	Sud Africa T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077	

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l'uso del presente dispositivo si trovano sull'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Informazioni per l'uso unicamente in paesi con registrazione del prodotto da parte dell'azienda sanitaria. PSST IC 3118 Stampato nel UK da Gosling.

Hurricane™ RX

Catetere biliare per dilatazione a palloncino

Boston
Scientific

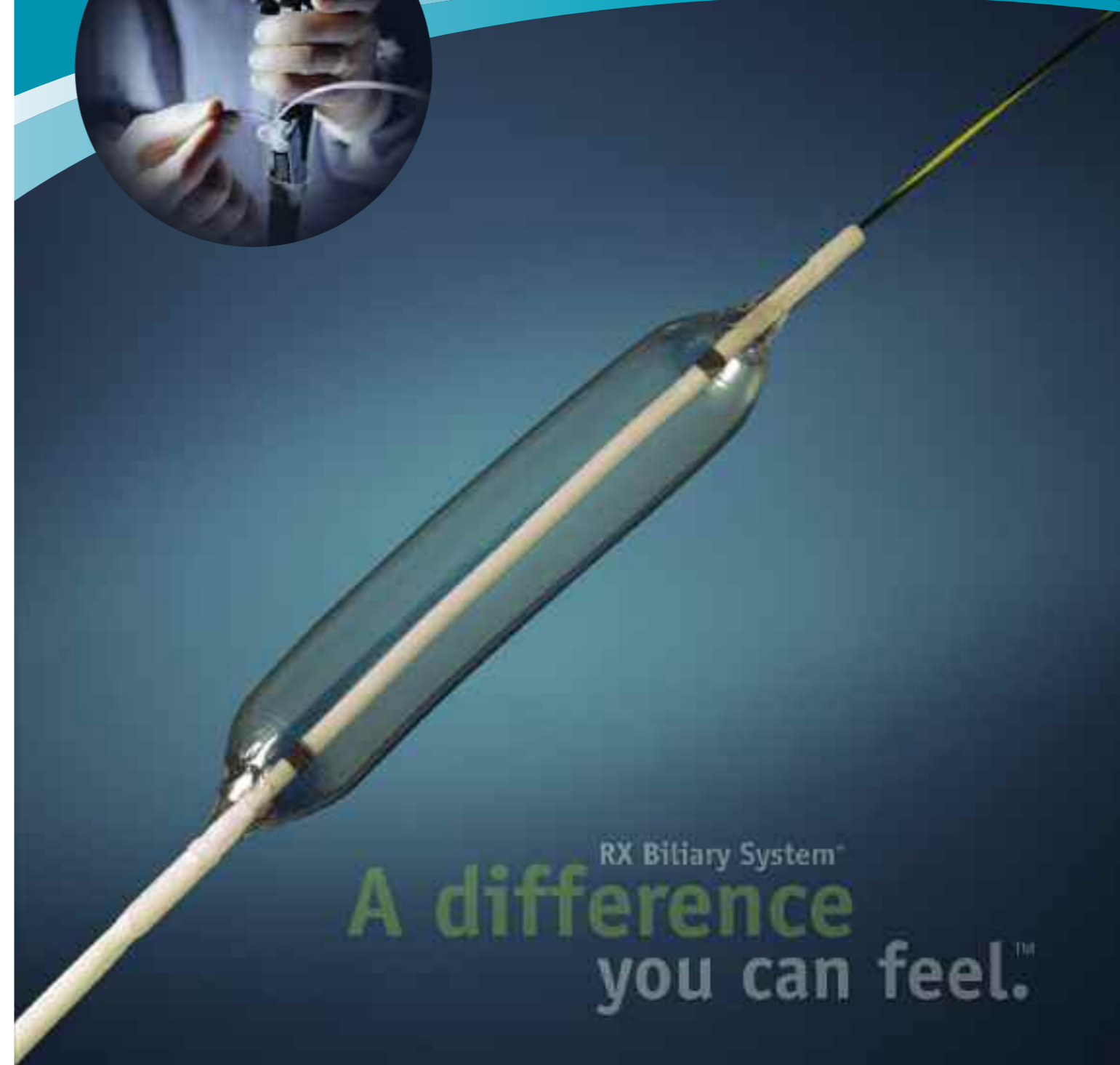

Boston
Scientific
Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

RX Biliary System™
A difference
you can feel.™

© 2009 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
DINEND2125IB

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

L'endoscopio vi mostra la strada, ma è il vostro tatto a portarvi nel posto giusto. I dispositivi che costituiscono l'RX Biliary System sono stati sviluppati per fornire un accesso e un controllo tali per cui la sensazione di risposta del dispositivo è veramente una... *differenza che si sente*.

Col passare degli anni, la Boston Scientific si è guadagnata la fiducia e la fedeltà di clienti in tutto il mondo che hanno adottato l'RX Biliary System per il loro uso quotidiano. Il nostro successo nello sviluppo di dispositivi biliari RX ad alta performance ci ha permesso di cambiare il panorama delle procedure ERCP. Innovando e migliorando sempre più i nostri prodotti, abbiamo messo il controllo e l'accesso nelle...vostre mani.

Hurricane™ RX

Catetere biliare per dilatazione a palloncino



PRESSIONI MASSIME DI 12 ATM (1216kPa)

- ◆ Il palloncino lungo 4 cm è progettato per offrire stabilità durante la dilatazione della stenosi
- ◆ Il dispositivo di gonfiaggio Encore™ 26 è sviluppato per eseguire uno sgonfiaggio rapido in modo da ridurre il disagio del paziente
- ◆ Materiale semi-compiante progettato per adattarsi all'anatomia del dotto biliare durante il gonfiaggio del palloncino



PASSAGGIO OTTIMALE DELLA STENOSI


Il corpo del palloncino da 5,8 F (1,93 mm), di basso profilo, è progettato per ridurre la resistenza e aumentare la pushability quando attraversa le stenosi

- ◆ La punta da 4 F (1,33 mm) è stata progettata per avanzare in modo meno traumatico attraverso la stenosi
- ◆ Il mandrino rigido in acciaio inox viene inserito nella porzione prossimale del corpo del catetere per aumentarne la pushability
- ◆ Il design del catetere RX consente di bloccare il filo per garantire l'accesso

UN POSIZIONAMENTO ACCURATO

Il palloncino Hurricane RX offre molteplici opzioni di visualizzazione

- ◆ Due marcatori radiopachi aiutano a posizionare il palloncino
- ◆ Il mezzo di contrasto può essere iniettato con il filo guida in posizione

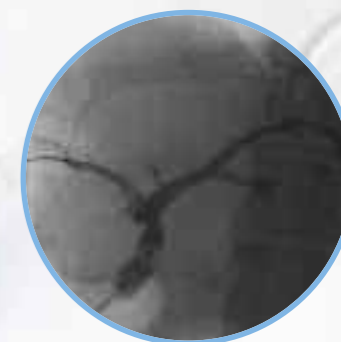

Dilatazione di una stenosi con il palloncino da dilatazione Hurricane

DIMENSIONI DEL PALLONCINO

I diversi diametri e lunghezze dei palloncini consentono di scegliere il palloncino delle dimensioni appropriate per l'anatomia di un dato paziente e per le dimensioni della sua stenosi

- ◆ Lunghezze disponibili: 2 cm e 4 cm
- ◆ Diametri disponibili dei palloncini: 4 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm