


*Jagwire*TM

Guides haute performance

Boston
Scientific

**Agilité et
polyvalence**

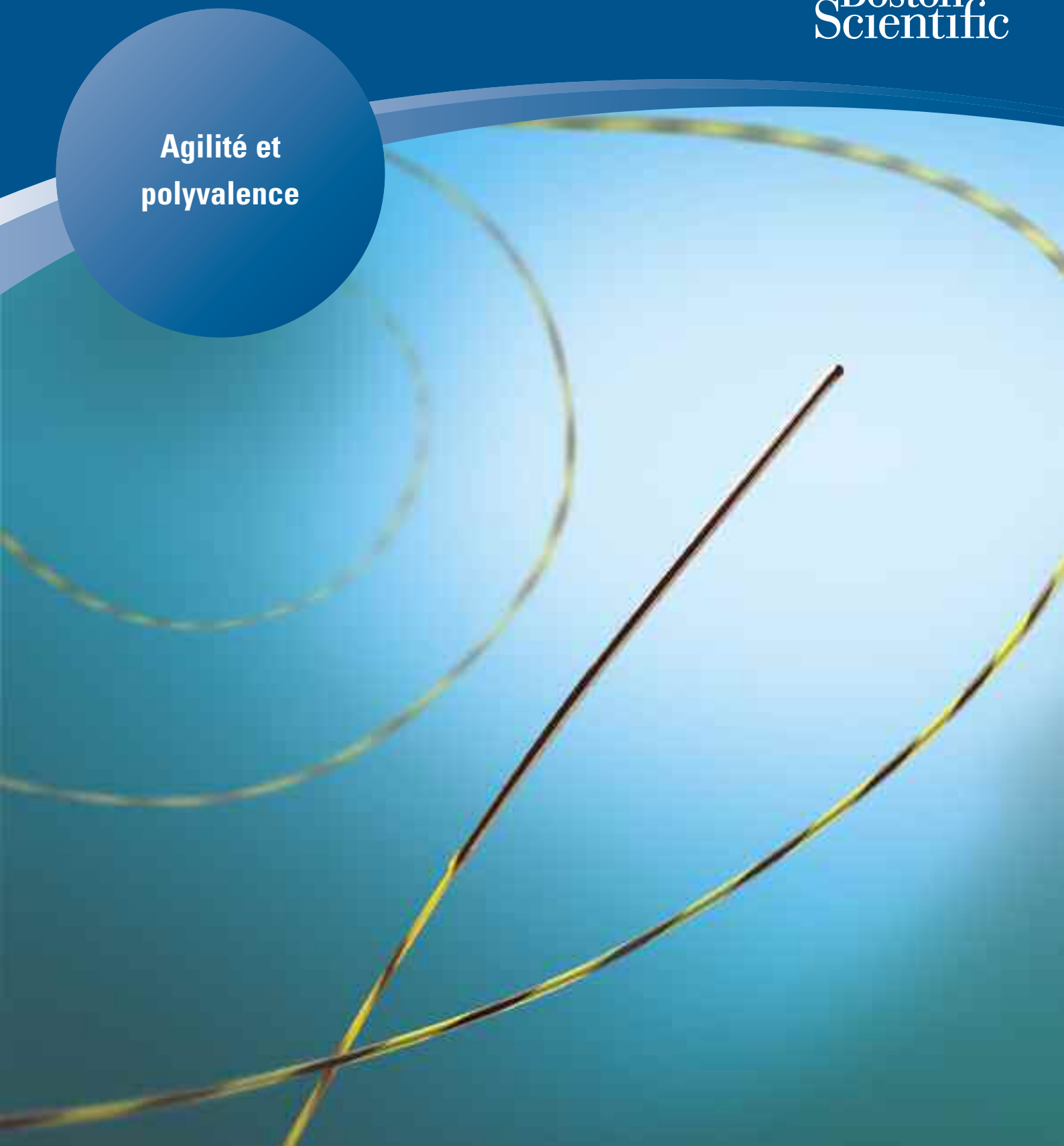

La vaste gamme de guides haute performance Jagwire augmente les possibilités de la CPRE.



Extrémité spéciale composée de tungstène pour la visualisation radioscopique et l'accès à la voie biliaire.

Le revêtement Endoglide™ de la partie distale permet une progression en douceur.

L'extrémité composée de tungstène améliore la visualisation radioscopique.**

La partie distale hydrophile de 5 cm facilite le cathétérisme sélectif et la négociation des anatomies tortueuses.

Le corps résistant aux plicatures permet le contrôle du cathéter lors de sa progression et le support lors de l'échange d'instruments.

Le motif noir et jaune permet une visualisation endoscopique claire réduisant la nécessité de recours à la radioscopie lors de l'échange d'instruments.

La surface antidérapante proximale ne requiert aucune précaution de manipulation particulière et offre un contrôle précis de la torsion.



Les dispositifs compatibles avec les systèmes RX permettent le contrôle indépendant des guides Jagwire pour l'amélioration du cathétérisme des voies biliaires.



Le Jagwire peut être bloqué en position intra canalaire lors de la CPRE pour un accès plus sûr et un échange simplifié.

Revêtement isolé*
Le guide peut être laissé en place lors de la sphinctérotomie.

Références

Référence	Ø ext. (in) / (mm)	Modèle du corps	Pointe effilée (in) / (mm)	Longueur (cm)	Type d'extrémité
M0055656011	0,025 / 0,64	Standard	0,025-0,020 / 0,64-0,51	450	Droite
M0055658011	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Droite
M0055659011	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Courbée
M0055660011	0,035 / 0,89	Corps rigide*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Droite
M0055661011	0,035 / 0,89	Corps rigide*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Courbée
M0055662011	0,038 / 0,97	Corps rigide*	0,038-0,027 / 0,97-0,69	260	Droite
M00557681	0,025 / 0,64	Standard	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Droite
M00556481	0,025 / 0,64	Corps rigide*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Droite
M00556491	0,025 / 0,64	Corps rigide*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Courbée
M00557641	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite
M00557651	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Courbée
M00557661	0,035 / 0,89	Corps rigide*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite
M00557671	0,035 / 0,89	Corps rigide*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Courbée
M00556921	0,035 / 0,89	Standard, extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite
M00556931	0,035 / 0,89	Standard, extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Courbée
M00556941	0,035 / 0,89	Corps rigide* extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Droite
M00556951	0,035 / 0,89	Corps rigide* extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Courbée
Jagtail™ RX					
M00556902	0,035 / 0,89	Segment proximal extensible		200	S.O.

Images cliniques fournies par Adam Sliwa, M.D., Ph.D., Directeur médical du laboratoire de gastro-entérologie Responsable de l'endoscopie, Centre des troubles digestifs, Université de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, États-Unis. Guide haute performance Jagwire, brevet américain 5,379,779 et brevets européens 949265276-2.305 et EP714315

* La rigidité du corps améliore le support lors de l'échange d'instruments

** Fichier de données Boston Scientific Corporation

† Se référer au mode d'emploi, aux mises en garde et aux précautions d'utilisation pour des informations complètes

Centre de distribution Européen – Les Pays-Bas
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Direction Européenne – Paris
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Afrique du Sud
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Allemagne (Appel gratuit)
T: 0800 7233 00 F: 0800 7233 19

Argentine (Appel gratuit)
T: 0800 555 2878 F: +54 11 4896 8517

Asie du Sud Est – Malaisie
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Asie du Sud Est – Philippines
T: +63 2 887 6994 F: +63 2 887 3047

Asie du Sud Est – Singapour
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Asie du Sud Est – Thaïlande
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Australie/Nouvelle Zélande
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Autriche
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Belgique (Appel gratuit)
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Bésil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chili
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Chine – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

Chine – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Chine – Shanghai
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombie
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corée
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danemark (Appel gratuit)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espagne
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Europe du Sud Est
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlande
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

France
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Grande Bretagne (Appel gratuit)
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grèce
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hongrie
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Inde – Bangalore
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

Inde – Chennai
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

Inde – Delhi
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

Inde – Mumbai
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlande (Appel gratuit)
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italie
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Les Pays-Bas
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

Mexique
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient/Golfe Persique/Afrique du Nord
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Norvège (Appel gratuit)
T: 800 104 04 F: 800 101 90

Pologne
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

République Tchèque
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Suède
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suisse
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquie
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela
T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™††

www.bostonscientific-international.com

RCS Nanterre B420 668 420
© 2010 Boston Scientific Corporation
ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEND2148FB