


# *Jagwire*<sup>TM</sup>

Hochleistungs-Führungsdrähte

Boston  
Scientific

**Wendigkeit und  
Vielseitigkeit**

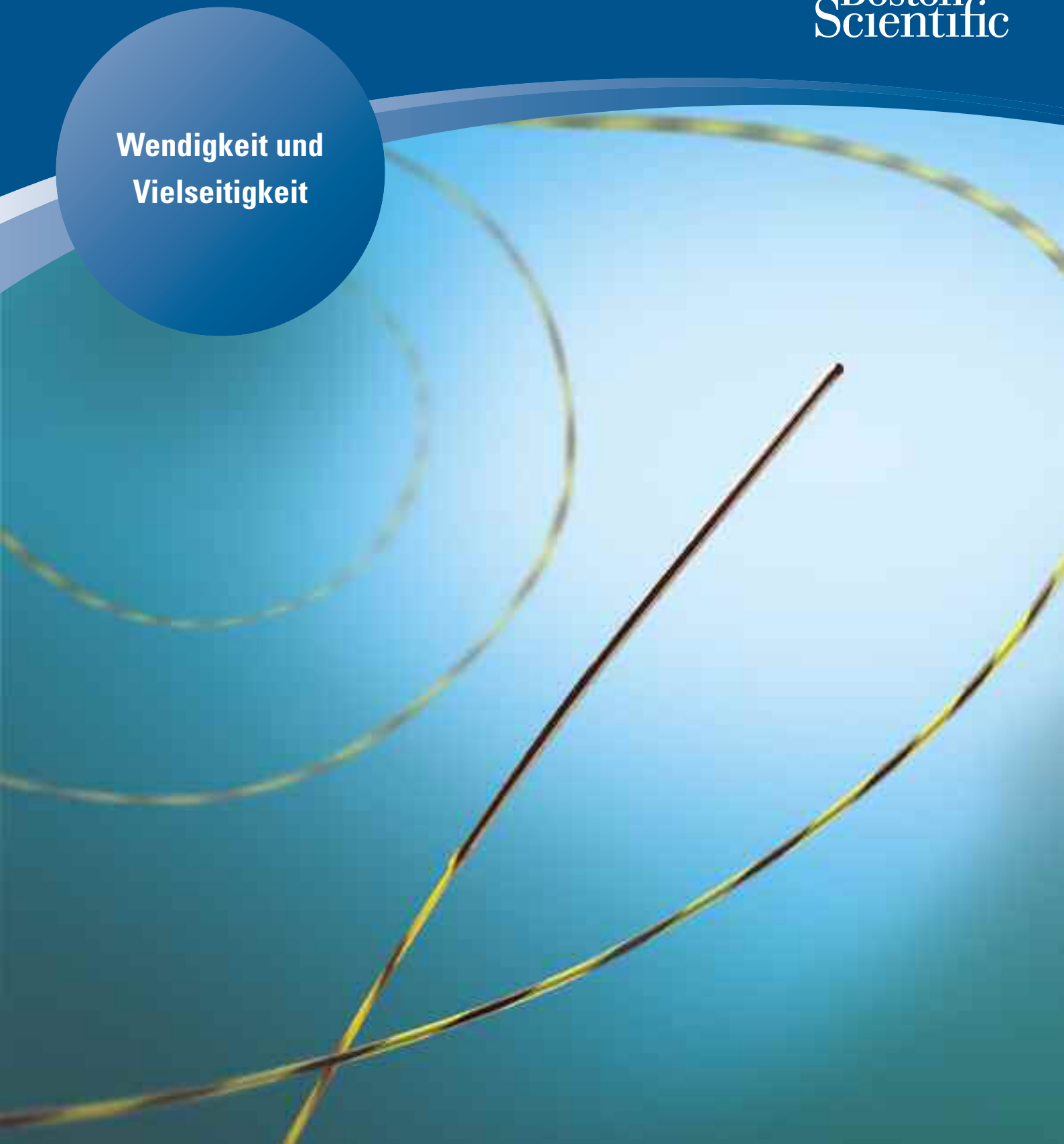

Die breite Produktpalette von Jagwire Hochleistungs-Führungsdrähten bietet Ihnen alle Optionen für die ERCP.



**Speziell gefertigte Spitze mit Wolframkern zur Erleichterung der Sondierung des Gallengangsystems durch bessere Röntgensichtbarkeit.**



**Endoglide™ Beschichtung** des Führungsdrahtes sichert einen reibungslosen Vorschub.

**Spitze mit Wolframkern** erhöht die Röntgensichtbarkeit.\*\*

**5 cm lange hydrophile Spitze** unterstützt die selektive Sondierung und die Passage durch gewundene Anatomie.

**Knickbeständiger Schaft** erleichtert den Vorschub und den Instrumentenwechsel.

**Schwarz-gelbes Design** zur Bewegungskontrolle durch das Endoskop – Minderung der Durchleuchtungszeit während des Instrumentenwechsels.

**Unbeschichteter proximaler Drahtabschnitt** ermöglicht eine sichere Handhabung.



RX-kompatible Produkte ermöglichen eine unabhängige Steuerung des Jagwire und erleichtern somit die selektive Sondierung des Gallengangsystems.



Der Jagwire kann während der ERCP zur Erhaltung seiner Position und zum sicheren Wechsel fixiert werden.

## Bestellinformationen

Bestellnummer	AD (in) / (mm)	Schaffausführung	Verjüngung (in) / (mm)	Länge (cm)	Spitzenausführung
M0055656011	0,025 / 0,64	Standard	0,025-0,020 / 0,64-0,51	450	Gerade
M0055658011	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Gerade
M0055659011	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Gebogen
M0055660011	0,035 / 0,89	Steifer Schaft*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Gerade
M0055661011	0,035 / 0,89	Steifer Schaft*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Gebogen
M0055662011	0,038 / 0,97	Steifer Schaft*	0,038-0,027 / 0,97-0,69	260	Gerade
M00557681	0,025 / 0,64	Standard	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Gerade
M00556481	0,025 / 0,64	Steifer Schaft*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Gerade
M00556491	0,025 / 0,64	Steifer Schaft*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Gebogen
M00557641	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gerade
M00557651	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gebogen
M00557661	0,035 / 0,89	Steifer Schaft*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gerade
M00557671	0,035 / 0,89	Steifer Schaft*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gebogen
M00556921	0,035 / 0,89	Standard, verlängerbar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gerade
M00556931	0,035 / 0,89	Standard, verlängerbar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gebogen
M00556941	0,035 / 0,89	Steifer Schaft*, verlängerbar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gerade
M00556951	0,035 / 0,89	Steifer Schaft*, verlängerbar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Gebogen
<b>Jagtail™ RX</b>					
M00556902	0,035 / 0,89	Verlängerung		200	-

**Isolierte Ummantelung\***  
Der Führungsdraht muss während der Papillotomie nicht zurückgezogen werden.

Klinische Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von Adam Slivka, M.D., Ph.D., Medizinischer Direktor der Gastroenterologie, Leiter der Endoskopie, Zentrum für Verdauungsstörungen der Universität Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA  
Jagwire Hochleistungs-Führungsdrähte, U.S.-Patent 5,379, 779 und europäische Patentnummern 949265276-2.305 und EP714315

\* Steife Schaftversion zur verbesserten Führung beim Vorschub anderer Instrumente \*\* Daten im Archiv der Boston Scientific Corporation

! Bitte beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanweisung

### Europäisches Zentrallager –

**Niederlande**  
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

**Europäisches Zentrale –**

**Paris**  
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

**Argentinien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

**Australien/Neuseeland**  
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

**Belgien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

**Brasilien**  
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

**Chile**  
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

**China – Guangzhou**  
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

**China – Peking**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

**China – Shanghai**  
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

**Dänemark** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

**Deutschland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 08000 723300 F: 08000 723319

### Finland

T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

**Frankreich**  
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

**Griechenland**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Grossbritannien** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

**Hongkong**  
T: +852 2360 7100 F: +852 2563 5276

**Indien – Bangalore**  
T: +91 80 2212 4922/9 F: +91 80 2207 5153

**Indien – Chennai**  
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

**Indien – Delhi**  
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

**Indien – Mumbai**  
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

**Irland** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

**Italien**  
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

**Kanada**  
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

**Kolumbien**  
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

### Korea

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

**Mexiko**  
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

**Mittlerer Osten/arabische Golfstaaten/Nordafrika**  
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

**Niederlande**  
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

**Norwegen** (Kostenfreie Rufnummer)  
T: 800 104 04 F: 800 101 90

**Österreich**  
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

**Polen**  
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

**Portugal**  
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

**Schweden**  
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 00

**Schweiz**  
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

**Spanien**  
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

**Süd Ost Asien – Malaysia**  
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

**Süd Ost Asien – Philippinen**  
T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

### Süd Ost Asien – Singapur

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

**Süd Ost Asien – Thailand**  
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

**Südost Europa**  
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

**Südafrika**  
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

**Taiwan**  
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

**Tschechische Republik**  
T: +420 236 331 901 F: +420 236 331 935

**Türkei**  
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

**Ungarn**  
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

**Uruguay**  
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

**Venezuela**  
T: +58 212 959 62756 F: +58 212 959 5328

**Boston Scientific**

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com