


*Jagwire*TM

Guide ad elevato rendimento

Boston
Scientific

**Agilità e
versatilità**

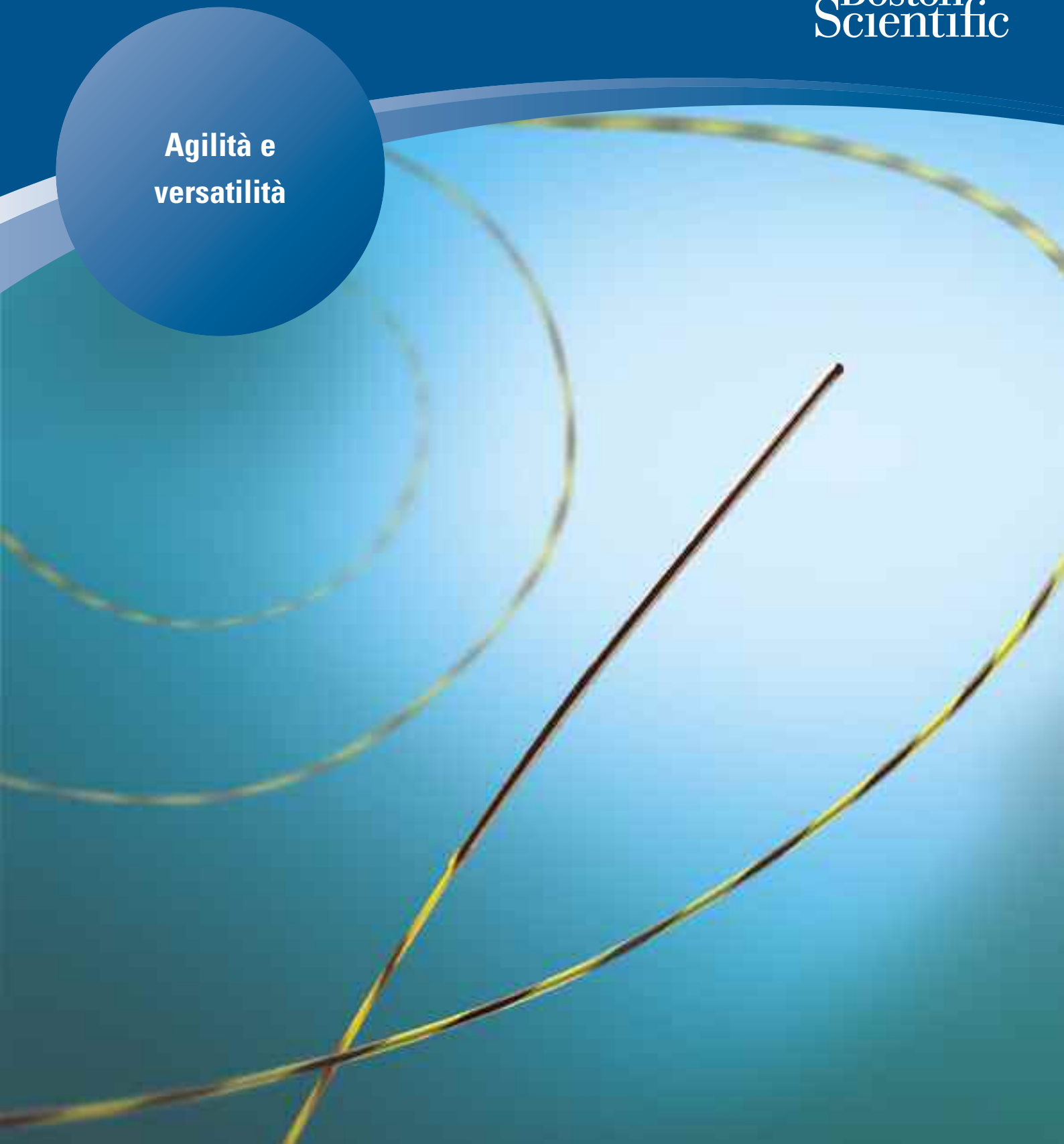

L'ampia gamma di guide ad elevato rendimento Jagwire offre nuove possibilità nelle procedure di ERCP.



La punta contenente tungsteno è stata specificamente progettata per la visualizzazione in fluoroscopia e l'accesso ai dotti.



Il rivestimento in Endoglide™ del corpo distale contribuisce a un posizionamento più fluido.

La punta contenente tungsteno favorisce la visualizzazione in fluoroscopia.**

Il tratto distale in materiale idrofilo di 5cm agevola l'incannulazione selettiva e il superamento di tratti con anatomia tortuosa.

Il corpo resistente al kinking

migliora il controllo durante la fase di avanzamento ed il supporto durante le fasi di scambio dei dispositivi.

Il motivo giallo e nero

agevola la visualizzazione in endoscopia riducendo la necessità di fare ricorso alla fluoroscopia durante lo scambio dei dispositivi.

La superficie prossimale antiscivolamento

non richiede un trattamento particolare e consente un accurato e preciso controllo sulla torsione della guida.



I dispositivi compatibili con i sistemi RX consentono il controllo indipendente della guida Jagwire e quindi una migliore incannulazione selettiva dei dotti.



Durante le procedure di ERCP è possibile bloccare la guida Jagwire in modo da rendere l'accesso più sicuro e agevolare lo scambio.

Informazioni per l'ordinazione

Numero d'ordine	Diam. est. (in) / (mm)	Configurazione del corpo	Rastremazione (in) / (mm)	Lunghezza (cm)	Tipo di punta
M0055656011	0,025 / 0,64	Standard	0,025-0,020 / 0,64-0,51	450	Diritta
M0055658011	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Diritta
M0055659011	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angolata
M0055660011	0,035 / 0,89	Rigido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Diritta
M0055661011	0,035 / 0,89	Rigido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angolata
M0055662011	0,038 / 0,97	Rigido*	0,038-0,027 / 0,97-0,69	260	Diritta
M00557681	0,025 / 0,64	Standard	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Diritta
M00556481	0,025 / 0,64	Rigido*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Diritta
M00556491	0,025 / 0,64	Rigido*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Angolata
M00557641	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta
M00557651	0,035 / 0,89	Standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata
M00557661	0,035 / 0,89	Rigido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta
M00557671	0,035 / 0,89	Rigido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata
M00556921	0,035 / 0,89	Estensibile standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta
M00556931	0,035 / 0,89	Estensibile standard	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata
M00556941	0,035 / 0,89	Estensibile rigido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Diritta
M00556951	0,035 / 0,89	Estensibile rigido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angolata
Jagtail™ RX					
M00556902	0,035 / 0,89	Segmento prossimale estensibile		200	Non disp.

Il rivestimento isolato*

consente di lasciare la guida in posizione durante la sfinterotomia.

Immagini cliniche gentilmente concesse da Adam Slivka, M.D., Ph.D., direttore medico del Gastrointestinal Laboratory, e Primario di endoscopia del Digestive Disorders Center, Università di Pittsburgh, Pittsburgh (PA), USA

Guida ad elevato rendimento Jagwire - Brevetto U.S.A. n. 5,379,779; brevetti europei n. 949265276-2,305 e EP714315

* La configurazione rigida del corpo migliora le capacità di supporto durante le fasi di scambio dei dispositivi

** I dati sono disponibili presso la Boston Scientific Corporation. Per informazioni complete fare riferimento alle Istruzioni per l'uso e le Avvertenze e precauzioni

Centro Europeo di Distribuzione - Paesi Bassi

T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Sede Centrale Europea - Parigi

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Argentina (Numero Verde)

T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

Australia / Nuova Zelanda

T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Austria

T: +43 1 60 8100 F: +43 1 60 8100 60

Brasile

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Belgio (Numero Verde)

T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Canada

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Cile

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Cina - Beijing

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

Cina - Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Cina - Shanghai

T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombia

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corea

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danimarca (Numero Verde)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Europa Sud Orientale

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlandia

T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

Francia

T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Germania (Numero Verde)

T: 08000 723300 F: 08000 723319

Grecia

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong

T: +852 2860 7100 F: +852 2563 5276

India - Bangalore

T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

India - Chennai

T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

India - Delhi

T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

India - Mumbai

T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlanda

T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italia

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Medio Oriente / Golfo / Nord Africa

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Messico

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Norvegia (Numero Verde)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Paesi Bassi

T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

Polonia

T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portogallo

T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

Regno Unito (Numero Verde)

T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Repubblica Ceca

T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Spagna

T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Sud Africa

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Sud Est Asia - Filippine

T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

Sud Est Asia - Malesia

T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Sud Est Asia - Singapore

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Sud Est Asia - Thailandia

T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Svezia

T: +46 42 154 118 F: +46 42 162 477

Swizzera

T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turchia

T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Ungheria

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com