


*Jagwire*TM

Guías de alto rendimiento

Boston
Scientific

**Agilidad y
versatilidad**

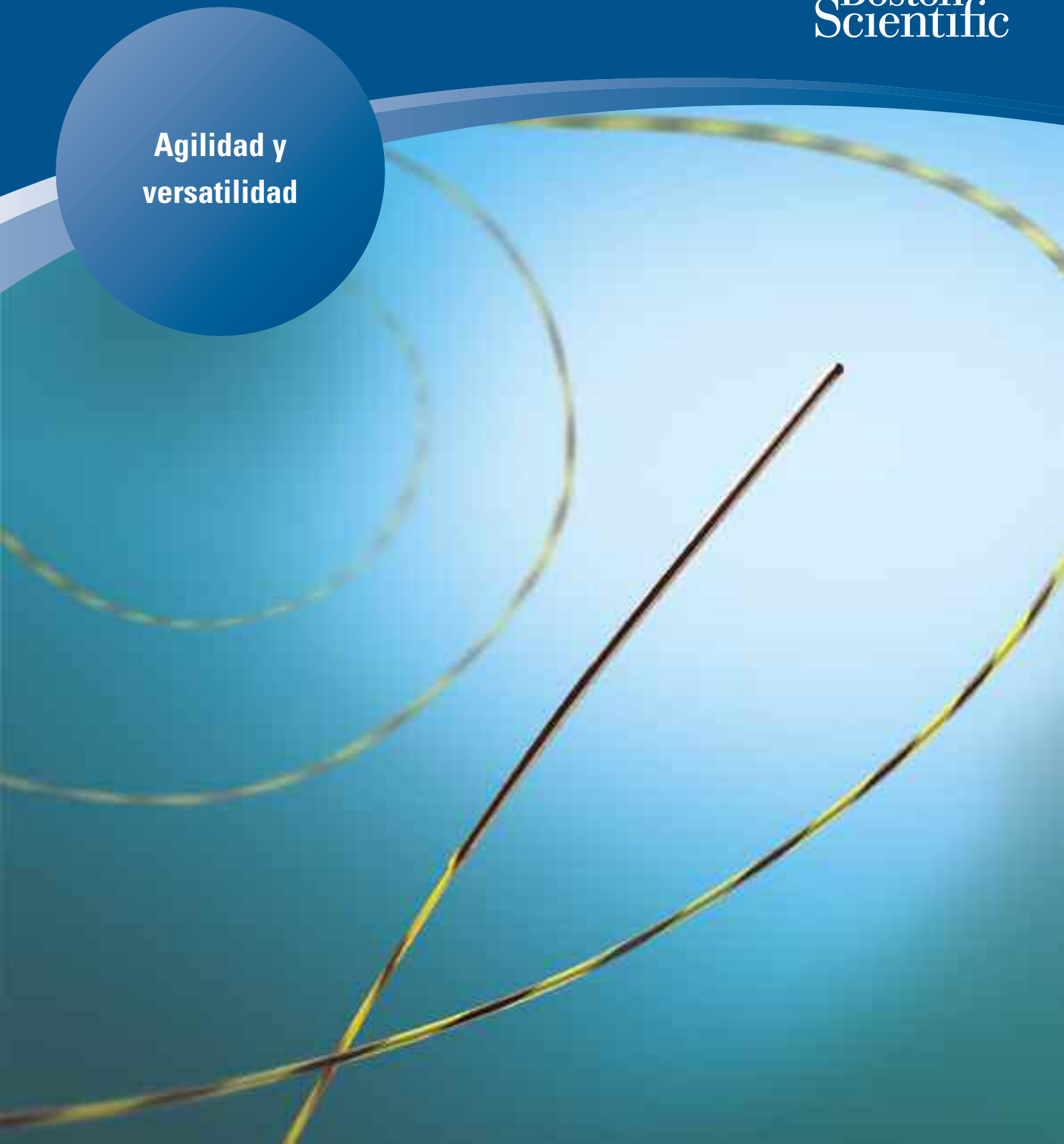

La amplia gama de guías de alto rendimiento Jagwire ofrece más posibilidades en la realización de CPRE.



Diseño específico de la punta con relleno de tungsteno para la visualización fluoroscópica y el acceso ductal.



El revestimiento Endoglide™ del cuerpo distal permite un deslizamiento más fluido.

La punta con relleno de tungsteno mejora la visualización fluoroscópica.**

El cuerpo distal hidrofílico de 5 cm facilita la canulación selectiva y la progresión a través de anatomías tortuosas.

El cuerpo resistente al acodamiento facilita el control durante el avance y el apoyo durante el intercambio de instrumentos.

El recubrimiento en negro y amarillo ofrece una visualización endoscópica clara, reduciendo la necesidad de usar fluoroscopia durante el intercambio de instrumentos.

La superficie proximal antideslizante no necesita manipulación especial y proporciona un control preciso de la torsión.



Los dispositivos compatibles RX permiten un control independiente de las guías Jagwire para mejorar la canulación selectiva de los conductos.



Las guías Jagwire se pueden bloquear en su sitio durante la CPRE para lograr un acceso más seguro y un intercambio más sencillo.

Recubrimiento aislante* La guía se puede dejar en su sitio durante la esfinterotomía.

Información para pedidos

Número de pedido	D.E. (in) / (mm)	Diseño del cuerpo	Punta cónica (in) / (mm)	Longitud (cm)	Tipo de punta
M0055656011	0,025 / 0,64	Estándar	0,025-0,020 / 0,64-0,51	450	Recta
M0055658011	0,035 / 0,89	Estándar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Recta
M0055659011	0,035 / 0,89	Estándar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angular
M0055660011	0,035 / 0,89	Cuerpo rígido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Recta
M0055661011	0,035 / 0,89	Cuerpo rígido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	450	Angular
M0055662011	0,038 / 0,97	Cuerpo rígido*	0,038-0,027 / 0,97-0,69	260	Recta
M00557681	0,025 / 0,64	Estándar	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Recta
M00556481	0,025 / 0,64	Cuerpo rígido*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Recta
M00556491	0,025 / 0,64	Cuerpo rígido*	0,025-0,020 / 0,64-0,51	260	Angular
M00557641	0,035 / 0,89	Estándar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Recta
M00557651	0,035 / 0,89	Estándar	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angular
M00557661	0,035 / 0,89	Cuerpo rígido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Recta
M00557671	0,035 / 0,89	Cuerpo rígido*	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angular
M00556921	0,035 / 0,89	Estándar extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Recta
M00556931	0,035 / 0,89	Estándar extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angular
M00556941	0,035 / 0,89	Cuerpo rígido*, extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Recta
M00556951	0,035 / 0,89	Cuerpo rígido*, extensible	0,035-0,027 / 0,89-0,69	260	Angular
Jagtail™ RX					
M00556902	0,035 / 0,89	Segmento proximal extensible		200	N/D

Imágenes clínicas cedidas por Adam Silva, M.D., Ph.D., director médico del laboratorio de gastroenterología, Jefe de endoscopia, Digestive Disorders Center, Universidad de Pittsburgh, PA, EE.UU. Guía de alto rendimiento Jagwire, patente de EE.UU. n° 5.379.779 y patentes europeas n° 949265276-2.305 y EP174315

* El diseño del cuerpo rígido mejora el soporte durante el intercambio de instrumentos

** Datos en el archivo de Boston Scientific Corporation

† Consulte las instrucciones de uso y el apartado de advertencias y precauciones para obtener la información completa

Centro de Distribución Europeo – Los Países Bajos

T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

European Headquarters – Paris

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Alemania (Llamada gratuita)

T: 08000 723300 F: 08000 723319

Argentina (Llamada gratuita)

T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

Australia / Nueva Zelanda

T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Austria

T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Belgica (Llamada gratuita)

T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Brasil

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canadá

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chile

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

China – Beijing

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

China – Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

China – Shanghai

T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombia

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corea

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Dinamarca (Llamada gratuita)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

España

T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Europa Suroriental

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlandia

T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

Francia

T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Gran Bretaña (Llamada gratuita)

T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grecia

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong

T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hungría

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

India – Bangalore

T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

India – Chennai

T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

India – Delhi

T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

India – Mumbai

T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlanda (Llamada gratuita)

T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italia

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Los Países Bajos

T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

México

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Noruega (Llamada gratuita)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Oriente Medio / Golfo Pérsico / África del Norte

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Polonia

T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal

T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

República Checa

T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Sudáfrica

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Suecia

T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suiza

T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Sureste Asia – Filipinas

T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

Sureste Asia – Malasia

T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Sureste Asia – Singapur

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Sureste Asia – Tailandia

T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Taiwán

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquia

T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com