

Trapezoid™ RX

Drahtgeführter Steinextraktionskorb

TRAPEZOID RX DRAHTGEFÜHRTER STEINEXTRAKTIONSKORB

Bestellnummer	Beschreibung	Korbdurchmesser (cm)	Erforderlicher Arbeitskanal (mm)	Empfohlener Führungsdraht* (in)	Empfohlener Führungsdraht* (mm)
M00510860	Trapezoid RX	1,5	3,2	0,035"	0,89
M00510870	Trapezoid RX	2,0	3,2	0,035"	0,89
M00510880	Trapezoid RX	2,5	3,2	0,035"	0,89
M00510890	Trapezoid RX	3,0	3,2	0,035"	0,89

*Empfohlener Führungsdraht: 0,035" (0,89 mm) Hydra Jagwire™ Führungsdraht

ALLIANCE™ II DRUCKSPRITZENSYSTEM

Bestellnummer	Beschreibung
M00550620	ALLIANCE II Handgriff**

**Empfohlener Lithotrypterhandgriff

Europäische Zentrale – Paris

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Argentinien

T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550

Australien/Neuseeland

T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 9316 5528

Balkanstaaten

T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

Belgien (Kostenfreie Rufnummer)

T: 080094 494 F: 080093 343

Brasilien

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Bulgarien

T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09

Chile

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

China – Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

China – Peking

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

China – Shanghai

T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100

Dänemark (Kostenfreie Rufnummer)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Deutschland (Kostenfreie Rufnummer)

T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319

Finnland (Kostenfreie Rufnummer)

T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86

Frankreich

T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31

Griechenland

T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

Großbritannien & Irland

T: +44 1727 886533 F: +44 1727 830371

Hongkong

T: +852 2360 7100 F: +852 2563 5276

Indien – Bangalore

T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106

Indien – Chennai

T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

Indien – Delhi

T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

Indien – Mumbai

T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

Italien

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Kanada

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Kolumbien

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Korea

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Malaysia

T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866

Mexiko

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Mittlerer Osten/Arabische Golfstaaten/Nordafrika

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Niederlande

T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265

Norwegen (Kostenfreie Rufnummer)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Österreich

T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 30 05 1030

Philippinen

T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

Polen

T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

Portugal

T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29

Schweden (Kostenfreie Rufnummer)

T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35

Schweiz (Kostenfreie Rufnummer)

T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

Singapur

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Spanien

T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045

Südafrika

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Thailand

T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

Tschechische Republik

T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334

Türkei – Ankara

T: +90 312 447 98 50 F: +90 312 447 98 54

Türkei – Istanbul

T: +90 212 327 78 00 F: +90 212 327 74 27

Ungarn

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

Alle genannten Handelsmarken sind das Eigentum der entsprechenden Inhaber. ACHTUNG: Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen dürfen diese Vorrichtungen nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes verwendet werden. Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen finden Sie in der Produktbeilage, die mit jeder Vorrichtung geliefert wird. PSST IC 1828 Gedruckt in UK von Gosling.

© 2009 Boston Scientific Corporation oder seine Konzerngesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. DINEND2153GA

Trapezoid™ RX

Drahtgeführter Steinextraktionskorb

Boston Scientific



RX Biliary System™
A difference you can feel.™

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

Das Endoskop ist Ihre Grundausstattung, aber es ist Ihr Gefühl, das Sie zu einer erfolgreichen Prozedur befähigt. Die Produkte des RX Biliary Systems bieten Ihnen durch verbesserte Manipulationsmöglichkeiten perfekte Kontrolle und erleichterten Zugang während der ERCP. Dies ergibt für Sie...*einen Unterschied, den Sie fühlen können.*

Im Laufe der Jahre hat Boston Scientific das Vertrauen und die Treue von Kunden in der ganzen Welt gewonnen, die das RX Biliary System routinemäßig für ihre ERCPs verwenden. Unser langjähriger Erfolg in der Entwicklung von RX biliären Produkten hat es ermöglicht, die Standards von ERCP-Verfahren zu optimieren. Durch die Innovation und Weiterentwicklung von Produkten geben wir Ihnen Kontrolle und Zugang direkt "in die Fingerspitzen".

FÜR OPTIMALE LEISTUNG ENTWICKELT

Die Flexi-Stiff™ Katheterkonstruktion und der Korb aus einer Metalllegierung machen einen deutlichen Unterschied bei der Gallensteinentfernung aus

- ◆ Flexibel und stabil – der Flexi-Stiff Katheter bietet eine ausgezeichnete Anpassung an die Anatomie der Gallengänge und lässt sich gleichzeitig hervorragend vorschieben und handhaben
- ◆ Die Korbsymmetrie bleibt durch die Metalllegierung des Korbmaterials auch nach einer schwierigen Steinmanipulation erhalten

OPTIONALE MECHANISCHE NOTFALL-LITHOTRYPSIE

Der Alliance™ II Druckspritzenhandgriff wurde so konstruiert, dass er in Kombination mit dem Trapezoid Steinextraktionskorb eine Notfall-Lithotrypsieeinheit bildet, wobei das Endoskop in seiner Position bleibt


- ◆ Der Handgriff des Trapezoid kann zur Notfall-Lithotrypsie schnell in den Alliance™ II Handgriff eingespannt werden. Diese Kombination dient somit als mechanische Kraftverstärkung zum Zertrümmern von großen, schwierigen Steinen, die im Korb "eingefangen" sind

Trapezoid™ RX

Drahtgeführter Steinextraktionskorb



- ◆ Die speziell gefertigte Spitze dient als Sollbruchstelle, wenn der Stein nicht zertrümmert werden kann. Dadurch verringert sich das Risiko eines Einklemmens des Korbes.

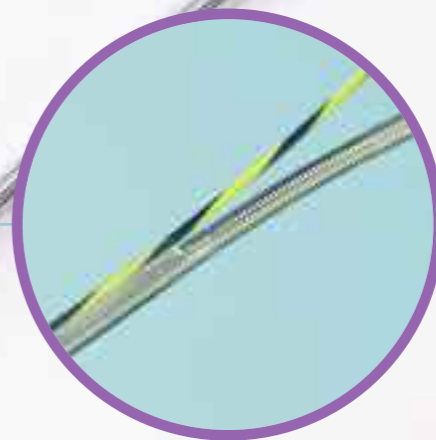

DER FÜHRUNGSDRAHTZUGANG BLEIBT ERHALTEN

Das distal seitlich angebrachte Führungsdrahtlumen erleichtert das Einführen in den Gallengang über Führungsdraht

- ◆ Durch den Vorschub über den Führungsdraht lässt sich der Korb gezielt hinter die Steine platzieren und erleichtert dadurch die Extraktion
- ◆ Das distal seitlich angebrachte Führungsdrahtlumen nimmt sowohl den 0,035" (0,89 mm) kurzen 260 cm als auch den 450 cm herkömmlichen Führungsdraht auf, um der bevorzugten Arbeitsweise des Arztes gerecht zu werden
- ◆ Beim Trapezoid kann bei liegendem Führungsdraht Kontrastmittel für eine Cholangiographie ohne Produktwechsel gespritzt werden
- ◆ Das Fixiersystem vereinfacht die mehrfache Reinigung des Gallengangs während der Steinextraktion, wobei die Position des Führungsdrahts erhalten bleibt
- ◆ Der Führungsdraht kann während der Prozedur jederzeit fixiert oder freigegeben werden