

Trapezoid™ RX

Basket per recupero calcoli filo-guidato

BASKET PER RECUPERO CALCOLI FILO-GUIDATO TRAPEZOID RX

Numero d'ordine	Descrizione	Diametro del basket aperto (cm)	Canale di lavoro richiesto (mm)	Filo guida raccomandato*	
				(in)	(mm)
M00510860	Trapezoid RX	1,5	3,2	0,035"	0,89
M00510870	Trapezoid RX	2,0	3,2	0,035"	0,89
M00510880	Trapezoid RX	2,5	3,2	0,035"	0,89
M00510890	Trapezoid RX	3,0	3,2	0,035"	0,89

* Filo guida raccomandato: Filo guida Hydra Jagwire™ da 0,035" (0,89 mm)

SISTEMA DI GONFIAGGIO ALLIANCE™ II

Numero d'ordine	Descrizione
M00550620	Impugnatura per il gonfiaggio (ciascuna)

Sede Centrale Europea

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Argentina

T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550

Australia/Nuova Zelanda

T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 9316 5528

Austria

T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 3005 1030

Balceni

T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

Belgio (Numero Verde)

T: 080094 494 F: 080093 343

Brasile

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Bulgaria

T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09

Canada

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Cile

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Cina - Beijing

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

Cina - Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Cina - Shanghai

T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100

Colombia

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corea

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danimarca (Numero Verde)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Filippine

T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

Finlandia (Numero Verde)

T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86

Francia

T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31

Germania (Numero Verde)

T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319

Grecia

T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

Hong Kong

T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

India - Bangalore

T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106

India - Chennai

T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

India - Delhi

T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

India - Mumbai

T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

Italia

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Malesia

T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866

Medio Oriente / Golfo / Nord Africa

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Messico

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Norvegia (Numero Verde)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Paesi Bassi

T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265

Polonia

T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

Portogallo

T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29

Regno Unito e Irlanda

T: +44 1727 866633 F: +44 1727 830371

Repubblica Ceca

T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334

Singapore

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Spagna

T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045

Sud Africa

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Svezia (Numero Verde)

T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35

Svizzera (Numero Verde)

T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

Tailandia

T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turchia - Ankara

T: +90 312 447 98 50 F: +90 312 447 98 54

Turchia - Istanbul

T: +90 212 327 78 00 F: +90 212 327 74 27

Ungheria

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

Trapezoid™ RX

Basket per recupero calcoli filo-guidato

Boston Scientific



RX Biliary System™
A difference you can feel.™

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

L'endoscopio vi mostra la strada, ma è il vostro tatto a portarvi nel posto giusto. I dispositivi che costituiscono l'RX Biliary System sono stati sviluppati per fornire un accesso e un controllo tali per cui la sensazione di risposta del dispositivo è veramente una... *differenza che si sente*.

Col passare degli anni, la Boston Scientific si è guadagnata la fiducia e la fedeltà di clienti in tutto il mondo che hanno adottato l'RX Biliary System per il loro uso quotidiano. Il nostro successo nello sviluppo di dispositivi biliari RX ad alta performance ci ha permesso di cambiare il panorama delle procedure ERCP. Innovando e migliorando sempre più i nostri prodotti, abbiamo messo il controllo e l'accesso nelle...vostre mani.

PROGETTATO PER UNA PERFORMANCE OTTIMALE

Il design del catetere Flexi-Stiff™ e il basket in lega metallica fanno la differenza nel recupero dei calcoli

- ◆ Flessibile e robusto, il design del catetere Flexi-Stiff è stato sviluppato per curvarsi con l'anatomia biliare e mantenere una pushability e una sensazione tattile ottime
- ◆ Il materiale del basket, in lega metallica, è stato progettato per mantenere la simmetria del basket, anche dopo un'operazione difficile ai calcoli



OPZIONE DI ROTTURA MECCANICA DEL CALCOLO

Dispositivo di gonfiaggio Alliance™ Il progettato per rompere i calcoli con l'endoscopio in posizione


- ◆ Il dispositivo di gonfiaggio può essere usato per rompere calcoli grandi e difficili intrappolati all'interno del basket

Trapezoid™ RX

Basket per recupero calcoli filo-guidato



- ◆ La punta si libera per facilitare la rimozione del basket se il calcolo non si rompe, riducendo il rischio di incarceration del calcolo nel del basket

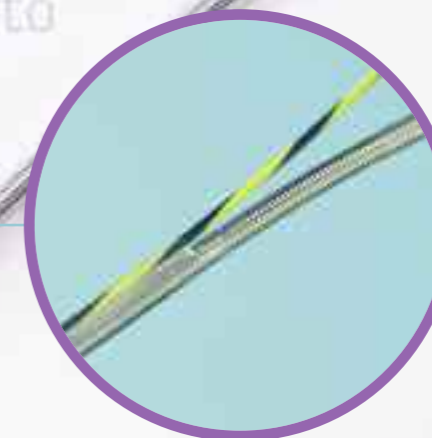

MANTIENE L'ACCESSO DEL FILO GUIDA

Il canale del filo guida distale con accesso laterale facilita l'accesso al dotto

- ◆ Realizzato con accesso laterale per condurre il basket oltre i calcoli e aiutare a recuperarli
- ◆ Il canale distale con accesso laterale accetta fili guida da 0,035" (0,89 mm) corti, 260 cm, o fili guida tradizionali da 450 cm per adattarsi alle preferenze dei medici
- ◆ L'iniezione con il filo in posizione si concilia con la colangiografia senza sostituire il dispositivo
- ◆ Il dispositivo di bloccaggio del filo consente molteplici passaggi nel dotto durante il recupero dei calcoli mantenendo il filo guida in posizione
- ◆ Il filo può essere bloccato e sbloccato in qualsiasi momento durante la procedura