

Trapezoid™ RX

Cesta de extracción con guía

CESTA DE EXTRACCIÓN CON GUÍA

Nº ref.	Descripción	Diámetro de la cesta abierta (cm)	Canal útil necesario (mm)	Guía recomendada* (in) (mm)	
M00510860	Trapezoid RX	1,5	3,2	0,035"	0,89
M00510870	Trapezoid RX	2,0	3,2	0,035"	0,89
M00510880	Trapezoid RX	2,5	3,2	0,035"	0,89
M00510890	Trapezoid RX	3,0	3,2	0,035"	0,89

*Guía recomendada: Guía Hydra Jagwire™ de 0,035" (0,89 mm)

SISTEMA DE INFLADO ALLIANCE™ II

Nº ref.	Descripción
M00550620	Mango de inflado (cada uno)

Sede Central Europea
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99
Alemania (Llamada gratuita)
T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319
Argentina
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550
Australia/Nueva Zelanda
T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 9316 5528
Austria
T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 30 05 1030
Balcanes
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Belgica (Llamada gratuita)
T: 080094 494 F: 080093 343
Brasil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212
Bulgaria
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09
Canadá
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396
Chile
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915
China - Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

China - Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789
China - Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100
Colombia
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761
Corea
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776
Dinamarca (Llamada gratuita)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05
España
T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045
Filipinas
T: +63 2 887 3239 F: +63 2 687 3047
Finlandia (Llamada gratuita)
T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86
Francia
T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31
Gran Bretaña & Irlanda
T: +44 1727 866633 F: +44 1727 830371
Grecia
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836
Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hungria
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41
India - Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106
India - Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695
India - Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024
India - Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783
Italia
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200
Los Países Bajos
T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265
Malasia
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866
México
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28
Noruega (Llamada gratuita)
T: 800 104 04 F: 800 101 90
Oriente Medio/Golfo Pérsico/África del Norte
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445
Polonia
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29
República Checa
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334
Singapur
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899
Sudáfrica
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077
Suecia (Llamada gratuita)
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35
Suiza (Llamada gratuita)
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787
Tailandia
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818
Taiwán
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270
Turquía - Ankara
T: +90 312 447 98 50 F: +90 312 447 98 54
Turquía - Estambul
T: +90 212 327 78 00 F: +90 212 327 74 27
Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212
Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

Todas las marcas registradas citadas son propiedad de sus respectivos propietarios. PRECAUCIÓN: Las leyes restringen la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción de los mismos. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se incluyen en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para su utilización solamente en países en los que el producto este registrado en las autoridades sanitarias pertinentes.
PSST IC 1828 Impreso en UK por Gosling.

Trapezoid™ RX

Cesta de extracción con guía

Boston
Scientific



Boston
Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com

RX Biliary System™
A difference
you can feel.™

© 2009 Boston Scientific Corporation o sus
afiliados. Todos los derechos reservados.
DINEND2153SA

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

El endoscopio le muestra el camino, pero su sentido del tacto será el que le conduzca hasta donde debe ir. Los mecanismos que componen el sistema biliar RX han sido diseñados para permitir el acceso y proporcionarle control al tiempo que transmite una sensación de fiabilidad del dispositivo. Todo ello constituye... una diferencia que puede sentir.

Con el transcurso del tiempo, Boston Scientific ha logrado la confianza y la lealtad de clientes de todo el mundo, que han optado por utilizar habitualmente el sistema biliar RX. Nuestro amplio historial de éxitos en el diseño de dispositivos biliares de gran rendimiento nos ha permitido cambiar las perspectivas de los procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Gracias a la innovación y el perfeccionamiento de nuestros productos, el acceso correcto y el control estarán en sus manos.

DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

La estructura del catéter Flexi-Stiff™ y la cesta de aleación metálica aporta una diferencia distintiva en la extracción de cálculos

- ◆ Flexible y robusto, el diseño del catéter Flexi-Stiff ha sido diseñado para curvarse en función de la anatomía y seguir conservando su excelente fuerza de empuje y sensación táctil
- ◆ El material de la cesta de aleación metálica está diseñado para mantener la simetría de la cesta incluso tras la manipulación de los cálculos más difíciles


POSIBILIDAD DE LITOTRICIA MECÁNICA DE LOS CÁLCULOS

El dispositivo de inflado Alliance™ II está diseñado para triturar los cálculos con el endoscopio colocado en su sitio


- ◆ El dispositivo de inflado se puede utilizar como medio mecánico para triturar cálculos grandes y difíciles atrapados en la cesta

Trapezoid™ RX

Cesta de extracción con guía

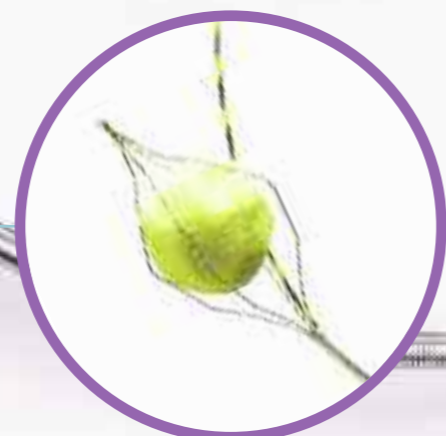

- ◆ La punta se desprende para facilitar la extracción de la cesta en caso de que el cálculo no se rompa, con lo que se reduce así el riesgo de impactación de la cesta

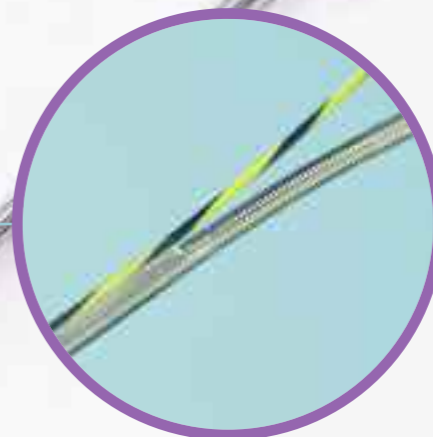

MANTIENE EL ACCESO DE LA GUÍA

El canal de la guía con puerto lateral distal facilita el acceso al conducto

- ◆ Puerto lateral diseñado para que la cesta sobrepase la ubicación de los cálculos y contribuya a recuperarlos
- ◆ El canal del puerto lateral acepta guías de 0,035" (0,89 mm) cortas de 260 cm o tradicionales de 450 cm para adaptarse a las preferencias técnicas del médico
- ◆ La inyección con la guía colocada permite realizar la colangiografía sin tener que intercambiar el dispositivo
- ◆ El mecanismo de bloqueo de la guía posibilita el realizar múltiples barridos del conducto durante la extracción de cálculos al mantener la posición de la guía
- ◆ La guía se puede bloquear y desbloquear en cualquier momento durante el procedimiento