

Rotatable Snare

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Ansa monouso per polipectomia

L'ansa rotante è progettata per fornire una **rotazione di 360°** per agevolare l'accesso a polipi difficili.



Rotatable Snare

Ansa monouso per polipectomia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Rivestimento in Polyglide™


- Rotazione controllabile sia in senso orario che antiorario
- Attrito minimizzato sia in fase di apertura che di chiusura dell'ansa

Filo Intrecciato Medio-Rigido

- Progettato per catturare i polipi anche in anatomie tortuose
- Garantisce il controllo del filo

Indicazione a caldo e a freddo

- Adatta alle diverse esigenze cliniche

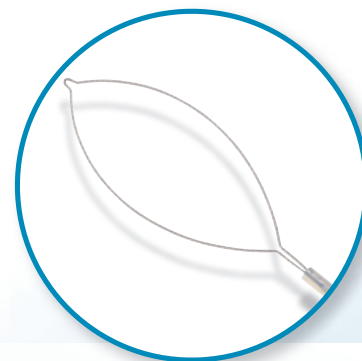

Specifiche del Prodotto

Larghezza del cappio - 13 mm, 20 mm

Diametro della guaina - 2,4 mm

Lunghezza di lavoro - 240 cm

Diam. Canale operativo - 2,8 mm

Informazioni per l'ordine

Codice prodotto	Descrizione	Rigidità	Larghezza del cappio (mm)	Diam. Est. Catetere (mm)	Lunghezza utile (cm)	Canale di lavoro minimo (mm)	Unità
M00561821	Ovale piccola	Medio rigida	13	2,4	2,8	240	Box 10
M00561831	Ovale media	Medio rigida	20	2,4	2,8	240	Box 10

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l'uso sono riportate sull'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo.

ATTENZIONE: la legge limita la vendita di questi dispositivi esclusivamente su prescrizione medica. Queste informazioni possono essere utilizzate esclusivamente nei paesi in cui il prodotto è stato debitamente registrato presso le autorità sanitarie competenti.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2016 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate.

Tutti i diritti riservati.

ENDO-393203-AA May 2016