

**Boston  
Scientific**

**LATITUDE™ PROGRAMMERINGSSYSTEM, MODELL 3300  
TILLÄGG TILL ANVÄNDARHANDBÖCKER OM PULSGENERATORER\***

\*tekniska handböcker för läkare och referensmanualer

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældret version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Ne izlizzare.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne izlizzare.  
Elavult versió. Ne használjál.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Det här tillägget ger en översikt över de huvudsakliga skillnaderna mellan modell 3120 av ZOOM® LATITUDE programmeringssystem och modell 3300 av LATITUDE programmeringssystem (eventuellt ännu inte tillgängligt i alla länder).

Aktuella pulsgeneratorhandböcker beskriver pulsgeneratorernas egenskaper och funktioner när de används med modell 3120 av programmeringssystemet och en pacemakersystemanalysator (PSA), dvs. modell 3145. Det här tillägget är ett komplement till innehållet i dessa handböcker.

NOTERA: Programmeringssystemet av modell 3300 har samma grundläggande funktioner och samma avsedda användning som programmeringssystemet av modell 3120 (figur 1).


## Primära resurser

Separata handböcker beskriver modell 3300 av LATITUDE programmeringssystem. Läs följande först:

- Användarhandboken till LATITUDE programmeringssystem, modell 3300
- Användarhandboken om patientdatahantering, modell 3931
- Användarhandboken om nätverk och anslutningsbarhet, modell 3924

NOTERA: Information om PSA-funktioner finns i användarhandboken för pacemakersystemanalysatorn (PSA), modell 3922.

Elektroniska exemplar finns på [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). Om du vill ha tryckta exemplar kan du kontakta Boston Scientific med hjälp av informationen på baksidan av det här tillägget.

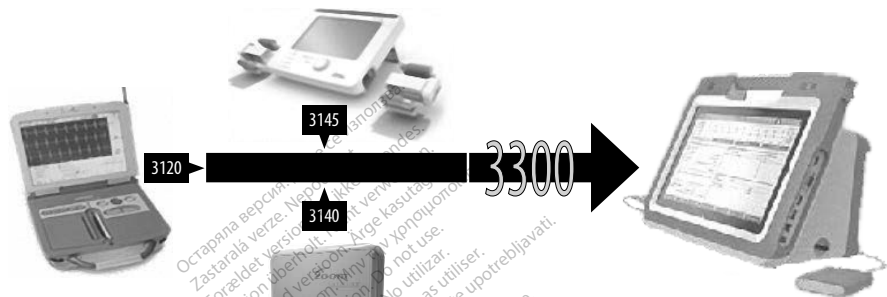

Figur 1. Modell 3300 av programmeringsystemet

## Huvudsakliga skillnader

### Programvara

- Modell 3868 av ICD/CRT-D Support Application ersätter modell 2868.
  - Modell 3868 ersätter även modell 2868 inom pulsgeneratorns röntgenidentifierare.

- Modell 3869 av Pacemaker/CRT-P Support Application ersätter modell 2869.
  - Modell 3869 ersätter även modell 2869 inom pulsgeneratorns röntgenidentifierare.
- Modell 3909 av systemprogramvaran med Quickstart-appen ersätter modell 3923.

### **Nätverk**

- Det går nu att överföra patientdata trådlöst via Bluetooth®.

### **Knappar**

- En RÖD AKUT-knapp ersätter de fasta funktionsknapparna AKUT-PACE, AKUT-CHOCK och AVBRYT BEHANDLING. Den har stöd för PSA AKUT PACE, AKUT-PACE, AKUT CHOCK och Avbryt.
- De fasta funktionsknapparna INTERROGERA och PROGRAMMERA ersätts av programmerbara knappar.
- Realtidsloggfunktionen ersätter de fasta funktionsknapparna för pappershastighet. Programmerbara knappar ersätter de fasta funktionsknapparna Kalibrera och Baslinje.

### **Datalagring**

- USB ersätter diskettenheten/diskettalternativet.

### **Skriva ut**

- Stöd för extern skrivare via USB och Bluetooth® ersätter den inbyggda diagramskrivaren.

### **Zoom Wireless Transmitter**

- Intern maskinvara ersätter Zoom Wireless Transmitter.

## **Stöd för RF-telemetri**

Följande modeller använder endast telemetri med telemetrihuvud till dess att SRD-telemetri har certifierats i enlighet med radioutrustningsdirektivet för modell 3300 av programmeraren:

### COGNIS/TELIGEN-serien

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

### INGENIO-serien

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278
- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

## PROGENY-serien

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

## Äldre pulsgeneratorer

- Programmerarmodell 3300 har stöd för de senaste pulsgeneratorerna från Boston Scientific. Om du vill veta mer om vilka pulsgeneratormodeller som stöds kan du kontakta Boston Scientific.

## Varumärkesmeddelande

Följande är varumärken som tillhör Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag: LATITUDE och ZOOM.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG

# Boston Scientific



92059496-011 SV 2017-02



TILLVERKARE

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

TILLVERKAS VID

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

AUKTORISERAD REPRESENTANT INOM EUROPEISKA UNIONEN

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

AUS

ADRESS TILL AUSTRALIENSISK SPONSOR

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.