



**3300-AS MODELLSZÁMÚ LATITUDE™
PROGRAMOZÓRENDSZER
KIEGÉSZÍTÉS A PULZUSGENERÁTOROK HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓIHOZ***

***Műszaki kézikönyvek és Referencia útmutatók
orvosok részére**

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantot.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi verzió. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke bruges.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarela verzija. A nu se utiliza.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Ez a kiegészítés részletes áttekintést nyújt a 3120-as modellszámú ZOOM® LATITUDE programozórendszer és a 3300-as modellszámú LATITUDE programozórendszer közötti különbségekről (előfordulhat, hogy az utóbbi modell még nem kapható minden földrajzi területen).

A pulzusgenerátorok aktuális útmutatói a 3120-as programozórendszerrel és analízátorral (PSA), például a 3145-ös modellel történő használat esetén elérhető szolgáltatásokat és funkciókat ismertetik. Ez a dokumentáció kiegészíti az említett útmutatók tartalmát.

MEGJEGYZÉS: A 3300-as modellszámú programozórendszer és a 3120-as modellszámú programozórendszer rendeltetése és alapfunkciói megegyeznek (1. ábra).


Elsődleges források

A 3300-as modellszámú LATITUDE programozórendszer leírását külön használati útmutatók tartalmazzák. Először a következő útmutatókat olvassa el:

- LATITUDE programozórendszer kezelői kézikönyve, 3300-as modell
- Betegadatok kezelése kezelői kézikönyv, 3931-es modell
- Hálózati és csatlakozási kezelői kézikönyv, 3924-es modell

MEGJEGYZÉS: A PSA funkció ismertetését a 3922-es modellszámú analízátor kezelői kézikönyve tartalmazza.

A dokumentumok elektronikus példányai a www.bostonscientific-elabeling.com webhelyen érhetők el. A nyomtatott példányokért forduljon a Boston Scientific vállalathoz a kiegészítés hátlapján található elérhetőségen.

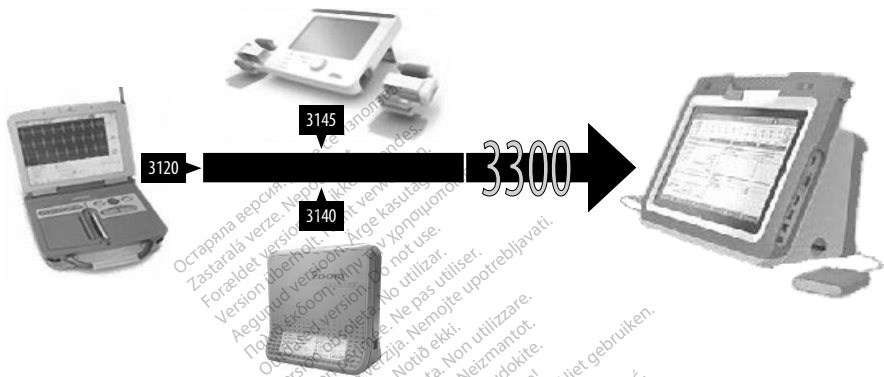

1. ábra: 3300-as modellszámú programozórendszer

Fő különbségek

Szoftver

- A 3868-as modellszámú ICD/CRT-D támogatási alkalmazás váltja fel a 2868-as modellszámú alkalmazást.
 - A 3868-as modell a PG röntgenazonosítóban is felváltja a 2868-as modellt.
- A 3869-es modellszámú Pacemaker/CRT-P támogatási alkalmazás váltja fel a 2869-es modellszámú alkalmazást.

- A 3869-es modell a PG röntgenazonosítóban is felváltja a 2869-as modellt.
- A 3909-es modellszámú rendszerszoftver és a gyorsindítási alkalmazás váltja fel a 3923-as modellszámú alkalmazást.

Hálózat

- A betegadatok vezetékek nélküli átvitele mostantól Bluetooth®-kapcsolaton keresztül lehetséges.

Billentyűk

- A RED STAT gomb váltja fel a STAT PACE (Statikus ingerlés), a STAT SHOCK (Statikus sokkolás) és a DIVERT THERAPY (Terápia elutasítása) funkcióbillentyűt. Támogatást nyújt a PSA STAT ingerlés, a STAT ingerlés és az elutasítás funkciójához.
- Az INTERROGATE és a PROGRAM funkcióbillentyűt szoftvergomb váltja fel.
- Valós idejű naplózási funkció váltja fel a papírsebességet állító funkcióbillentyűket. Szoftvergomb váltja fel a kalibrálás és az alapérték funkcióbillentyűjét.

Adattárolás

- USB váltja fel a hajlékonylemez-meghajtót.

Nyomtatás

- USB- és Bluetooth®-kapcsolaton keresztül használható külső nyomtató váltja fel a belső szalagos rögzítőt.

Zoom Wireless Transmitter

- Belső hardvereszköz váltja fel a Zoom Wireless Transmitter eszközt.

RF telemetriás támogatás

Az alábbi modellek csak pálcás telemetriát használnak, amíg a kis hatótávolságú készülék (SRD) telemetriát a rádiókészülékekre vonatkozó irányelv (Radio Equipment Directive, RED) szerint minősítik a 3300-as típusú programozónál:

COGNIS/TELIGEN termékcsalád

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

INGENIO termékcsalád

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278
- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

PROGENY termékcsalád

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

Korábbi pulzuszgenerátorok

- A 3300-as modellszámú programozó támogatja a legújabb Boston Scientific pulzuszgenerátorokat. Ha szükséges, a támogatott pulzuszgenerátorokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Boston Scientific vállalathoz.

Védjegynyilatkozat

A következők a Boston Scientific Corporation vagy kapcsolódó vállalkozásainak védjegyei: LATITUDE és ZOOM.

A Bluetooth® a Bluetooth® SIG bejegyzett védjegye.

Boston Scientific



92059496-015 HU 2017-02



GYÁRTÓ

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

GYÁRTÁS DÁTUMA

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

HIVATALOS KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

AUS

AUSZTRÁLIAI SZPONSZOR CÍME

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.