

**Boston
Scientific**

**SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE LATITUDE™,
MODELLO 3300
SUPPLEMENTO AI MANUALI DEI GENERATORI D'IMPULSI***

*Manuali tecnici per i medici e Manuali di riferimento

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Il presente supplemento fornisce una panoramica ad alto livello delle differenze principali fra il Sistema di programmazione ZOOM® LATITUDE modello 3120 e il Sistema di programmazione LATITUDE modello 3300 (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).

Gli attuali manuali dei generatori d'impulsi descrivono le caratteristiche e funzionalità quando utilizzati con il Sistema di programmazione LATITUDE modello 3120 e con un Analizzatore di soglia (PSA), ad es. con il modello 3145; il presente documento si applica come supplemento al contenuto di tali manuali.

NOTA: il Sistema di programmazione modello 3300 ha le stesse funzioni di base e lo stesso uso previsto del Sistema di programmazione modello 3120 (Figura 1).

Risorse primarie

Esistono manuali separati che descrivono il Sistema di programmazione LATITUDE modello 3300. Leggere dapprima i seguenti:

- Manuale per l'operatore del Sistema di programmazione LATITUDE, modello 3300
- Manuale per l'operatore della Gestione dati paziente, modello 3931
- Manuale per l'operatore relativo a rete e connettività, modello 3924

NOTA: per la funzionalità PSA, vedere il Manuale per l'operatore dell'Analizzatore di soglia (PSA), modello 3922.

Per copie in formato elettronico, visitare www.bostonscientific-elabeling.com. Per copie cartacee, contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni riportate sul retro di questo supplemento.

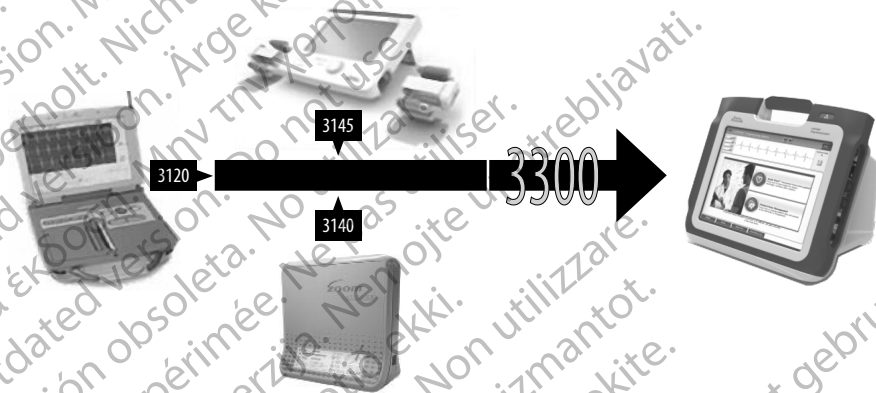


Figura 1. Sistema di programmazione modello 3300

Differenze principali

Software

- L'applicazione di supporto ICD/CRT-D modello 3868 sostituisce l'applicazione modello 2868.
- Il modello 3868 sostituisce inoltre il modello 2868 all'interno dell'identificatore GI a raggi X.

- L'applicazione di supporto Pacemaker/CRT-P modello 3869 sostituisce l'applicazione modello 2869.
 - Il modello 3869 sostituisce inoltre il modello 2869 all'interno dell'identificatore GI a raggi X.
- L'applicazione software di sistema modello 3909 con l'app Quickstart sostituisce l'applicazione modello 2909.

Rete

- Ora è possibile il trasferimento wireless dei dati paziente tramite Bluetooth®.

Tasti

- Il pulsante RED STAT sostituisce i tasti funzione fisici STIM, STAT, SHOCK STAT e DEVIAZIONE TERAPIA. Fornisce supporto per PSA STIM, STAT, STIM, STAT, SHOCK STAT e Deviazione.
- I tasti funzione fisici INTERROGAZIONE e PROGRAMMA sono sostituiti da pulsanti soft key.
- La funzionalità Registro in tempo reale sostituisce i tasti funzione fisici per la velocità della carta. Pulsanti soft key sostituiscono i tasti funzione fisici Calibra e Valore basale.

Memorizzazione dati

- L'unità USB sostituisce l'unità/supporto floppy.

Stampa

- Il supporto per stampante esterna tramite USB e Bluetooth® sostituisce il registratore su nastro di carta interno.

Trasmittitore Zoom wireless

- L'hardware interno sostituisce il Trasmittitore Zoom wireless.

Generatori d'impulsi esistenti

- Il Programmatore modello 3300 supporta quasi tutti i recenti generatori d'impulsi di Boston Scientific. Se lo si desidera, contattare Boston Scientific per determinare quali modelli di generatori d'impulsi sono supportati.

Dichiarazione sui marchi commerciali

I seguenti sono marchi di Boston Scientific Corporation o di sue affiliate: LATITUDE e ZOOM. Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth® SIG.

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



FABBRICANTE

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

PRODOTTO PRESSO

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC REP

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

INDIRIZZO SPONSOR AUSTRALIANO

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-024 IT 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.